




クラス	Premium	Advanced	Advanced	Special	Special
ヘッド角度	94°	100°	90°	90°	45°
素材	チタン	ステンレス	ステンレス	ステンレス	チタン
DURAGRIP	•				
DURACOAT					•
セラミックボールベアリング	•	•	•	•	•
グラスロッドライト	•	•	•	•	•
クリーンヘッドシステム	•	•	•	•	•
		•	•		
 プッシュボタン式チャック	•	•	•	•	•
カートリッジ交換	•	•	•	•	
3X-Power System		•	•		
水フィルター	•				
主水	4点	4点	4点	1点	3点
製品保証	2年	1年	1年	1年	1年

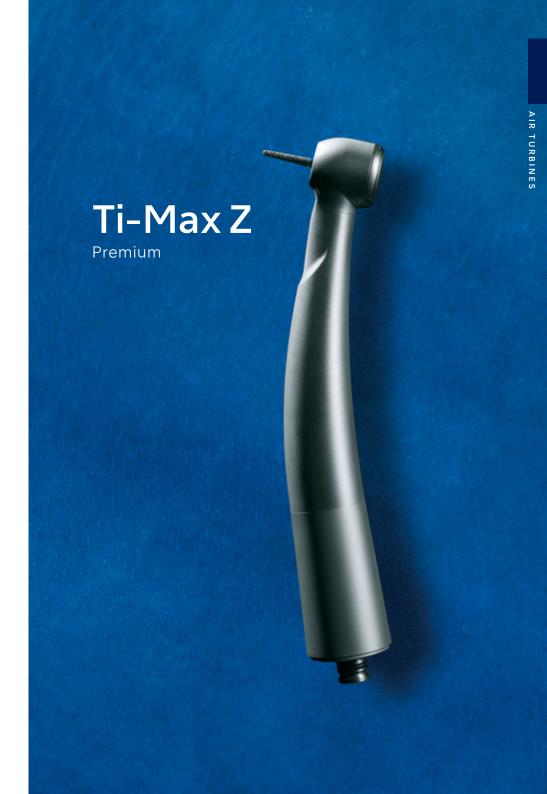

POWERFUL

エアータービンに、パワフルな進化を。

エアータービンTi-Max Zは、ハンドピースに必要なあらゆる要素をより高いレベルまで追求。つねに"期待を上回る製品を提供する"という哲学のもと、一切の妥協を許さないナカニシの製品設計と超精密加工技術によって次のステージへ。もっと使いやすく、もっとスピーディーに。そして、もっとスムーズな治療を。そんなすべてのドクターのニーズに応えるために、高性能エアータービンのベストパランスを求めて。ハイパワーを活かす新たな進化が、歯科医療の現場を変えていきます。



大きなパワーのための小さなパーツ、ナカニシはまずローターの形状にこだわりました。


3D形状ローター

専用のコンピューター解析ソフトを導入し、より 高出力を得るためのローターを開発。既成概念 にとらわれず、シミュレーションと試作を重ね、 3次元曲線の新形状を生み出しました。従来製 品エアーターピンTi-Max Xに比べ、羽根の面 積を約50%アップ。このローターによって、 26 Wの高出力を実現しました。 **2900Lのみ

Ti-Max Xカートリッジ Ti-Max Xカートリッジ 羽根面積50%UP

高出力による滑らかな切削感を実現

新形状ローターによる高出力で、従来のエアータービンに比べ滑らかな切削感を実現。術者にとっても、患者さまにとっても、より快適な治療を行うための新たな進化です。

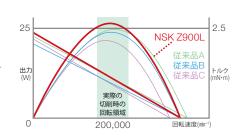

DURABLE

ハイパワーならではの快適さを長時間キープする、 優れた耐久性と安定性。

安定した高いパフォーマンスを維持するために、ナカニシ独自の先進技術を投入。緻密な設計と精密な加工、パーツの材質や表面処理の工夫。さらに、当社従来品の約2倍の耐久性を誇る新開発ベアリングを採用しました。「安心の2年保証」は、その耐久性に対する自信の証です。

エアータービンのベアリング耐久性が従来の約2倍

過酷な使用状況の中でボールを保持する部品であるリテーナーの摩擦抵抗を減らすため、素材や 形状を全面的に見直し、当社従来品の約2倍の耐久性を誇るベアリングを開発。熱水洗浄やオート クレーブの繰り返しにも対応できる耐久性を実現しました。

滑りにくく傷つきにくい表面処理技術"DURAGRIP"

純チタン製ボディーの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の"DURAGRIP"コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により滑りにくく快適なグリップ感を確保します。



摩擦係数:μ=1.8



Ti-Max Z Premium

Z800/Z900



94°アングルヘッド チタン製ボディー & DURAGRIP セラミックボールベアリング グラスロッドライト クリーンヘッドシステム プッシュボタン式チャック カートリッジ交換可能 水フィルター内蔵 4点注水スプレー 安心の2年保証



ミニヘッド パワー: 23 W (Z800L) 21 W (Z800L以外) 回転速度: 360,000-440,000 min-1 ヘッドサイズ:ø10.8 × H 12.1 mm

スタンダードヘッド パワー: 26 W (Z900L) 24 W (Z900L以外) 回転速度: 320,000-400,000 min-1 ヘッドサイズ: ø12.5 × H 13.1 mm

NSK パテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	Z800L	P1110	¥125,000
	スタンダード	•	Z900L	P1111	¥125,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	Z800ML	P1122	¥125,000
	スタンダード	•	Z900ML	P1123	¥125,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	Z800YL	P1126	¥125,000
	スタンダード	•	Z900YL	P1127	¥125,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	Z800FL	P1128	¥125,000
	スタンダード	•	Z900FL	P1129	¥125,000
KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	Z800KL	P1112	¥125,000
	スタンダード	•	Z900KL	P1113	¥125,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	==	•	Z800SL	P1114	¥125,000
	スタンダード	•	Z900SL	P1115	¥125,000

Ti-Max Z プロモーション動画



Ti-Max Z カートリッジ交換 ▶















MORE POWERFUL


最新の流体シミュレーションソフトウェアを駆使し、給排気をつかさどる「3X-Power System」を新開発。

これにより空気を効率よく出力に変換でき、20 Wから26 W*への大幅なパワーアップを実現させました。

ハンドピースが術者のカラダの一部になったような操作感と、 より繊細な施術を可能にする切削感。

洗練されたスリムなボディーシェイプには、ハンドピースのエキスパートであるナカニシが長年培ってきたノウハウとテクノロジーが詰まっています。 **M900L

従来品とのパワー比較

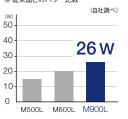

3X-Power System (FUT/NITY/DAXTO-DAFL)



Extended Cylindrical Nozzle

突出円筒型ノズル

ノズル構造を最適化。整った空気の流れを生み出し、空気のロスを低減。 空気の力を高効率で回転力に変換します。



Expanded Rotor Bucket

ローターバケットの拡大

空気を受ける面積が従来比100%UP (2倍)。広いパケット面で無駄なく空 気を受けて高トルクを実現します。



Expanded Exhaust Groove

排気溝の拡大

拡大した排気溝で、バケットが受けた 空気を速やかに排気。スムーズな排気 により、低回転速度域のトルクが向上 します。

選べるヘッドサイズと高トルクの切削



M micro ミニヘッド

20 W



M800 スタンダードヘッド 23 W



M900 トルクヘッド 26 W

SAFETY & INFECTION CONTROL

クイックストップ機能

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能を搭載。口腔内での巻き込み防止などの安全性を向上。 これにより、高速回転による効率的な切削と、クイックストップによる安全性の高い治療が可能です。

S-Max M900L クイックストップ & 切削 動画





ストッパー

エアーの供給を停止すると、ストッパーのゴム が回転軸に接触してブレーキを掛けます。

クリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、エアータービン へのサックバックを大幅に軽減します。



3ステップで簡単に交換可能なカートリッジ

交換手順はわずか3ステップ。修理に出す時間のロスを抑えます。



付属のヘッドキャップレンチをヘッド キャップに合わせ、反時計方向に回す と取り外せます。

28



バーを押し上げると、ヘッドからカート リッジが外れます。



新しいカートリッジを切り欠きに合わせて挿入。ヘッドキャップを付属のレンチで取り付ければ完成です。

M micro カートリッジ 交換動画



M800/M900 カートリッジ 交換動画



M micro USABILITY

ミニヘッド+100°アングルヘッドによる高いアクセス性

S-Max M microは、100°アングルヘッドで臼歯部へスムーズにアクセス。ミニヘッドのため、広い視野を確保することができます。口腔内の生理的なカーブ(スピーカーブやウィルソンカーブ)を考慮したデザインで、臼歯部へアクセスした際に、前歯に干渉するリスクが少なく、ストレスを低減した施術が可能です。







スピーカーブ

写直提供:ウエマツ歯科医院

S-Max M800Lとの比較



S-Max M microの効果的な施術

上顎頬側部7番への使用(筋突起が近接した際のアクセス)

日常臨床での施術しにくい部位 (開口時に生じる筋突起の近接) に対して、100° アングルが施術時の視界を妨げず、ミニヘッドがアクセスを容易にし、ストレスを低減した施術が可能です。





写真提供:ウエマツ歯科医院

上顎前歯、支台歯形成時の使用

ヘッドの前面が隣在歯に干渉せずに施術が可能です。シリーズ最小ヘッドは様々な施術で効果を発揮します。




写真提供:モリカゲ歯科医院

S-Max M Advanced

M micro



100°アングルヘッド ステンレス製ボディー セラミックボールベアリング グラスロッドライト クリーンヘッドシステム クイックストップ プッシュボタン式チャック カートリッジ交換可能 3X-Power System 4点注水スプレー

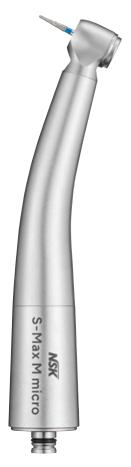

ミニヘッド パワー: 20 W 回転速度: 380,000-450,000 min⁻¹ 350,000-450,000 min⁻¹ (M micro YL, M micro FL) ヘッドサイズ: e9.0 × H 10.8 mm スタンダード/ショートシャンクパー専用 M800/M900



90°アングルヘッド ステンレス製ボディー セラミックボールベアリング グラスロッドライト クリーンヘッドシステム クイックストップ プッシュボタン式チャック カートリッジ交換可能 3X-Power System 4点注水スプレー



スタンダードヘッド パワー: 23 W 回転速度: 380,000-450,000 min⁻¹ 350,000-450,000 min⁻¹ (M800YL, M800FL) ヘッドサイズ: ø10.6 × H 12.4 mm スタンダード/ショートシャンクパー専用



トルクヘッド パワー: 26 W 回転速度: 325,000-430,000 min⁻¹ 300,000-410,000 min⁻¹ (M900YL, M900FL) ヘッドサイズ: o12.1 x H 13.3 mm スタンダードシャンクパー専用

30

S-Max M Advanced

M micro / M800 / M900


NSK パテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	= =	•	M micro	PA2306	¥103,000
	スタンダード	•	M800L	P1253	¥103,000
	トルク	•	M900L	P1254	¥103,000
NSK マッハカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	_	M800	P1255	¥78,000
	トルク	_	M900	P1256	¥78,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	M micro ML	PA2313	¥103,000
	スタンダード	•	M800ML	P1267	¥103,000
	トルク	•	M900ML	P1268	¥103,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	= =	•	M micro YL	PA2314	¥103,000
	スタンダード	•	M800YL	P1269	¥103,000
	トルク	•	M900YL	P1270	¥103,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	==	•	M micro FL	PA2315	¥103,000
	スタンダード	•	M800FL	P1271	¥103,000
	トルク	•	M900FL	P1272	¥103,000

KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	M micro KL	PA2309	¥103,000
	スタンダード	•	M800KL	P1257	¥103,000
	トルク	•	M900KL	P1258	¥103,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	≅=	•	M micro SL	PA2310	¥103,000
	スタンダード	•	M800SL	P1261	¥103,000
	トルク	•	M900SL	P1262	¥103,000

S-Max M800 / M900 プロモーション動画





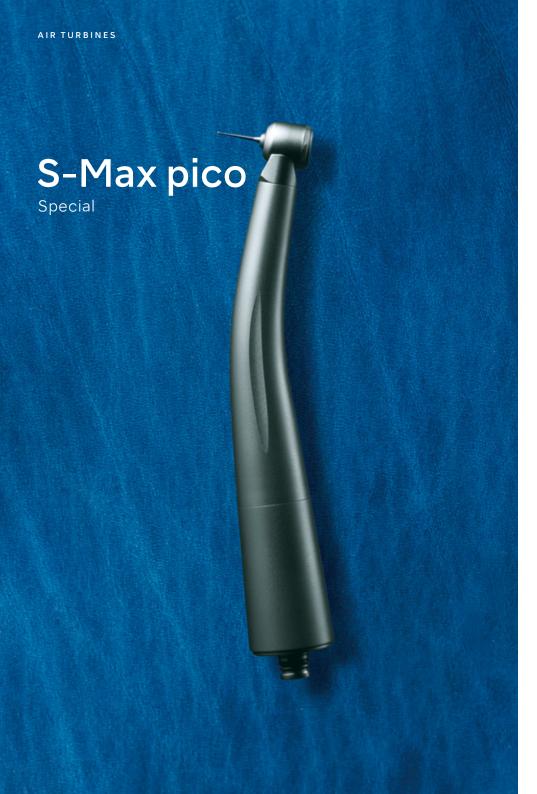

優しさをカタチにした ウルトラミニヘッド&スーパースリムボディーのエアータービン

ウルトラミニヘッドとスーパースリムボディーのエアータービンS-Max picoは、MIやマイクロスコープを用いた高い精度を求められる施術のために開発されました。通常のエアータービンと比べて十分な術野が確保できるため、小児治療や顎関節症などで口を大きく開けることの難しい患者さまに対する治療や、臼歯部の舌側遠心の切削、咬合面でのチャンバーオープンやミラーテクニックを用いる際など、繊細さの求められる施術で大きな力を発揮します。

広い術野の確保







マイクロスコープを用いた施術例



広い術野を確保できるので、マイクロスコープを使用した窩洞形成の際にも、ミラーテクニックを併用して、窩洞内部を確認しながらの形成も可能です。

ミラーテクニックの併用



写真提供:ウエマツ歯科医院

pico専用バー

ナカニシは、S-Max picoの性能を最大限に発揮するために専用のバーを開発しました。この専用バーは、高い真円度と高い芯ブレ精度(3 μm以下)を誇り、MIなどのより精度を求められる施術に最適です。

高い真円度と高い芯ブレ精度を実現 (回転速度: 400,000 min⁻¹)



pico/\(\mathbb{/}-(PC1)

S-Max pico Special



90°アングルヘッド ステンレス製ボディー セラミックボールベアリング グラスロッドライト クリーンヘッドシステム プッシュボタン式チャック シングルスプレー



回転速度: 380,000-450,000 min⁻¹ 360,000-430,000 min⁻¹ (S-Max pico YL, pico FL) ヘッドサイズ: Ø8.6 × H 9.0 mm ショートシャンクバー / スーパーショートシャンクバー専用

NSK パテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico	P1140	¥115,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico ML	P1146	¥115,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico YL	P1148	¥115,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico FL	P1165	¥115,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico KL	P1142	¥115,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	S-Max pico SL	P1143	¥115,000












	1-	16.0	
+	7.0	-	
ø1.2∓	-	100	\longrightarrow
1			

	14.0	-1
1	4.0	
ø1.6	W35003	
†		

		14.0	
	ļ	4.0	
ø1.6	Ι	THE REAL PROPERTY.	
	1		

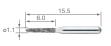

製品名	製品番号	標準価格
PC1	Y1001817	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC2	Y1001818	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC3	Y1001819	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC3ff	Y1002019	¥2,700
●エクストラファインバ	- ●3本入	
製品名	製品番号	標準価格
PC4	Y1001820	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC4ff	Y1002020	¥2,700
●エクストラファインバ	一 ●3本入	
製品名	製品番号	標準価格
PC5	Y1001821	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC5ff	Y1002021	¥2,700
●エクストラファインバ	- ●3本入	
製品名	製品番号	標準価格
PC6	Y1001822	¥2,700
●3本入		
製品名	製品番号	標準価格
PC6ff	Y1002022	¥2,700
●エクストラファインバ	一 ●3本入	



45°ヘッドがもたらす高いアクセス性 智歯や埋伏歯の分割・抜歯をスムーズに

エアータービンTi-Max X450は、特徴的な45°ヘッドとスリムなボディーデザインにより、通常のエアータービンではアクセスの困難な智歯や埋伏歯の分割、抜歯等に大きな力を発揮します。21 Wの高トルクがもたらす力強い切削と、3点ジェット注水方式による高い冷却効果に加え、エアータービンTi-Max X450ならではの多様な術式に対応します。



高いアクセス性

45°のヘッド角度により、高いアクセス性 と広い視野を確保。埋伏智歯を覆ってい る硬組織などの削除や歯根の分割に最適 です。

21 Wの高トルクによる力強い切削


ヘッド部に搭載されたナカニシ独自のツインノズルにより、ドライブエアーの力を余すことなくローターに伝達することで、力強く、粘りのある切削を実現しました。

Ti-Max X450だからこそ実現する臼歯部への高いアクセス性と多様な術式



右下8番埋伏歯の抜歯

口唇や頬粘膜との干渉が少ないため、タービン本体 に余分な外力が掛からず、安全にバーを適切な角度に 保つことができます。視野の広さも特徴です。

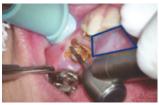

左下6番分割抜歯

前方歯牙との間に十分なスペースが確保でき、無理な くレストが置けます。バーに適切な角度を与えること が容易で、根尖に至るような深さでも正確な分割が 可能です。



写真提供:青葉会西川歯科クリニック

右下6番遠心舌側隅角部の支台歯形成

口唇や頬粘膜、歯列の影響が少なく、形成歯が前方 あるいは頬側に傾斜していても、アンダーカットを生 じない適切な軸面形成が可能です。レストも歯牙上に 容易に設定できます。

Ti-Max X450 Special



45° アングルヘッド チタン製ボディー & DURACOAT セラミックボールベアリング グラスロッドライト クリーンヘッドシステム プッシュボタン式チャック 3点注水スプレー (チッフェアーなし) *注水は噴霧状にはなりません。



パワー: 21 W (X450L)、18 W (X450L以外) 回転速度: 380,000-450,000 min⁻¹ ヘッドサイズ: ø11.2 × H 13.5 mm 25 mmロングパー専用

NSK パテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	X450L	P1078	¥114,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	X450ML	P1083	¥114,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	X450YL	P1085	¥114,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	X450KL	P1079	¥114,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	•	X450SL	P1080	¥114,000

エアーター

カップリング	ライト		Ti-Max Z800	Ti-Max Z900	S-Max M micro	S-Max M800	S-Max M900	S-Max pico	Ti-Max X450
			ミニヘッド	スタンダードヘッド	ミニヘッド	スタンダードヘッド	トルクヘッド	ウルトラミニヘッド	45°アングルヘッ
ISK パテラスカップリング		製品名	Z800L	Z900L	M micro	M800L	M900L	pico	X450L
		製品番号	P1110	P1111	PA2306	P1253	P1254	P1140	P1078
300		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
ISK マッハカップリング						14000	Mooo		
		製品名				M800 P1255	M900 P1256		
	_	製品番号標準価格	_	_	_	¥78,000	¥78,000		
Εリタαメインチューブ			7000141	7000MI	Mariana Mi	MOOOMI	MACCOM	ning MI	VAFORAL
		製品名	Z800ML P1122	Z900ML P1123	M micro ML PA2313	M800ML P1267	M900ML P1268	pico ML P1146	X450ML P1083
		製品番号							
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
ヨシダクイックジョイント		製品名	Z800YL	Z900YL	M micro YL	M800YL	M900YL	pico YL	X450YL
HANNE THE THIRD		製品番号	P1126	P1127	PA2314	P1269	P1270	P1148	P1085
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
ナサダファインジョイント		製品名	Z800FL	Z900FL	M mioro El	M800FL	M900FL	pico FL	
		製品番号	P1128	P1129	M micro FL PA2315	P1271	P1272	P1165	
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	_
KaVo® Multiflex®			70001/1	7000//	Markova 14	MODOLA	MODOLA	-1 1/1	VAFOIA
		製品名	Z800KL	Z900KL	M micro KL	M800KL	M900KL	pico KL	X450KL
		製品番号	P1112	P1113	PA2309	P1257	P1258	P1142	P1079
		標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000
Sirona® Quick coupling		製品名	Z800SL	Z900SL	M micro SL	M800SL	M900SL	pico SL	X450SL
		製品番号	P1114	P1115	PA2310	P1261	P1262	P1143	P1080
	•	標準価格	¥125,000	¥125,000	¥103,000	¥103,000	¥103,000	¥115,000	¥114,000

44

薬事情報一覧

■エアータービン

販売名: J-ディーマックス ZT 認証番号: 2224ALBZX00044000 販売名: エスマックス MT 認証番号: 221ALBZX00011000 販売名: J-ズマックス pic 認証番号: 222ALBZX00032000 一般的名称: BR サインス・メ450 認証番号: 222ALBZX00032000

一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドビース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:picoバー 届出番号:09B2X00016000122 一般的名称:歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販販売名:ティーマックス ZC 認証番号: 222ALBZX00006000 販売名:ティーマックス Z45 認証番号:224AI B7X00018000 販売名:ティーマックス XC 認証番号: 219ALBZX00013000 販売名:ティーマックス XS 認証番号: 219AI BZX00014000 販売名:コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号: 222ALBZX00008000 販売名:ストレートハンドピース FX65 認証番号: 222AI BZX00004000 販売名:コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号:219ALBZX00006000 販売名: コントラアングルハンドピース NRS2 承認番号: 22200BZX00204000 販売名:NSK プロフィー AR 認証番号: 222ALBZX00027000 販売名:歯間研磨用ハンドピース EVA | 認証番号:222A| R7X00028000 販売名:エンド用コントラ VM 承認番号: 20800BZZ00762000 販売名:ストレートハンドピース EX - 6 認証番号: 219ALBZX00002000

一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:エンド用コントラ MP 承認番号:22200BZX00182000 販売名:エンド用コントラ MPAS 承認番号:22200BZX00184000 一般的久奈: 総封日柳管拡大装置 管理医療機器

販売名:isoEーラックス 届出番号:09B2X00016000150 一般的名称:歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名:NLX ナノ 認証番号:221ALBZX00015000 一般的名称:歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:ティーマックス X205L 認証番号:224ALBZX00027000 販売名:エスマックス M205 認証番号:222ALBZX00009000 一般的名称:歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名:パリオスコンビ Pro 認証番号:229ALBZX00017000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:パリオス 970 認証番号:223ALBZX00032000 販売名:パリオス 370 認証番号:223ALBZX00037000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器 米チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名: 1.54 ーマックス 5.9 7 0 認証番号: 223AL EZX00028000 版売名: 1.55 0 ソニックプラシセット 認証番号: 222AL EZX00018000 版売名: N 5 K エアスケーラ用チップ 認証番号: 224AL EZX00042000 一般的名称: 歯科用エアスケーラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器・チンプは特定保守管理医療機器

販売名: プロフィーメイト neo 認証番号: 223ALBZX00029000 販売名: ベリオメイト 認証番号: 226ABBZX00023000

一般的名称:能動型機器接続歯面清掃用器具 管理医療機器

販売名: フラッシュパール 届出番号: 09B2X00016000034 販売名: フリーニングパウダー 届出番号: 09B2X00016000001 販売名: ペリナメイト パウダー 届出番号: 09B2X00016000139 ー般的条紙: 貨商品研整材 一般医療機器

販売名:ペリオメイト ノズルチップ 届出番号:09B2X00016000140 一般的名称:歯科用注入器具 一般医療機器

販売名:アイブロフィー 認証番号:226ABBZX00034000 一般的名称:歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名:エンドメイト TC2 認証番号:222ALBZX00018000 一般的名称: 歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:アイペックス II 認証番号:224ALBZX00015000 一般的名称:歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名:ビバエース 認証番号: 227ABBZX00112000 販売名:ビバサポート 2 認証番号: 224ALBZX00017000 一般的名称: 可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名: NLX プラス 認証番号: 221ALBZX00019000 販売名: ビバメイト G5 認証番号: 223ALBZX00022000

一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器 販売名:ビバ Q 認証番号:230ALBZX00025000

- 般的名称: 歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名:パリオス 170 認証番号:223ALBZX00036000 一般的名称:歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名: ディーマックス X-DSG20L 届出番号: 0982X00016000124 販売名: ディーマックス X-DSG20 販売名: ディーマックス X-SG20L 届出番号: 0982X00016000132 販売名: エスマックス SG20 届出番号: 0982X00016000042 販売名: ディーマックス X-SG 組織番号: 0982X000160000137 一般的名称: デオーマックス X-SG

販売名:ティーマックス Z-SG45 届出番号:226ABBZX00073000 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:サージック Pro2 認証番号:303ALBZX00014000 一般的名称:電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名:コントラアングルルンドピース SGMS―ER 届出番号: 09B2XX00016000015 販売名: サージカルハンドピース SGMS―ER 届出番号: 09B2XX00016000018 販売名: ストレートハンドピース SGS―E 届出番号: 09B2XX000160000014 販売名: アンブルハンドピース SGA―E 届出番号: 09B2XX000160000014 販売名: アンブルハンドピース SGA―E 届出番号: 09B2XX0016000012 一般的名称: 手衛用ドリルアタッチメント 一般版名を第26機器

販売名:SGR-E用ソープレード 販売名:SGO-E用ソープレード 販売名:SGT-E用ソープレード 服出番号:09B2X00016000098 販売名:SGT-E用ソープレード 届出番号:09B2X00016000100

一般的名称:のこぎり 一般医療機器

販売名: i SD9 0 0 スクリュードライバー 認証番号: 222ALBZX00016000 一般的名称: 雷池雷源式骨手術田器様 管理医療機器

販売名:バリオサージ 3 認証番号:225ABBZX00144000 一般的名称:電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名:サージカル イリゲーションチューブ 認証番号: 09B1X00001000023 一般的名称:洗浄器キット 一般医療機器

販売名: ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号: 09B2X00016000141 一般的名称: 歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名: オッセオ 100+ 届出番号: 09B2X00016000153 一般的名称: 歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名:アイクレーブミニ2 認証番号:302ABBZX00049000 一般的名称:小型包装品用高圧蒸気滅菌器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名: アルチメイト XL 届出番号: 09B2X00016000030 販売名: ボルバーi7 届出番号: 09B2X00016000149 一般的名称: 歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名: プレスト アクア LUX 届出番号: 09B2X00016000038 販売名: プレスト アクア II 届出番号: 09B2X00016000010 販売名: プレスト II 届出番号: 09B2X00016000009 一般的条称: 歯科技工用ガス圧式/ンドピース 一般医療機器

カスタムエアーは、(株)モリタ東京製作所の登録機能です。 KaVoとMultiflexis、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録機能です。 Dentsply Sironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録機能です。 Bien Air-LUNIFIXは、Bien-Air Holding SAの登録機能です。 WARHは、WAR Deutschland Gmbhの登録機能です。 WARHは、WAR Deutschland Gmbhの登録機能です。 IPad*は、アメリカ余楽国およびその他の国々におけるApple Computer,Inc. の登録機能です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636 東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064 大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル 10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 🔯 0120-7242-56 受付時間:平日9:00~17:00

本力タログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。 仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。 (標準価格は2021年9月1日現在のものです)

