

AIR TURBINES



Ti-Max Z890/Z990 S-Max M micro S-Max M800/M900 S-Max pico Ti-Max X450



クラス	Premium	Advanced	Advanced	Special	Special
ヘッド角度	100°	100°	90°	90°	45°
素材	チタン	ステンレス	ステンレス	ステンレス	チタン
DYNAMIC POWER SYSTEM	●				
3X-Power System		●	●		
DURAPOWЕР CHUCK	●				
DURAGRIP	●				
DURACOAT					●
セラミックボールベアリング	●	●	●	●	●
グラスロッドライト	●	●	●	●	●
クリーンヘッドシステム	●	●	●	●	●
クイックストップ	●	●	●		
プッシュボタン式チャック	●	●	●	●	●
カートリッジ交換	●	●	●	●	
水フィルター	●				
注水	4点	4点	4点	1点	3点
製品保証	2年	1年	1年	1年	1年

Ti-Max Z

Premium



DYNAMIC POWER SYSTEM

3X-Power Systemが進化した、さらなる切削感をもたらす新システム「DYNAMIC POWER SYSTEM」を搭載。排気溝の拡大、ノズル構造の最適化、ローターバケットの拡大に加え、独自の機構を加えたことでさらなるパワーアップが実現しました。これにより、時間を要するジルコニアの除去も驚くほどスムーズに。是非、力強く、粘りのある切削感をご体感ください。




Ti-Max Z990L
ジルコニア板切削パワー
比較動画



DURAPOWER CHUCK

現行のチャック*に対して、約2倍の耐久性を誇る新チャック機構「DURAPOWER CHUCK」を搭載。従来モデルより把持力が大きく向上し、高い把持力が長時間継続します。独自の構造によりバーのスリップや芯ブレのリスクを低減し、長時間の切削に持ち堪える耐久性が、ここに実現。

*チャックとは、ハンドピースのバー（切削する棒）を保持する部分。この部分が改良され、新型のチャック機構搭載により、チャックの耐久力が向上。

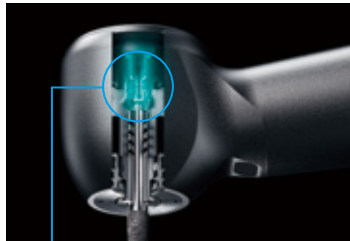

くさび効果により向上した
グリップ力

ナカニシ独自の技術でチャック機能を強化。くさび形状のパーツにより、遊びが少ない高いホールド感でバーをしっかりとグリップ。バー抜けのリスクも防ぎます。


Ti-Max Z990L
DURAPOWER
CHUCK 耐久性の動画



USABILITY

チタン製軽量ボディと100°アングルヘッド

チタン製で、さらに従来より内部構造を見直すことで、従来比16%の軽量化を実現。口腔内の生理的なカーブ（スピーカーブやウィルソーカーブ）を考慮し、100°アングルヘッドが口腔内でのスムーズなアクセスと高トルクの切削で効率良い施術が可能。

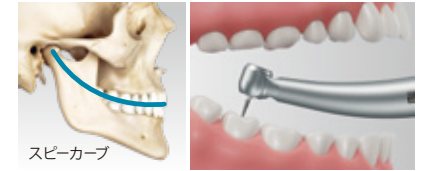

Ti-Max Z890LとZ800Lの比較

Z890L: 100°
Z800L: 94°


Z890L: $\phi 10.6 \times H 10.8 \text{ mm}$
Z800L: $\phi 10.8 \times H 12.1 \text{ mm}$



SAFETY & INFECTION CONTROL

クイックストップ搭載の新クリーンヘッドシステム

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能をヘッド内の前後に搭載。慣性回転を防ぐ急停止により、口腔内での巻き込み等の怪我のリスクを低減する安全性に配慮した治療が可能となります。また、ヘッド前後からのサックバックを防ぐ機能が向上し、衛生面での安全性も向上しました。

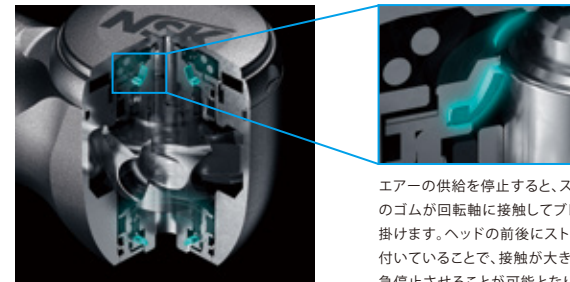

エアーの供給を停止すると、ストッパーのゴムが回転軸に接触してブレーキを掛けます。ヘッドの前後にストッパーが付いていることで、接触が大きくなり、急停止させることが可能となりました。

Ti-Max Z TECHNOLOGY & FUNCTION

クリーンヘッドシステム

高速回転を急停止するクイックストップ機能をヘッド前後に搭載した構造。口腔内での巻き込みや、サックバックのリスクを低減させ、安全性を向上させました。

高い把持力のチャック機構

従来よりチャックの耐久性を向上させた「DURAPOWERC HUCK」を搭載。把持力が落ちにくく、芯ブレのリスクを低減します。

滑りにくいDURAGRIPコーティング

滑りにくく傷が付きにくい独自の表面処理により、耐久性がアップし快適なグリップ感を確保します。

水フィルター内蔵

水経路への異物混入をシャットアウト。水詰まりのトラブルを低減します。

簡単に交換可能なカートリッジ


カートリッジはユーザーで自身で簡単に交換出来る仕様になっているため、修理に出す時間が削減でき、いつも良好な状態での施術環境へ。

冷却範囲を拡大した4点注水スプレー

視認性を妨げることなく、バー全体を効率よく冷却。注水を2方向に分けることにより、様々な長さのバーに対して、適切な冷却が可能。


チタン製の軽量ボディ

軽量で高い強度を持つ純チタン素材をボディに採用。

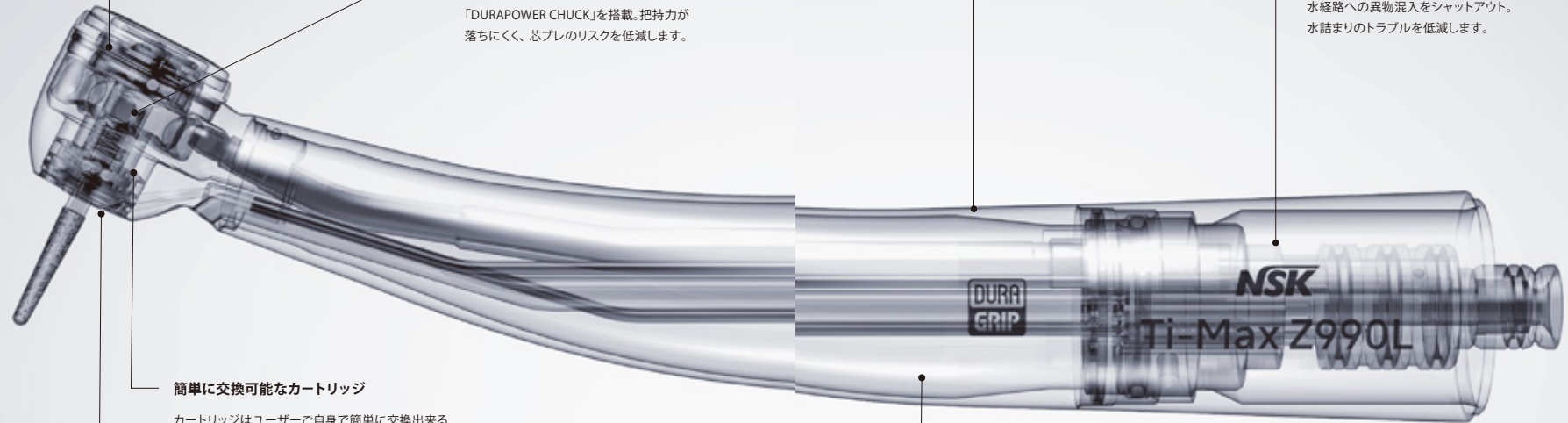

Ti-Max Z Premium

Z890/Z990

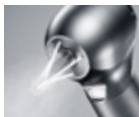

100° アングルヘッド
 DYNAMIC POWER SYSTEM
 DURAPOWVER CHUCK
 チタン製ボディー & DURAGRIP
 セラミックボールベアリング
 グラスロッドライト
 クリーンヘッドシステム
 クイックストップ
 プッシュボタン式チャック
 カートリッジ交換可能
 水フィルター内蔵
 4点注水スプレー
 安心の2年保証



スタンダードヘッド
 パワー：41 W*
 回転速度：320,000-400,000 min⁻¹
 ヘッドサイズ：φ10.6 × H 10.8 mm
 スタンダード / ショートシャンクバー用

トルクヘッド
 パワー：44 W*
 回転速度：280,000-360,000 min⁻¹
 ヘッドサイズ：φ12.1 × H 12.7 mm
 スタンダードシャンクバー用

*使用可能給気圧の最大値0.42MPa時の自社試験データ。
 ご使用の際は、0.28MPa以下を推奨致します。

NSK バテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890L	PA23720001	¥142,000
	トルク	●	Z990L	PA23730001	¥142,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890ML	PA23880001	¥142,000
	トルク	●	Z990ML	PA23890001	¥142,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890YL	PA23900001	¥142,000
	トルク	●	Z990YL	PA23910001	¥142,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890FL	PA23920001	¥142,000
	トルク	●	Z990FL	PA23930001	¥142,000
KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890KL	PA23740001	¥142,000
	トルク	●	Z990KL	PA23750001	¥142,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890SL	PA23760001	¥142,000
	トルク	●	Z990SL	PA23770001	¥142,000

Ti-Max Z890 / Z990
 プロモーション動画 ▶



Ti-Max Z890 / Z990
 カートリッジ交換動画 ▶



エアタービン
 メンテナンス動画 ▶






S-Max M


M micro / M800 / M900

Advanced


選べるヘッドサイズと高トルクの切削

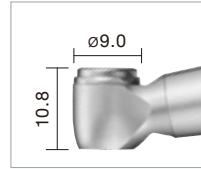

M micro
ミニヘッド 20 W

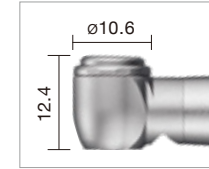

M800
スタンダードヘッド 23 W

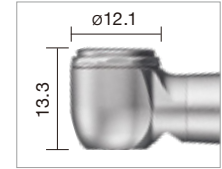

M900
トルクヘッド 26 W

3ステップで簡単に交換可能なカートリッジ

交換手順はわずか3ステップ。修理に出す時間のロスを抑えます。



1 付属のヘッドキャップレンチをヘッドキャップに合わせて、反時計方向に回すと取り外せます。



2 バーを押し上げると、ヘッドからカートリッジが外れます。



3 新しいカートリッジを切り欠きに合わせて挿入。ヘッドキャップを付属のレンチで取り付ければ完成です。

M micro
カートリッジ
交換動画



M800 / M900
カートリッジ
交換動画




S-Max M microの効果的な施術

上顎側部7番への使用 (筋突起が近接した際のアクセス)

日常臨床での施術しにくい部位 (開口時に生じる筋突起の近接) に対して、100°アングルが施術時の視界を妨げず、ミニヘッドがアクセスを容易にし、ストレスを低減した施術が可能です。



写真提供：ウエマツ歯科医院

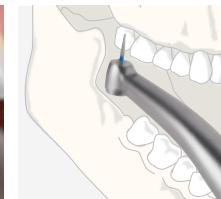

上顎前歯、支台歯形成時の使用

ヘッドの前面が隣在歯に干渉せずに施術が可能です。シリーズ最小ヘッドは様々な施術で効果を発揮します。



写真提供：モリカゲ歯科医院

S-Max M Advanced

M micro



100°アングルヘッド
3X-Power System
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
クイックストップ
プッシュボタン式チャック
カートリッジ交換可能
4点注水スプレー



ミニヘッド
パワー：20 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M micro YL, M micro FL)
ヘッドサイズ：ø9.0 × H 10.8 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用

M800/M900



90°アングルヘッド
3X-Power System
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
クイックストップ
プッシュボタン式チャック
カートリッジ交換可能
4点注水スプレー



スタンダードヘッド
パワー：23 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M800YL, M800FL)
ヘッドサイズ：ø10.6 × H 12.4 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用

トルクヘッド
パワー：26 W
回転速度：325,000-430,000 min⁻¹
300,000-410,000 min⁻¹ (M900YL, M900FL)
ヘッドサイズ：ø12.1 × H 13.3 mm
スタンダードシャンクバー用

S-Max M Advanced

M micro / M800 / M900

NSK バテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro	PA2306	¥108,000
	スタンダード	●	M800L	P1253	¥108,000
	トルク	●	M900L	P1254	¥108,000
NSK マッハカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	—	M800	P1255	¥82,000
	トルク	—	M900	P1256	¥82,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro ML	PA2313	¥108,000
	スタンダード	●	M800ML	P1267	¥108,000
	トルク	●	M900ML	P1268	¥108,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro YL	PA2314	¥108,000
	スタンダード	●	M800YL	P1269	¥108,000
	トルク	●	M900YL	P1270	¥108,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro FL	PA2315	¥108,000
	スタンダード	●	M800FL	P1271	¥108,000
	トルク	●	M900FL	P1272	¥108,000

KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro KL	PA2309	¥108,000
	スタンダード	●	M800KL	P1257	¥108,000
	トルク	●	M900KL	P1258	¥108,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro SL	PA2310	¥108,000
	スタンダード	●	M800SL	P1261	¥108,000
	トルク	●	M900SL	P1262	¥108,000

S-Max M800 /
M900
プロモーション動画



エアタービン
メンテナンス動画



S-Max pico



Special



優しさをカタチにした ウルトラミニヘッド & スーパースリムボディのエアタービン

ウルトラミニヘッドとスーパースリムボディのエアタービンS-Max picoは、MIやマイクロスコープを用いた高い精度を求められる施術のために開発されました。通常のエアタービンと比べて十分な術野が確保できるため、小児治療や顎関節症などで口を大きく開けることの難しい患者さまに対する治療や、臼歯部の舌側遠心の切削、咬合面でのチャンバーオープンやミラーテクニックを用いる際など、繊細さの求められる施術で大きな力を発揮します。

広い術野の確保

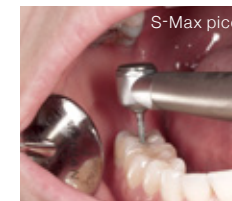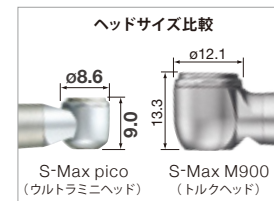

マイクロスコープを用いた施術例



広い術野を確保できるので、マイクロスコープを使用した窩洞形成の際にも、ミラーテクニックを併用して、窩洞内部を確認しながらの形成も可能です。

ミラーテクニックの併用




写真提供：ウエマツ歯科医院

pico専用バー

ナカニシは、S-Max picoの性能を最大限に発揮するために専用のバーを開発しました。この専用バーは、高い真円度と高い芯ブレ精度(3 μm以下)を誇り、MIなどのより精度を求められる施術に最適です。

高い真円度と高い芯ブレ精度を実現
(回転速度: 400,000 min⁻¹)

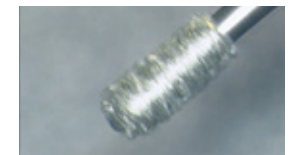

picoバー(PC1)

S-Max pico Special



90°アングルヘッド
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
シングルスプレー











パワー：9 W
回転速度：380,000~450,000 min⁻¹
360,000~430,000 min⁻¹ (S-Max pico YL, pico FL)
ヘッドサイズ：ø8.6 × H 9.0 mm
ショートシャンクバー / スーパーショートシャンクバー用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico	P1140	¥121,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico ML	P1146	¥121,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico YL	P1148	¥121,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico FL	P1165	¥121,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico KL	P1142	¥121,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico SL	P1143	¥121,000

エアータービン
メンテナンス動画 ▶



pico専用バー

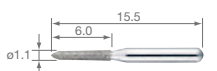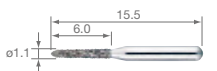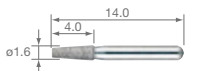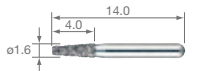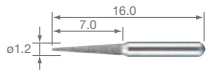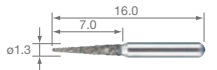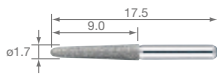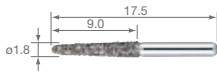

製品名	製品番号	標準価格
PC1	Y1001817	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC2	Y1001818	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3	Y1001819	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3ff	Y1002019	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4	Y1001820	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4ff	Y1002020	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5	Y1001821	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5ff	Y1002021	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6	Y1001822	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6ff	Y1002022	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		




Ti-Max X450

Special

45°ヘッドがもたらす高いアクセス性 智歯や埋伏歯の分割・抜歯をスムーズに

エアタービンTi-Max X450は、特徴的な45°ヘッドとスリムなボディデザインにより、通常のエアタービンではアクセスの困難な智歯や埋伏歯の分割、抜歯等に大きな力を発揮します。21 Wの高トルクがもたらす力強い切削と、3点ジェット注水方式による高い冷却効果に加え、エアタービンTi-Max X450ならではの多様な術式に対応します。

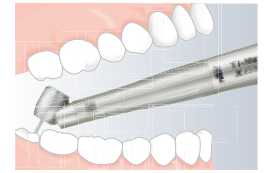

高いアクセス性

45°のヘッド角度により、高いアクセス性と広い視野を確保。埋伏智歯を覆っている硬組織などの削除や歯根の分割に最適です。

21 Wの高トルクによる力強い切削

ヘッド部に搭載されたナカニシ独自のツインノズルにより、ドライブエアの力を余すことなくローターに伝達することで、力強く、粘りのある切削を実現しました。

Ti-Max X450だからこそ実現する臼歯部への高いアクセス性と多様な術式



右下8番埋伏歯の抜歯

口唇や頬粘膜との干渉が少ないため、タービン本体に余分な外力が掛からず、安全にバーを適切な角度に保つことができます。視野の広さも特徴です。



左下6番分割抜歯

前方歯牙との間に十分なスペースが確保でき、無理なくレストが置けます。バーに適切な角度を与えることが容易で、根尖に至るような深さでも正確な分割が可能です。



右下6番遠心舌側隅角部の支台歯形成

口唇や頬粘膜、歯列の影響が少なく、形成歯が前方あるいは頬側に傾斜していても、アンダーカットを生じない適切な軸面形成が可能です。レストも歯牙上に容易に設定できます。

写真提供：青葉会西川歯科クリニック

Ti-Max X450 Special



45°アングルヘッド
チタン製ボディー & DURACOAT
セラミックボールベアリング
グラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
3点注水スプレー（チップエアなし）
※注水は噴霧状にはなりません。










パワー：21 W (X450L)、18 W (X450L以外)
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
ヘッドサイズ：φ11.2 × H 13.5 mm
25 mm ロングバー専用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450L	P1078	¥120,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450ML	P1083	¥120,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450YL	P1085	¥120,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450KL	P1079	¥120,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450SL	P1080	¥120,000

エアータービン
メンテナンス動画 ▶

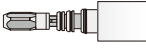

カップリングジョイント タイプ別一覧

カップリング	ライト	Ti-Max Z890		Ti-Max Z990		S-Max M micro	S-Max M800	S-Max M900	S-Max pico	Ti-Max X450
		スタンダードヘッド	トルクヘッド	ミニヘッド	スタンダードヘッド	トルクヘッド	ウルトラミニヘッド	45°アングルヘッド		
NSK パテラスカップリング 	●	製品名	Z890L	Z990L	M micro	M800L	M900L	pico	X450L	
		製品番号	PA23720001	PA23730001	PA2306	P1253	P1254	P1140	P1078	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000			
NSK マッハカップリング 	—	製品名	—	—	—	M800	M900	—	—	
		製品番号	—	—	—	P1255	P1256	—	—	
標準価格	—	—	—	—	¥82,000	¥82,000	—	—		
モリタαメインチューブ 	●	製品名	Z890ML	Z990ML	M micro ML	M800ML	M900ML	pico ML	X450ML	
		製品番号	PA23880001	PA23890001	PA2313	P1267	P1268	P1146	P1083	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000			
ヨシダクイックジョイント 	●	製品名	Z890YL	Z990YL	M micro YL	M800YL	M900YL	pico YL	X450YL	
		製品番号	PA23900001	PA23910001	PA2314	P1269	P1270	P1148	P1085	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000			
オサダファインジョイント 	●	製品名	Z890FL	Z990FL	M micro FL	M800FL	M900FL	pico FL	—	
		製品番号	PA23920001	PA23930001	PA2315	P1271	P1272	P1165	—	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	—			
KaVo® Multiflex® 	●	製品名	Z890KL	Z990KL	M micro KL	M800KL	M900KL	pico KL	X450KL	
		製品番号	PA23740001	PA23750001	PA2309	P1257	P1258	P1142	P1079	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000			
Sirona® Quick coupling 	●	製品名	Z890SL	Z990SL	M micro SL	M800SL	M900SL	pico SL	X450SL	
		製品番号	PA23760001	PA23770001	PA2310	P1261	P1262	P1143	P1080	
標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000			

薬事情報一覧

■エアタービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000
一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントララングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントララングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントララングルハンドピース Eシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：NSK プロファイアー AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯周病治療用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZ00762000
一般的名称：ストレート・ギアドラングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
販売名：バリオス 97 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 37 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシネット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケール用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケール 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロファイメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：電動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034
販売名：ペリオメイト ハウダー 届出番号：09B2X00016000139
販売名：ソフパール 届出番号：09B2X00016000157
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイブローフー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ピバエース 認証番号：227ABBZX00112000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ピバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ピバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 17 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 L 届出番号：09B2X00016000124
販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 届出番号：09B2X00016000123
販売名：ティーマックス X-D 5 G 2 0 L 届出番号：09B2X00016000042
販売名：エスマックス S G 2 0 届出番号：09B2X00016000041
販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09B2X00016000137
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G 4 5 認証番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアドラングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントララングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09B2X00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM S-E R 届出番号：09B2X00016000018
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 届出番号：09B2X00016000013
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 2 届出番号：09B2X00016000014
販売名：ラングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011
販売名：ラングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR 2-E 届出番号：09B2X00016000020
販売名：ストレートハンドピース S G O 2-E 届出番号：09B2X00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT 2-E 届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のこぎり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100
一般的名称：のこぎり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX000160000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインストルメント 認証番号：09B2X00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オッセオ 100+ 届出番号：09B2X00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030
販売名：ポリバーi7 届出番号：09B2X00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア Ⅱ 届出番号：09B2X00016000010
販売名：プレスト Ⅱ 届出番号：09B2X00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。

Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。

Bien AirとUNIFLEXは、Bien-Air Holding SAの登録商標です。

W&Hは、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbHの登録商標です。

iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。