

CLINICAL MICROMOTORS

NLX nano



手が求める新しいカタチ。それは、エアータービンと変わらぬ持ちやすさ

従来のマイクロモーターは、エアータービンに比べてトルクが高い一方、重量が重く、またコントラアングルをつけると長くなりバランスが悪いという大きなデメリットがありました。

NLX nanoマイクロモーターは、そのデメリットを排除し、従来の高トルクを維持したまま、軽量、コンパクト、高いバランス性を実現しました。光源にLEDを採用し、32,000 LUXの明るい白色光で治療部位を鮮明に照射します。

長さ25%、重さ20%ダウン

従来のマイクロモーターの高いトルクを損なうことなく、小型化、軽量化に成功。



高いバランス性

マイクロモーターが従来に比べ短く、軽くなったため、コントラアングルを付けた状態でも、高いバランス性を実現。また、エアータービンとほぼ同等の長さになり、同じような感覚でシームレスな治療が可能になります。




広範囲の治療が可能に

NLX nanoマイクロモーターは、術者の方々が既にお持ちのEタイプ*のライト付またはライト無しのコントラアングルをそのまま接続して使用可能です。様々なコントラアングルの組み合わせにより、100から200,000min⁻¹までの広範囲な回転域を実現し、幅広い治療に対応できます。

	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
16 : 1		100-2,500min ⁻¹					
1 : 1				2,000-40,000min ⁻¹			
1 : 5						10,000-200,000min ⁻¹	

(min⁻¹)

*ISO 3964 準拠

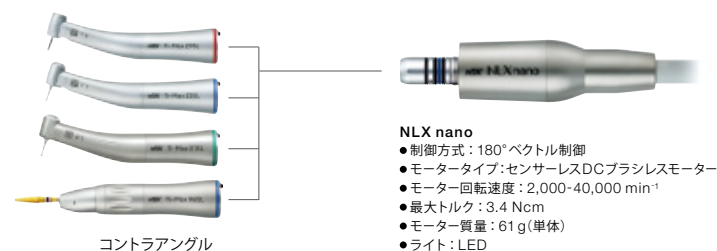

コントラアングル

- NLX nano**
- 制御方式：180°ベクトル制御
 - モータータイプ：センサーレスDCブラシレスモーター
 - モーター回転速度：2,000-40,000 min⁻¹
 - 最大トルク：3.4 Ncm
 - モーター質量：61 g(単体)
 - ライト：LED

NLX nano



製品名	製品番号	標準価格
NLX nano 標準セット	Y1001320	¥185,000

セット内容

- 制御ユニット ●ライト付モーター ●モーターコード ●ACアダプター ●ACコード

仕様

[制御ユニット]

- 定格入力: AC 28 V 50/60 Hz ●寸法: W 127 × D 149 × H 54 mm ●重量: 517 g

[モーター]

- 回転速度: 2,000-40,000 min⁻¹ ●最大トルク: 3.4 Ncm



製品名	製品番号	標準価格
NLX nano	E1044051	¥110,000

- NLX nano用ライト付モーター(コード無し)
- 135℃までの温度でオートクレーブ可能



製品名	製品番号	標準価格
NLX CD	E1044061	¥28,000

- NLX nano用コード(2.2 m)



製品名	製品番号	標準価格
NLAC(100V)	U497001	¥16,000

- NLX nano用ACアダプター

Air Motor



治療用モーター

Ti-Max X205L



- 最高回転速度：23,000 min⁻¹ ±10%
- チタン製ボディー & DURACOAT
- ライト付ISO標準4ホール
- 逆止弁付
- 内部注水

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X205L	M1013	¥120,000

S-Max M205



- 最高回転速度：22,000 min⁻¹ ±10%
- ステンレス製ボディー
- ミッドウエスト4ホール
- 逆止弁付
- 内部注水

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	M205	M1007	¥95,000

薬事情報一覧

■エアータービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース NRS2 承認番号：22200BZX00204000
販売名：NSK プロファイマー AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根研磨用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZX00762000
販売名：ストレートハンドピース EX-6 認証番号：219ALBZX000022000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケアー用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケアー 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロファイマー neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：電動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034
販売名：クリーニングパウダー 届出番号：09B2X00016000010
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09B2X00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフイー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスII 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサボート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D5G2 0 L 届出番号：09B2X000160000124
販売名：ティーマックス X-D5G2 0 届出番号：09B2X000160000123
販売名：ティーマックス X-SG2 0 L 届出番号：09B2X00016000042
販売名：エスマックス SG2 0 届出番号：09B2X00016000041
販売名：ティーマックス X-SG 届出番号：09B2X000160000137
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-SG4 5 届出番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-ER 届出番号：09B2X00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM5-ER 届出番号：09B2X00016000018
販売名：ストレートハンドピース SGS-E 届出番号：09B2X00016000013
販売名：ストレートハンドピース SGS-E2 届出番号：09B2X00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E2 届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E 届出番号：09B2X00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO2-E 届出番号：09B2X00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT2-E 届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X000160000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X000160000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X000160000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09B2X00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オセオオ 100+ 届出番号：09B2X000160000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高温蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030
販売名：ポリバー-i7 届出番号：09B2X00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09B2X00016000038
販売名：プレスト アクア II 届出番号：09B2X00016000010
販売名：プレスト II 届出番号：09B2X00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

カスタムエアークーラーは、(株)モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultiFlexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Blen AirとUNI-FLEX、Blen Air Holding SAの登録商標です。
W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。
iPad®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間：平日9:00～17:00

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。

仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。
(標準価格は2021年9月1日現在のものです)

