



ORAL HYGIENE

Varios Combi Pro



Two Maintenance Systems in One

超音波スケーラーとパウダーデバイス。
幅広いプロフェッショナルケアに対応する2つの高機能ツールを、この1台に凝縮。



ナカニシ独自の構造で、2つの機能をより安全に、スマートに使い分ける。

2つのシステムを1台のスペースで

超音波スケーラーとパウダーデバイス。プロフェッショナルケアに必要な2つのシステムを1台に凝縮しました。よりスムーズな治療を実現するとともに、治療現場の省スペース化にも貢献します。

プロフィー・ペリオのパウダー機能を自動認識

各チャンバーを取り付けるだけで、プロフィー・ペリオの機能を自動認識。スピーディーなクリーニングから、インプラント周囲や歯周ポケット内への優しく効率の良いバイオフィルム除去まで、煩わしい機能選択操作が不要で、誤作動の防止にも配慮しました。

ユニットとチャンバーが完全に独立

チャンバーからハンドピースまでが一体になりユニットからは独立構造になっているので、万一、粉詰まりが発生しても、ユニットを分解するなどの面倒な修理が不要になり、個々のパーツ交換が可能です。ユニット内はエアと水回路だけのスマートな発想の設計です。

2種類のパウダーが混入しない安心な設計

プロフィー・ペリオ用でそれぞれ専用のチャンバー、ハンドピース、ハンドピースホースを開発。パウダー流路を丸ごと交換するため、2種類のパウダーが混ざることがなく安心して使用できます。


充実の機能をフットコントロールで

超音波、パウダーの2つの機能の使い分けが行えるマルチフットコントロールにより、手動による操作の切り替えのないスムーズな施術を可能にします。


操作性へのきめ細かな配慮

超音波スケーラーとパウダーの機能を自動認識

超音波モードとパウダーモードは、ハンドピースを持ち替えるだけで自動で切り替わります。パウダーモードのプロフィー・ペリオ機能は、チャンバー交換時に自動認識します。

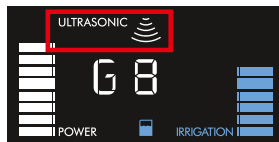


超音波モード使用

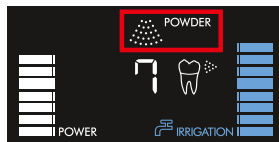


パウダーモード使用

前回使用した機能設定を記憶

機能毎に、前回使用したそれぞれのモードやボトル水量、パワーの設定を記憶することが可能です。

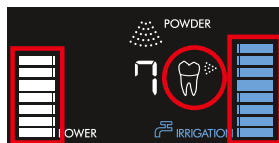

プロフィーモード使用

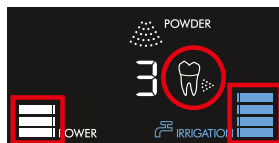

ペリオモード使用

優れたメンテナンス性

オートクリーニング機能で清掃を手軽に

オートクリーニングキーを押すだけで超音波機能、パウダー機能、それぞれのハンドピース、ハンドピースホース内を簡単に清掃することが可能。クリーニング中には残時間が表示されます。

(クリーニング時間は各約45秒)



超音波機能

ユニット内の注水経路を自動的に洗浄します。消毒液使用後などに行うことで、経路の腐食などのリスクを軽減します。

パウダー機能

ホース、ハンドピース内に残った残留水をほぼゼロまで排出し、粉詰まりリスクを軽減。患者さま毎のお手入れが可能です。

マルチに使えるフットコントロール

足の踏み方の感覚を追求して開発されたマルチフットコントロール。モード切替、パワー設定やリンス機能の選択など、フットコントロールによってユニット操作のハンズフリー化を実現。フットコントロールを活用することで、施術を中断することなく必要な操作を行うことができます。



ULTRASONIC

正確で安全な操作を重視したスリムハンドピース

口腔内での広い作業域、術野の広さを実現した先端がφ9.5 mmのスリムハンドピース。細い先端部はアクセスが困難な最後臼歯遠心などへのアプローチをスムーズにし、口腔内で自由な動きが取れるので、チップを正しい角度で当てるのが容易に。グリップ感が高く、軽量ハンドピースは手指への負担を大きく軽減します。また、自然光に近いLED光と広い照射範囲により、常に明るい視野と高い認識性を実現しました。



臨床の可能性を広げる多彩なチップラインナップ

豊富なチップラインナップは、幅広い臨床に対応しています。症例や形状の違い以外にも断面や材質、表面の加工などにも違いがあり、症例や付着物の状態に合ったチップの選択で、歯面や軟組織に負担をかけにくい効率的な治療を実現します。

iPiezo engine®

様々な状態の歯石に対応する「iPiezo engine®」搭載

「もっと上手にスケーリングをしたい」「もっと簡単に歯石を取りたい」。

歯科衛生士の方々のそんな声を真剣に取り入れ、ナカニシが独自に開発した超音波エンジン「iPiezo engine®」をバリオスシリーズに搭載しました。まるで自分の手の延長のように、チップに術者の意図が的確に伝わり、歯面の状況に合わせた思い通りの操作が可能。スピーディーな施術で、患者さまにとっても優しいスケーリングを実現します。

フィードバック機能


硬い歯石や柔らかい歯石などの歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。硬く取れにくい歯石に対しても、パワーが落ちることなく安定したスケーリングを行えます。

オートチューニング機能

チップ先端で設定パワーが発揮される様に、発振周波数を自動的に調整。チップの暴れやバタつきを最小限に抑えるため、吸い付くようにチップが歯面を捉え、歯面状況が手指に的確に伝わります。

安定したスケーリングが可能

従来の超音波スケーラーは、柔らかい歯石から硬い歯石にぶつかるとパワーが落ちてしまうことがありました。バリオスシリーズは「iPiezo engine®」の働きにより、自動的にチップ先端にかかる負荷を感知し、パワーを落とすことなく安定したスケーリングが行えます。

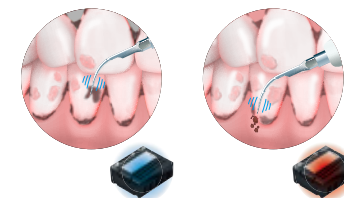


POWDER PROPHY-SYSTEM



安定したパウダー噴射

パワフルで安定したパウダー噴射を実現するために、タービン開発において培った流体解析技術に応用し、チャンバー内での効率的なパウダーの流れを実現。パウダー・水・エアーのスムーズな噴射を可能にしました。チェアタイムを短縮しながら、効率良く成果を得られます。

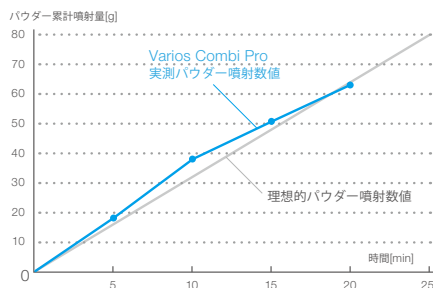

操作性の高いハンドピースとノズル

アクセス性に優れ、口腔内で操作しやすいスリムなハンドピース。長く小さいノズルは、臼歯部などへのアプローチを容易にします。頬側では必要以上にハンドピースで口角を広げることなく、舌側では広い術野の確保が術者と患者さまの負担を軽減します。



スピーディーなクリーニング効果

フラッシュパールまたはクリーニングパウダーの組み合わせで使用するにより、スピーディーなクリーニング効果を実現。より滑らかな歯面に仕上がります。フラッシュパールはカルシウムベースで球体状の細かい粒子で構成されており、パウダーが歯面上を転がるように動いて、強固に付着したステインやプラークを効率良く取り除きます。



クリーニング前



クリーニング後

POWDER PERIO-SYSTEM




歯間部、歯肉辺縁のプラーク・バイオフィルムの除去

- 今まで操作しにくかった部分(縁上と歯肉辺縁)のバイオフィルム・プラーク、軽微なステインの除去が可能。
- 複雑な歯列、歯間部、小窩裂溝などラバーカップでは届きにくい部分のプラーク、バイオフィルムの除去が可能。
- 広範囲に付着した軽微なステイン除去。
- インプラント周囲、補綴修復物の清掃。
- 縁上用の歯面清掃器より、優しい噴射圧の設計。
- 非接触なので、歯牙/歯肉などへの負担が少ない。
- 補綴修復材料への負担も少ない。




使用前

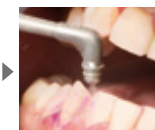

使用中

スピーディーで効果的な除去能力


1/4顆を約50.5秒で、歯面のバイオフィルムが除去できます。

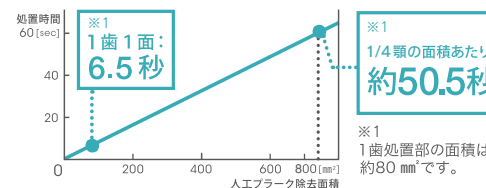

(自社調べ)

共焦点レーザー顕微鏡※2用いて200倍にて処理面を観察 ※2 CLSM Lasertec社

あらゆる補綴修復物の歯面に、ほとんどダメージを与えることなく処置することができます。

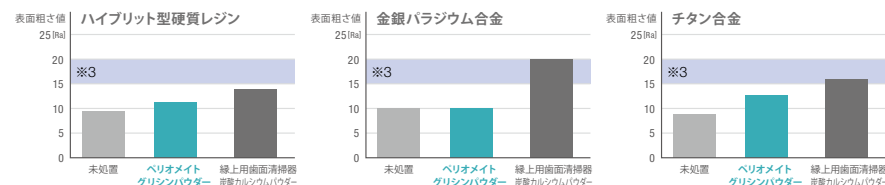

※3 レギュラーダイヤモンドポイントの表面粗さ平均値

資料提供: 東京医科歯科大学歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻

POWDER PERIO-SYSTEM



歯周ポケット内バイオフィルムの除去

- 1ブロック約60秒で、歯周ポケット内バイオフィルムを除去。
- チップと付着物が非接触で広範囲に除去できるため、チップが届きにくい箇所も清掃が可能。
- パウダーの流れを解析により最適化。
- 目視できない箇所でも、広範囲のパウダー噴射により、バイオフィルムやプラークなどの取り残しが他のメンテナンス器具に比べ大幅に減少。
- 柔らかなパウダー噴射で、歯周ポケット内を優しくトリートメント。
- アクセス性と歯肉への安全性を追求した、柔軟性のあるプラスチックノズルを採用。



使用前




使用中

噴射力を自動で調節

チャンパー（ペリオ用）を接続すると、噴射力がプロフィーモードのパワーから自動的に20%低下。歯肉縁下での使用に配慮した設計です。（噴射部位や患者さまの状態を見てパウダー流量と水量を調整してください。口腔内の状況に合わせた低いパワーから徐々に設定を上げていくことをお勧めいたします。）

歯への優しさと除去能力を両立



1ブロック約60秒で、歯周ポケット内のバイオフィルムが除去できます。

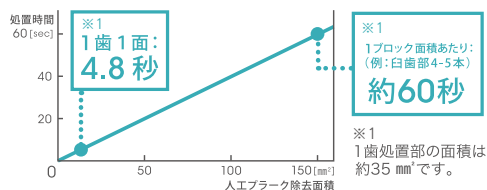

（自社調べ）

パウダーの流れを解析により最適化

タービン開発技術において培った流体解析により、歯周ポケット内でのパウダーの流れを考慮した噴射が可能。一方向だけでなく全方向への均一な流れにより、軟組織へのダメージを最小限に抑え、歯肉縁下のプラーク・バイオフィルムを効率的に除去することができます。パウダー（エア）・水は歯周組織へのダメージに配慮し、別噴射となっています。

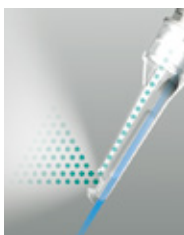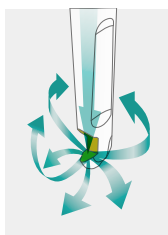

アクセス性と歯肉への安全性を追求した、柔軟性のあるプラスチックノズル

細くて薄く、柔軟性のあるノズルチップは、歯牙の豊隆に沿ってしなやかに曲がるので、引き締まった歯肉や隣在歯の根面への挿入も容易で、患者さまの苦痛を軽減します。視認性の良い半透明の材質により、歯肉縁下への挿入も快適。ノズルチップは患者さまごとに交換するディスポーザブルタイプ。滅菌済みのため、開封直後に使用可能です。



Perio Mate Powder

- 主成分のグリシンはタンパク質の構成物質であるアミノ酸
- 歯肉縁下に使用しても滞留しない高い水溶性
- 象牙質よりも柔らかいモース硬度
（モース硬度：グリシン～2 / 象牙質2～2.5）
- パウダー平均粒子形：25 μm

製品名	製品番号	標準価格
ペリオマイトパウダー	Y900938	¥8,300

- 160g × 2本



Perio Mate Nozzle Tip

- 患者さまごとに交換できるディスポーザブルタイプ
- 滅菌済みのため開封直後に使用可能

製品名	製品番号	標準価格
ペリオマイトノズルチップ	Y1002741	¥6,000

- 40本入



Varios Combi Pro



Varios Combi Pro 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
パリオスコンビ Pro ベーシックセット	Y1003769	¥470,000

セット内容

- コントロールユニット
- ACコード
- チャンバー(プロフィー用)
- ハンドピースホース(プロフィー用)
- パウダーハンドピース(プロフィー用)
- VA2 Lux ハンドピースコード
- VA2 Lux ハンドピース
- VCPボトル400 mL
- 水フィルター
- フットコントロール(ハンガー付)
- スケーリング用チップ3本
- 滅菌ケース
- フラッシュバール(15 g × 5袋)

他付属品

製品名	製品番号	標準価格
パリオスコンビ Pro ペリオセット	Y1003770	¥490,000

セット内容

- コントロールユニット
- ACコード
- チャンバー(ペリオ用)
- ハンドピースホース(ペリオ用)
- パウダーハンドピース(ペリオ用)
- VA2 Lux ハンドピースコード
- VA2 Lux ハンドピース
- VCPボトル400 mL
- 水フィルター
- フットコントロール(ハンガー付)
- スケーリング用チップ3本
- 滅菌ケース
- ペリオメイトパウダー(160 g × 1本)
- ペリオメイトノズルチップ(40本)
- ペリオメイトノズルリムーバー

他付属品

仕様

- ユニット寸法: W 225 × D 290 × H 162 mm(注水ボトル・チャンバー含む)
- ユニット重量: 2.6 kg(注水ボトル・各チャンバー除く)
- 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz
- 駆動周波数: 28-32 kHz
- 最大出力: 11 W

オプション



製品名	製品番号	標準価格
パリオスコンビ Pro プロフィークット	Y1003771	¥150,000

キット内容

- チャンバー(プロフィー用)
- ハンドピースホース(プロフィー用)
- パウダーハンドピース(プロフィー用)
- フラッシュバール(15 g × 5袋)

他付属品



製品名	製品番号	標準価格
パリオスコンビ Pro ペリオキット	Y1003042	¥170,000

キット内容

- チャンバー(ペリオ用)
- ハンドピースホース(ペリオ用)
- パウダーハンドピース(ペリオ用)
- ペリオメイトパウダー(160 g × 1本)
- ペリオメイトノズルチップ(40本)
- ペリオメイトノズルリムーバー

他付属品



iCART-L

製品名	製品番号	標準価格
iCart-L	Z299	¥50,000

- 外寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
- 重量: 10 kg

パリオスコンビ Pro
プロモーション動画 ▶パリオスコンビ Pro
超音波ハンドピース
メンテナンス動画 ▶パリオスコンビ Pro
パウダーハンドピース
メンテナンス動画 ▶

Varios 970

スマートなデザインに、使える高機能を凝縮

操作性の高い大型LEDディスプレイ

パワー表示が10段階の数字とバーグラフで確認できる大型LEDディスプレイ。ボトル水量も10段階のバーグラフで確認することができます。また、直感的に操作できるアイコンキーで押し間違いなどを防止。



大容量ボトル

片手で簡単に着脱できる2つのボトルで、治療目的に合わせて消毒液や温水が使用できます。ボトルは容量が大きな400 mLで、十分に注水時間を確保できケアタイムの短縮にも繋がります。




オートクリーニングモード

注水回路を自動洗浄するオートクリーニングモードを搭載。消毒液使用後、ボトルに水を入れオートクリーニングキーを押すだけで、注水回路を自動的に洗浄します。



注水ポンプの交換が簡単

注水ポンプはユーザー自身で簡単に交換可能なので、ポンプの寿命やチューブ劣化によるトラブル時もその場で対応できます。

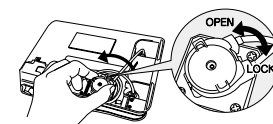

バリオス 970 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA970 Lux	Y1001451	¥286,000
—	VA970	Y1001452	¥239,000

セット内容 ●コントロールユニット ●ハンドピース ●ハンドピースコード ●フットコントロール(FC-70)
●スケーリング用チップ3本 ●水フィルターセット ●水供給用コネクター
●チップ交換レンチ(3個・CR-10) ●VAボトル(2本・400 mL) ●滅菌ケース 他付属品

仕 様 ●ユニット寸法: W 160 × D 270 × H 190 mm (ボトル含む) ●ユニット重量: 2.1 kg ●ボトル容量: 400 mL (× 2本)
●電源: AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数: 28-32 kHz ●最大出力: 11 W (Gモード時)

Varios 370



卓越した高性能を、よりシンプルに、コンパクトに

ウルトラコンパクトボディ

軽量でコンパクトなボディは、場所を選ばずチェアユニットに設置できることが魅力です。コンパクトボディの中にiPiezoエンジンを搭載し、パワフルかつ繊細なスケーリングが行えます。



シンプルな操作パネル

ON / OFF機能が付いた電源 / 出力調節つまみは、回すだけでパワー0から10まで自由に設定ができます。大きな水量調節つまみは繊細な水量調整を可能にします。角度を付けたパネルは施術ポジションからの高い視認性を実現しました。



設置例

取付け位置のバリエーションが広がる各種取付けホルダーを用意しています（一部オプション）。



アーム固定
コントロールユニットホルダー +
バリオス350 / 370用スタンド



テーブルマウント テーブルトップ
コントロールユニットホルダー



テーブル固定
コントロールユニットホルダー +
バリオス350 / 370用ステー



バリオス 370 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA370 Lux	Y1001429	¥188,000
—	VA370	Y1001430	¥141,000


セット内容 ●コントロールユニット(ハンドピースコード付) ●バリオス370/370Lux ACアダプター ●ハンドピース
●コントロールユニットホルダー ●スケーリング用チップ2本 ●ハンドピースホルダー
●フットコントロール(FC-71) ●水フィルターセット ●水供給用コネクター ●チップ交換レンチ(CR-10) 他付属品

仕 様 ●ユニット寸法: W 80 × D 115 × H 32 mm (つまみとコード除く) ●ユニット重量: 430 g (ハンドピース除く)
●電源: AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数: 28-32 kHz ●最大出力: 11 W (Gモード時)

Ultrasonic Scaler Tips

チップの数だけ超音波スケーラーの臨床が広がります

バリオスのチップは一つ一つの症例ごとに、きめ細やかな対応ができるように複数のチップをご用意しております。ナカニシならではの豊富なラインナップで超音波治療の可能性を広げます。

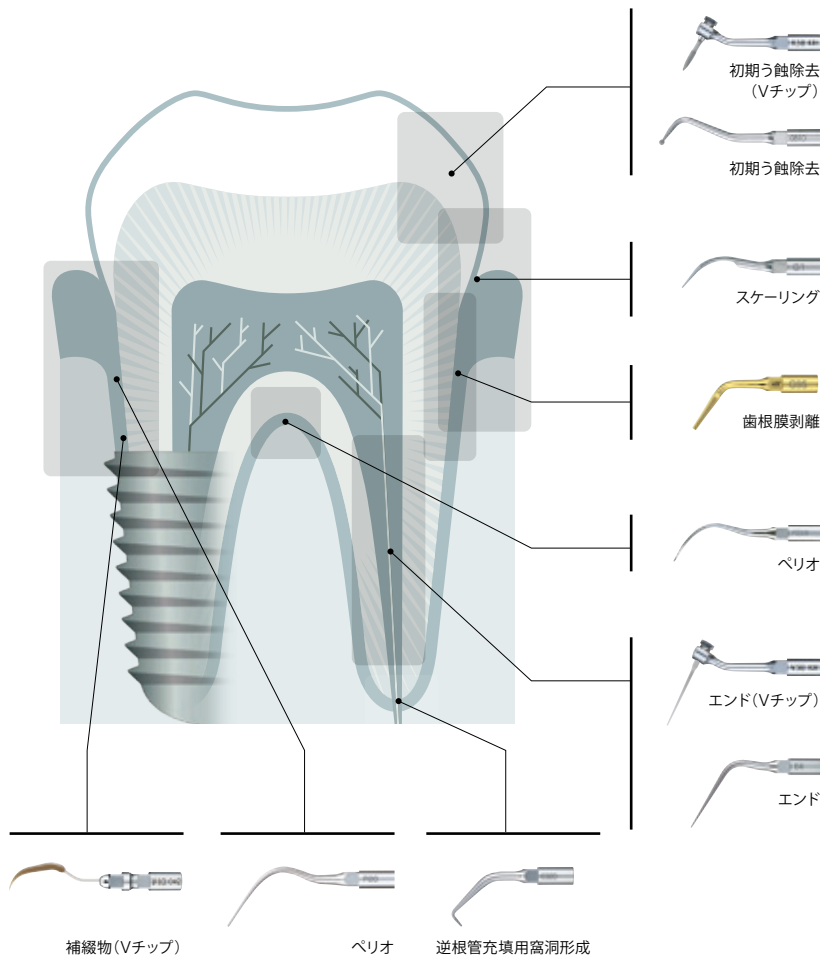

スケーリング / ペリオチップの断面・先端の種類と特長

バリオスチップは外観の違い以外にも断面形状や材質、表面の加工などに違いがあります。症例や附着物の状態に合ったチップを選択することで、歯面や軟組織にも効果的にご使用いただけます。

断面形状・チップ	材質・チップ先端	除石効果	歯質への優しさ	用途・内容
 G1, G5, G6, G8, G9	金属 鏡面加工	◎	△	歯肉縁上・縁下の除石
 P1, P20, P21R / L, P25R / L	金属 鏡面加工	△	◎	歯肉縁上・縁下のステイン除去 バイオフィルム除去
 P1D, P2D, P3D	金属 ダイヤモンド電着加工	○	○	歯肉縁下(隣接面・分岐部)の除石
 P10, P11R / L, P26R / L	金属 シャープエッジ	◎	△	歯肉縁下の除石
 P40, P41	金属 先端側方2点注水	×	◎	イリゲーション
 V-P10, V-P11R / L, V-P12, V-P26R / L	プラスチック	△	◎	補綴修復物

スケーリング

超音波スケーラーチップ




製品名	製品番号	標準価格
G1	Z217101	¥8,000
G2	Z217102	¥8,000
G3	Z217103	¥8,000
G4	Z217104	¥8,000
G5	Z217105	¥8,000
G6	Z217106	¥9,000
G8	Z217108	¥8,000
G9	Z217109	¥9,000
G11	Z217411	¥8,000
G12	Z217412	¥8,000
G13	Z217413	¥8,000

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

☒ 熱水洗浄可能 135℃ オートクレーブ可能

ペリオ

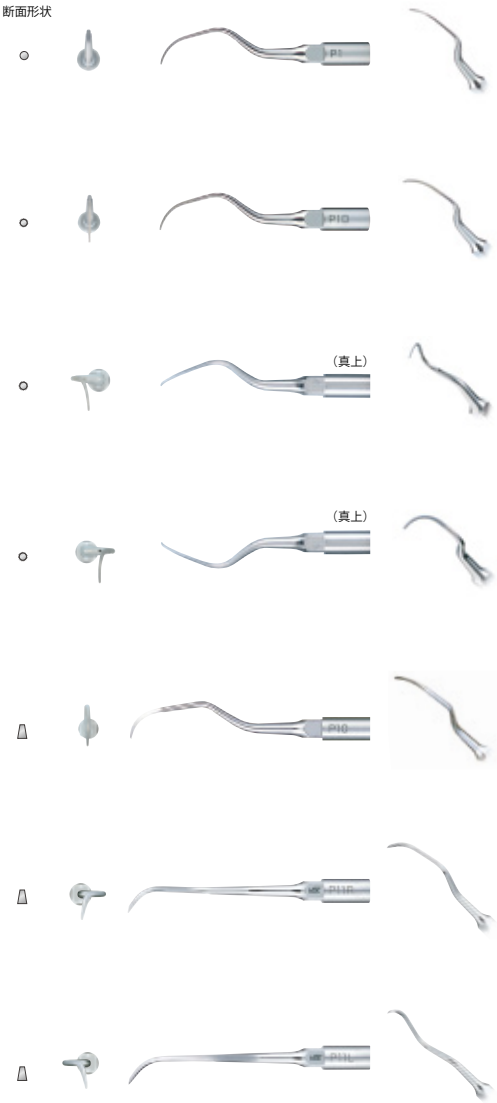

製品名	製品番号	標準価格
P1	Z217404	¥8,500
P1D	Z217405	¥8,500
P2D	Z217402	¥8,500
P3D	Z217403	¥8,500
P10	Z217410	¥8,500
P11R	Z217408	¥8,500
P11L	Z217409	¥8,500

- ダイヤモンドコーティング
- ダイヤモンドコーティング ●右湾曲タイプ
- ダイヤモンドコーティング ●左湾曲タイプ
- シャープエッジ
- シャープエッジ ●右湾曲タイプ
- シャープエッジ ●左湾曲タイプ

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

☒ 熱水洗浄可能 135℃ オートクレーブ可能

ペリオ

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
P20	Z217420	¥8,500



製品名	製品番号	標準価格
P21R	Z217422	¥8,500

●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P21L	Z217421	¥8,500

●左湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P25R	Z217424	¥8,500

●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P25L	Z217425	¥8,500

●左湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P26R	Z217426	¥8,500

●シャープエッジ ●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P26L	Z217427	¥8,500

●シャープエッジ ●左湾曲タイプ

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)



熱水洗浄可能



オートクレープ可能

ペリオ(イリゲーション)

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
P40	Z217550	¥6,300

●チップφ0.6 mm



製品名	製品番号	標準価格
P41	Z217555	¥6,300

●チップφ0.8 mm

スケーリングチップ プラス1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。



製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG1パック	Y900501	¥40,000

●G1：6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG4パック	Y900502	¥40,000

●G4：6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG6パック	Y900503	¥45,000

●G6：6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG8パック	Y1002163	¥40,000

●G8：6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG9パック	Y1002164	¥45,000

●G9：6本入

ペリオチップ プラス1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。



製品名	製品番号	標準価格
ペリオP10パック	Y900504	¥42,500

●P10：6本入

製品名	製品番号	標準価格
ペリオP20パック	Y900505	¥42,500

●P20：6本入

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)



熱水洗浄可能



オートクレープ可能

補綴物(Vチップ)

プラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができ、補綴物のメインテナンスに最適です。

Perio-Control



製品名	製品番号	標準価格
V10	Z217041	¥5,300

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- プラスチックチップ別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P10	Y900184	¥2,800

- 3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P12	Y1002167	¥3,000

- 3本入 ●V10ホルダー別売



最後臼歯遠心部



前歯部の薄い歯肉

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

補綴物(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
V-P11R	Y1002165	¥3,000

- 右湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11L	Y1002166	¥3,000

- 左湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P26R	Y1002168	¥3,000

- 右湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P26L	Y1002169	¥3,000

- 左湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



マージン部や歯冠隅角



インプラント体から
補綴への移行部

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

エンド



製品名	製品番号	標準価格
E4	Z217428	¥7,200

- 根管洗浄・異物除去用

製品名	製品番号	標準価格
E4D	Z217528	¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- 根管洗浄・異物除去用

製品名	製品番号	標準価格
E5	Z217305	¥7,200

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用
(側方加圧充填用)

製品名	製品番号	標準価格
E6	Z217306	¥7,200

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用
(側方加圧充填用)

製品名	製品番号	標準価格
E7	Z217307	¥7,200


- ドライ仕様
- 充填材・異物除去用

製品名	製品番号	標準価格
E7D	Z217317	¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- フレアー形成用

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

エンド

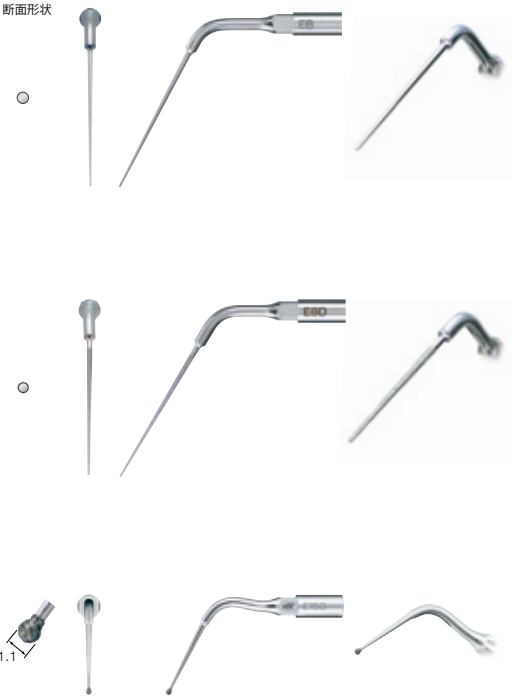

製品名	製品番号	標準価格
E8	Z217308	¥7,200

- ドライ仕様
- 充填材・異物除去用

製品名	製品番号	標準価格
E8D	Z217318	¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- フレアー形成用

製品名	製品番号	標準価格
E15D	Z217319	¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口の探索、明示用

※E5, E6, E7, E7D, E8, E8Dのチップは付属のEチップ用レンチをご使用ください。

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

エンド



製品名	製品番号	標準価格
E11	Z217031	¥9,500

- Uファイル用(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用
- 前歯部用
- Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売



製品名	製品番号	標準価格
E12	Z217032	¥9,500

- Uファイル用(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用
- 臼歯部用
- Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33 mm / #15	Y900062	¥1,500

- ISO15
- 6本入

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33 mm / #20	Y900063	¥1,500

- ISO20
- 6本入

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33 mm / #25	Y900064	¥1,500

- ISO25
- 6本入

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33 mm / #30	Y900065	¥1,500

- ISO30
- 6本入

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33 mm / #35	Y900066	¥1,500

- ISO35
- 6本入

使用時の取り付け長

	#15	#20	#25	#30	#35
E11	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
E12	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm



逆根管充填用窩洞形成

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
E30RD	Z217212	¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 臼歯部用(右曲がり)



製品名	製品番号	標準価格
E30LD	Z217213	¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 臼歯部用(左曲がり)



製品名	製品番号	標準価格
E31D	Z217210	¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 前歯部
- 臼歯部用(70°)



製品名	製品番号	標準価格
E32D	Z217211	¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 前歯部用(90°)

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

歯根膜剥離チップ(切開・切除)

チップ先端および両側面が鋭いエッジになっているので、チップを無理なく挿入することができます。
このチップを使用して歯根膜を剥離することで歯根表面と歯槽骨の間にスペースができ、スムーズに抜歯が行えます。

- ヘーベルなどと異なり、抜歯窩の窩壁の損傷を抑えます。
- 手用器具では挿入しにくいアングルからのアプローチができます。
- スムーズな抜歯ができ、患者さまの負担を軽減します。
- 薄いチップ先端形状と両側面の鋭いエッジ形状で高いアクセス性を実現しました。

残根抜歯(上顎左2番抜歯)

残根周囲歯槽骨を過剰に切削することなく歯槽骨形態を保持しながら抜歯することが可能です。



半埋伏歯(下顎左8番抜歯)

抜歯前の前処置として使用することで可動性が得やすくなるため埋伏歯の処置にも有効です。



※ヘーベルのように力を入れすぎないように注意してください。
症例写真提供：西川歯科クリニック(川口市)



製品名	製品番号	標準価格
G95	Z217705	¥15,000

- チタンコーティング ●厚さ：0.7 mm
- 3方向がシャープな両刃

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

初期う蝕除去



製品名	製品番号	標準価格
G61D	Z217601	¥12,000

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
G62D	Z217602	¥12,000

- ダイヤモンドコーティング

V-TIP System



Vチップシステムによるう蝕象牙質の除去は、罹患歯質のみを選択的に研削するので、健全歯質を最大限に残すことが可能です。歯頸部う蝕の処置も出血を抑えて研削でき、修復処置を容易にします。また、超音波による振動切削なので、タービンなどの回転器具と比べてより安全に使用できます。

初期う蝕除去用

P108-109

●初期う蝕除去用




●形態修正・研磨用




エンド用

P107

●根管洗浄用

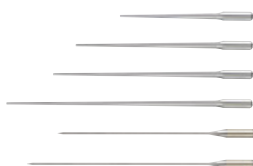

●根管拡大・形成用

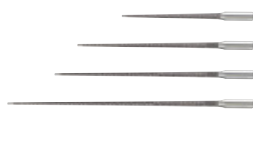

V30
120°アングル

補綴物用

P98-99

●メンテナンス用

Perio-Control



V10
ストレート

エンド(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥11,500

- Vチップホルダー
- Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売

- 根管洗浄用 17 mm ●3本入

- 根管洗浄用 23 mm ●3本入

- 根管洗浄用 26 mm ●3本入

- 根管洗浄用 32 mm ●3本入

- ニッケルチタン
- 根管洗浄用 26 mm ●3本入

- ニッケルチタン
- 根管洗浄用 30 mm ●3本入

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 17 mm ●3本入

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 23 mm ●3本入

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 26 mm ●3本入

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 32 mm ●3本入



※ステップを作りにくくするため、先端部1 mmの部分にはダイヤモンドコーティングを施していません。

製品名	製品番号	標準価格
V-S50	Y900169	¥4,100

製品名	製品番号	標準価格
V-S51	Y900170	¥4,100

製品名	製品番号	標準価格
V-S52	Y900171	¥4,100

製品名	製品番号	標準価格
V-S53	Y900172	¥4,100

製品名	製品番号	標準価格
V-N50	Y900182	¥3,200

製品名	製品番号	標準価格
V-N51	Y900183	¥3,200

製品名	製品番号	標準価格
V-S50D	Y900173	¥6,000

製品名	製品番号	標準価格
V-S51D	Y900174	¥6,000

製品名	製品番号	標準価格
V-S52D	Y900175	¥6,000

製品名	製品番号	標準価格
V-S53D	Y900176	¥6,000



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

初期う蝕除去(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥11,500

- Vチップホルダー
- Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売



製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入




製品名	製品番号	標準価格
V-G71	Y900119	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入




製品名	製品番号	標準価格
V-G72	Y900120	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

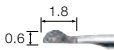

製品名	製品番号	標準価格
V-G75	Y900121	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

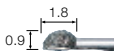

製品名	製品番号	標準価格
V-G76	Y900122	¥3,500


- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

形態修正・研磨(Vチップ)




製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥11,500

- Vチップホルダー
- Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売

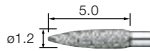


製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- レギュラー
- 3本入

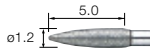

製品名	製品番号	標準価格
V-G78	Y900166	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- ファイン
- 3本入

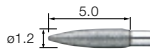

製品名	製品番号	標準価格
V-G79	Y900167	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- スーパーファイン
- 3本入

チップキット



ペリオ		
製品名	製品番号	標準価格
ペリオキット A	Y900144	¥34,000

- セット内容
- P1D, P2D, P3D, P10 : 各1本入
 - チップホルダー付属




ペリオ		
製品名	製品番号	標準価格
ペリオキット B	Y900145	¥25,500

- セット内容
- P20, P25R, P25L : 各1本入
 - チップホルダー付属



補綴物用		
製品名	製品番号	標準価格
ペリオコントロールチップ スターターキット	Y1002606	¥8,500

- セット内容
- V10ホルダー
 - V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L : 各1本入
 - Eチップ用レンチ付属

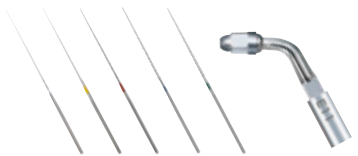

エンド 前歯部用		
製品名	製品番号	標準価格
エンドキット E11	Y900146	¥15,500

- セット内容
- E11(120°)
 - Uファイル33 mm #15, #20, #25, #30, #35 : 各6本入
 - Eチップ用レンチ付属



エンド 臼歯部用		
製品名	製品番号	標準価格
エンドキット E12	Y900147	¥15,500

- セット内容
- E12(95°)
 - Uファイル33 mm #15, #20, #25, #30, #35 : 各6本入
 - Eチップ用レンチ付属



逆根管充填用窩洞形成		
製品名	製品番号	標準価格
レトロキット	Y900149	¥38,000

- セット内容
- E30RD, E30LD, E31D, E32D : 各1本入
 - チップホルダー付属

Prophy-Mate neo



恋スル白歯を創る、プロフィーメイト neo

ツインノズルでパワフルな噴射力を持続

ナカニシ独自のツインノズルにより、パワフルかつなめらかでパウダーロスの少ない安定した噴射を実現。高い噴射持続力とポリッシング能力で、チェアタイムを短縮しながら効率的な成果が得られます。



クリーニング前




クリーニング後



※結果を保証するものではありません。

操作性に優れたノズルチップ

長くて小さいノズルチップは、患者さま・術者の負担を軽減。頬側では必要以上にハンドピースで口唇を広げることなく、舌側では広い術野の確保が可能です。また、ノズルの角度は前歯部に適した60°と臼歯部に適した80°があり、施術箇所に応じて使い分けることで、クリーニング効果を最大限に発揮します。

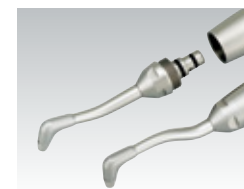

指先で簡単に回せるハンドピース

スリムで、しかもくるくる回せるハンドピースは、使用角度の調整が行いやすく、無理な挿入角度や姿勢をとらずに施術が行えます。



ワンタッチ着脱

カップリングへの接続、ハンドピース接続のいずれもワンタッチで簡単に着脱できます。



Prophy-Mate neo

歯面清掃用ハンドピース



ノズル60°、ノズル80°



対応カップリング	製品名	製品番号	標準価格
NSK カップリング	PMNG-PTL-P	Y135029	¥147,000
モリタαメインチューブ	PMNG-MR-P	Y1001297	¥147,000
ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみ) ご使用いただけます	PMNG-YS-P	Y1001968	¥147,000
オサダファインジョイント	PMNG-FJ-P	Y1001954	¥147,000
KaVo® Multiflex®	PMNG-KV-P	Y135030	¥147,000
Sirona® Quick coupling	PMNG-SR-P	Y135031	¥147,000

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

セット内容

- プロフィーメイト neo ハンドピース(ノズル60°、ノズル80°付) ●パウダーケース
- パウダーケースカバー予備1個 ●フラッシュパール(15g入)×5袋 ●プロアーノズル ●リングレンチ
- 掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイル、掃除用ブラシ ●タービン用オイル

プロフィーメイト neo
メンテナンス動画



ハンドピースは全て熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

FLASH pearl

歯面清掃用パウダー



製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール (100袋入)	Y900693	¥22,700

●15g×100袋

製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール (ボトル4本入)	Y900698	¥18,000

●300g×4本

球体粒子で歯面にやさしい

球体状の細かい粒子で構成されているパウダーが歯面上を転がるように動くことで、ステインやバイオフィルムなどをやさしくスピーディーに取り除きます。




電子顕微鏡によるパウダーポリッシング後の歯面の状況

細かいところまで早く、キレイに

ノズルを歯面に対して平行(10°~60°)に近い角度に保ち、パウダーを歯面に転がすイメージで細かく動かしながら使用します。噴射角度の幅が広く、噴射する向きに制約が少ないためスムーズな作業を実現し、作業効率アップに貢献します。

※歯肉辺縁・歯肉縁下への直接噴射は行わないでください。

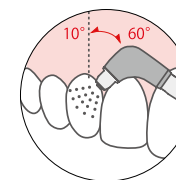

スピーディーで高いクリーニング効果

球体粒子であるフラッシュパールのスピーディーで高いクリーニング効果を発揮するには、歯面を転がすようにポリッシングすることが大切です。ハンドピースがくるくる回せ、パウダーを転がすように噴射するプロフィーメイト neoの使用が最適です。



Perio-Mate



美しく健康な歯のための、パウダーメンテナンス

効率的で、歯にも優しいプロケア。
パウダーメンテナンスを既存設備のまま手軽に導入できます。

- 使用中のチェアーユニットにワンタッチで接続が可能なハンディータイプ。
- 安全性と操作性を追求したノズルチップ。
- 粉詰まりのリスクが少ない、パウダー経路が短くシンプルな構造。
- スピーディーで効果的なバイオフィルム除去。


パウダー流量調整が可能

口腔内の状況に応じてパウダー流量の調整が手元で簡単にできます。調整リングを指先で回すだけでパウダー流量を調整できるため、施術を中断することなくコントロールすることが可能。リングを絞ることによりパウダーを止めることができ、患部の洗浄も行えます。




360°回せるハンドピースとノズルチップ

ハンドピースとノズルチップは指先で容易に回すことが可能。隣在歯や豊隆部などの影響を受けにくく、ノズルチップを歯面に沿わせることができます。ノズルチップを回すことで、効果的な噴射位置を保つことができ、無理な使用角度での挿入・操作が減少します。

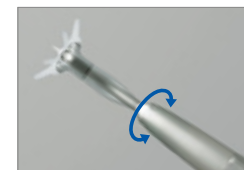

狭い口腔内でも操作が容易なスリムノズル

スリムノズルは狭い口腔内でも広い作業域と、高い視認性を実現。細長いノズル形状は、頬粘膜や口唇の干渉を受けにくくなっています。アクセスが困難な部位へのアプローチもスムーズに行え、ノズルチップの挿入向きを妨げません。また、臼歯部の歯間などハンドピースの挿入が難しい部位でも広い視野を確保することができます。

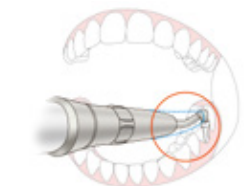

簡単メンテナンス

ご自身の手でノズル・ハンドピース・パウダーケースをそれぞれ簡単に分解可能。粉詰まりへの対応も容易で、使用後のメンテナンスも専用のプロアーノズルを使用することで、簡単に内部に残ったパウダー・水を噴出することができます。ハンドピースを含め（ノズルチップ以外）すべてのパーツが、繰り返し超音波洗浄®・オートクレーブ滅菌が可能です。

※ハンドピースは全て熱水洗浄可能



Perio-Mate

歯面清掃用ハンドピース



対応カップリング	製品名	製品番号	標準価格
NSK カップリング	PER-PTL-P	Y1003009	¥167,000
モリタαメインチューブ	PER-MR-P	Y1002661	¥167,000
ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみ) ご使用いただけます	PER-YS-P	Y1002663	¥167,000
オサダファインジョイント	PER-FJ-P	Y1002664	¥167,000
KaVo® Multiflex®	PER-KV-P	Y1003010	¥167,000
Sirona® Quick coupling	PER-SR-P	Y1003011	¥167,000

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

セット内容

- ペリオメイトハンドピース ●パウダーケース ●パウダーケースカバー予備
- ペリオメイトパウダー(160g入×1本) ●ペリオメイトノズルチップ(40本)
- ペリオメイトノズルチップリムーバー ●プロアーノズル ●リングレンチ
- 掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイバー、掃除用ブラシ ●タービン用オイル

ペリオメイト
メンテナンス動画



ハンドピースは全て熱水洗浄可能




オートクレーブ可能

Perio Mate Powder

パウダー粒子比較

ペリオメイトパウダーは粒子が細かいので歯周ポケット内への使用に適しています。

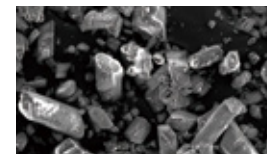


従来のパウダー(重炭酸ナトリウム)
平均粒子径73 μm SEM画像(×150)



Perio Mate Powder(グリシン)
平均粒子径25 μm SEM画像(×150)

クリーニング効果

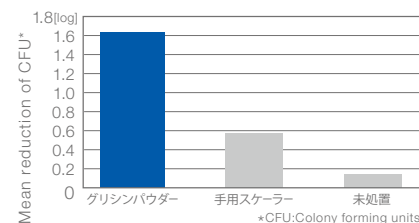

グリシンパウダーを使用した歯面清掃は、手用スケーラーを使用した場合よりも、細菌除去面積が広がります。

Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF. Subgingival plaque removal at interdental sites using a low-abrasive air polishing powder. J Periodontol. 2003 Mar;74(3):307-11.

※口腔内分画法を用いて、グリシンパウダーと手用スケーラーを使用し、プラークを除去した結果。

- 主成分のグリシンはタンパク質の構成物質であるアミノ酸
- 歯肉縁下に使用しても滞留しない高い水溶性
- 象牙質よりも柔らかいモース硬度
(モース硬度: グリシン~2 / 象牙質2~2.5)
- パウダー平均粒子形: 25 μm

製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトパウダー	Y900938	¥8,300

- 160g×2本



Perio Mate Nozzle Tip





- 患者さまごとに交換できる
ディスプレイザブルタイプ
- 滅菌済みのため開封直後に使用可能
- 40本入




製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトノズルチップ	Y1002741	¥6,000

POWDER MAINTENANCE


パウダーメインテナンスの使い分け

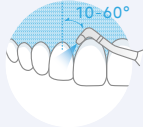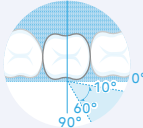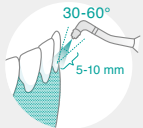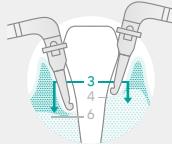歯面清掃用器具		対象	部位	使用ポイント	使用パウダー
PROPHY	 Prophy-Mate neo	天然歯	 縁上	 	 FLASH pearl
	 Varios Combi Pro	天然歯	 縁上 (歯肉辺縁)		 Perio Mate Powder
PERIO	 Perio-Mate	補綴歯	 縁下 (歯周ポケット)	 	

パウダー粒子比較

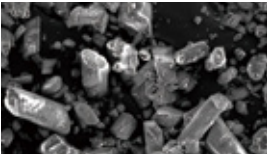

従来のパウダー (重炭酸ナトリウム)
平均粒子径 73 μm SEM画像 (×150)

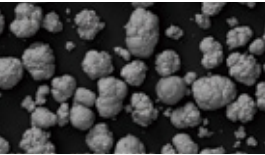

FLASH pearl (炭酸カルシウム)
平均粒子径 54 μm SEM画像 (×150)



Perio Mate Powder (グリシン)
平均粒子径 25 μm SEM画像 (×150)




Ti-Max S970



幅広いケアに対応するエアースケーラーの進化形


安定したパワーをチップに供給

S970シリーズはチップに対する負荷が大きくなってもパワーが落ちにくく※、この安定性が効率的で効果的な施術を可能にします。また、エアースケーラーは電磁波を発しないことから、ペースメーカーなどを使用する機器に制限のある患者さまにも安心して使用できます。

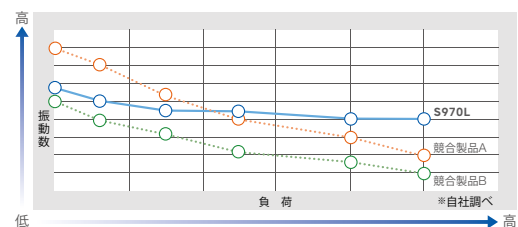

口腔内における操作性と視野の確保を追求

S970シリーズのスリムなボディーは、届きにくい最後臼歯遠心部などへのアクセスを容易にし、施術のストレスを大幅に軽減。さらに効果的な施術を実現することでチェアタイムを短縮し、術者に優しく、患者さまにも優しい治療を実現します。

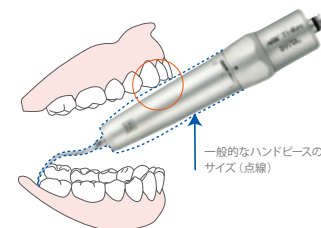

パワーコントロール機能

S970シリーズ独自のパワーコントロール機能は3段階で出力調節ができ、症例に応じた最適なパワー設定が可能です。



用 途	使用チップ	パワーレベル		
		1	2	3
スケーリング	S1, S2, S3	←→	←→	←→
ペリオ	S10, S20, S21R, S21L	←→	←→	←→
インプラント・捕獲物(Vチップ)	S35+Vチップ(V-P10-A, V-P11R-A, V-P11L-A, V-P12-A)	←→	←→	←→
ソニックブラシ	S50+各種ブラシ(S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2)	←→	←→	←→
形成(最終仕上げ)	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←→	←→	←→
初期う蝕除去	S65D, S66D, S67D, S68D	←→	←→	←→
Vチップ(初期う蝕除去)	S75+Vチップ(V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76)	←→	←→	←→
	S75+Vチップ(V-G77, V-G78, V-G79)	←→	←→	←→
Vチップ(エンド)	S75+Vチップ(V-U15~V-U35)	←→	←→	←→

上記パワーレベルは目安です。症例に応じて低いレベルからご使用ください。

Ti-Max S970

エアースクレーパー



チタン製ボディー & DURACOAT
ガラスロッドライト
3段階パワー調整可能




標準付属
チップ3種 (S1, S2, S3)、
チップカバー (L)、
チップ交換レンチ (CR-20)

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970L	T1005	¥173,000
	—	S970	T1020	¥136,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970ML	T1017	¥173,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970YL	T1035	¥173,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970FL	T1036	¥173,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970KL	T1013	¥173,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970SL	T1015	¥173,000

Air Scaler Tips

チップの数だけエアスケーラーの臨床が広がります

症例や付着物の状態に合わせて選べる、
豊富なチップラインナップ。

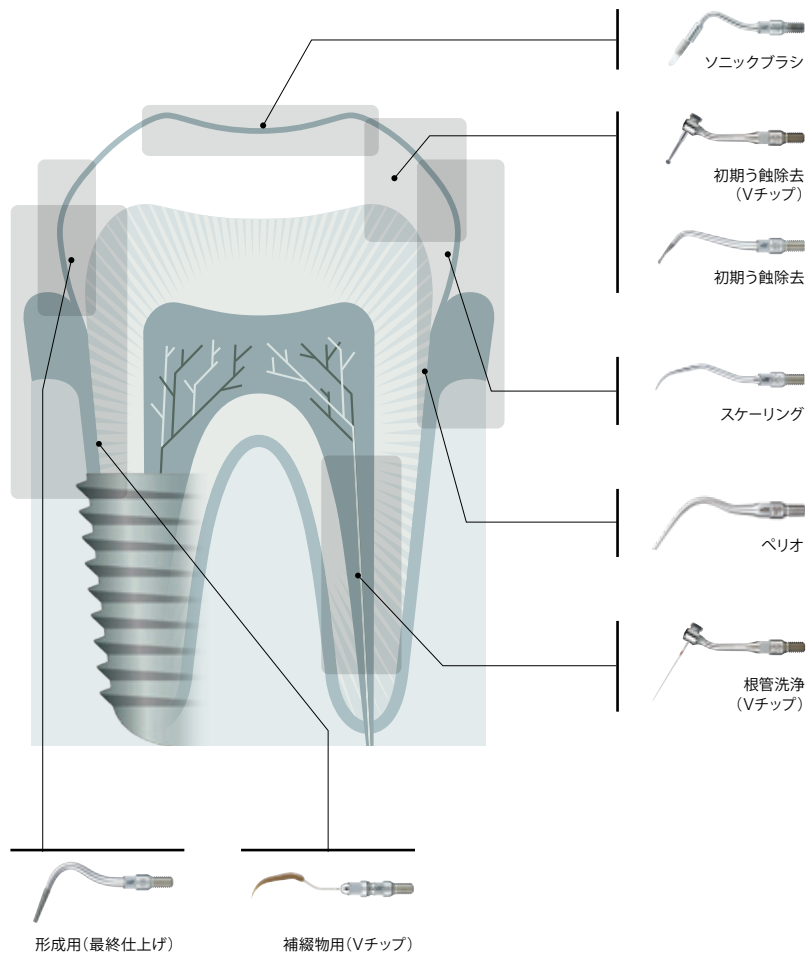

スケーリング

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
S1	Z252411	¥5,500

●ユニバーサルタイプ



製品名	製品番号	標準価格
S2	Z252413	¥5,500

●シックルタイプ



製品名	製品番号	標準価格
S3	Z252412	¥5,500

●ペリオタイプ

- スケーリング / Vチップ (初期う蝕除去) 以外は、S970 / S950 専用チップになります。
- パワー調整機能の付いていないハンドピース (S900 など) ではご使用になれませんのでご注意ください。

断面形状：チップ先端より 1 mm の形状 (原寸の 3 倍)

ソニックブラシ

エアー圧による音波振動を利用してブラシが振動するため、歯質や補綴修復物を傷つけにくく、バイオフィルムなどの除去を行うことができます。また、振動により付着物を除去するため、粘膜の巻き込みリスクを軽減し、ソフトで効率的な清掃が行えます。

	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50</td><td>Z252450</td><td>¥15,900</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50	Z252450	¥15,900	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50-F1</td><td>Y900099</td><td>¥2,700</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50-F1	Y900099	¥2,700
製品名	製品番号	標準価格												
S50	Z252450	¥15,900												
製品名	製品番号	標準価格												
S50-F1	Y900099	¥2,700												
●Eチップ用レンチ付属 ●ブラシ別売 ●ソニックブラシホルダー														
	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50-C1</td><td>Y900097</td><td>¥2,700</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50-C1	Y900097	¥2,700	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50-F1</td><td>Y900099</td><td>¥2,700</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50-F1	Y900099	¥2,700
製品名	製品番号	標準価格												
S50-C1	Y900097	¥2,700												
製品名	製品番号	標準価格												
S50-F1	Y900099	¥2,700												
●コニカルブラシ(小) ●5個入														
	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50-C2</td><td>Y900098</td><td>¥2,700</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50-C2	Y900098	¥2,700	<table><tr><th>製品名</th><th>製品番号</th><th>標準価格</th></tr><tr><td>S50-F2</td><td>Y900100</td><td>¥2,700</td></tr></table>	製品名	製品番号	標準価格	S50-F2	Y900100	¥2,700
製品名	製品番号	標準価格												
S50-C2	Y900098	¥2,700												
製品名	製品番号	標準価格												
S50-F2	Y900100	¥2,700												
●コニカルブラシ(大) ●5個入														

ソニックブラシセット

	製品名	製品番号	標準価格
	S50ソニックブラシセット	Y900096	¥26,700
	セット内容 ●ソニックブラシホルダー ●S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2: 各5個入 ●Eチップ用レンチ付属		

ソニックブラシの使用例 写真提供: 貞光歯科医院(奈良市), モリカゲ歯科医院(さいたま市)



ペリオ



製品名	製品番号	標準価格
S10	Z252420	¥8,400

●ユニバーサルタイプ(スリムライン)

製品名	製品番号	標準価格
S20	Z252441	¥8,400

●ストレートタイプ

製品名	製品番号	標準価格
S21R	Z252442	¥8,400

●右湾曲タイプ

製品名	製品番号	標準価格
S21L	Z252443	¥8,400

●左湾曲タイプ

断面形状: チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

補綴物用(Vチップ)

プラスチック素材を使用しているため、補綴・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができ、補綴物のメンテナンスに最適です。

Perio-Control



製品名	製品番号	標準価格
S35	Z252015	¥5,300

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- プラスチックチップ別売

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
V-P10-A	Y1002746	¥2,800

- 3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P12-A	Y1002749	¥3,000

- 3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11R-A	Y1002747	¥3,000

- 右湾曲 ●3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11L-A	Y1002748	¥3,000

- 左湾曲 ●3本入 ●S35ホルダー別売

エアスケラキット



断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

製品名	製品番号	標準価格
ペリオコントロールチップ エアスケラキット	Y1002754	¥8,000

- セット内容
- S35ホルダー
 - V-P10-A, V-P11R-A, V-P11L-A, V-P12-A：各1本入
 - Eチップ用レンチ付属

初期う蝕除去用

先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。



製品名	製品番号	標準価格
S65D	Z252465	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S66D	Z252466	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S67D	Z252467	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S68D	Z252468	¥13,500

- ダイヤモンドコーティング



S65D

形成用(最終仕上げ)

支台歯形成における概形成、軸面形成を回転切削器具で行った後の、フィニッシュラインの形成用として使用します。回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁など、フィニッシュラインを明確に上げることが可能です。



製品名	製品番号	標準価格
S81D	Z252469	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S82D	Z252462	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S83D	Z252461	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S86D	Z252460	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング

テーパー



トルペードシェイプチップは、ラミネートベニアなど隣接面マージンの最終形成に適しています。削りすぎや象牙質露出の危険性が少なく、隣接面においてより保存的な形成が可能となります。




製品名	製品番号	標準価格
S71D	Z252471	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S72D	Z252472	¥15,000

●ダイヤモンドコーティング

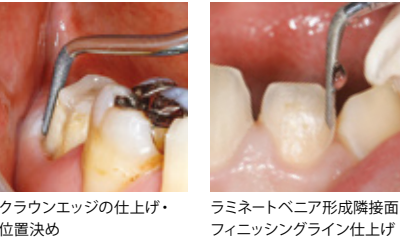

V-TIP System



先端のチップ交換をすることで様々なチップが使用できる、ナカニシ独自のVチップシステム。先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端部分の隅角部の調整に適しています。

初期う蝕除去用

P136-137

●初期う蝕除去用



●形態修正・研磨用



根管洗浄用

P135



補綴物用

P130

●メンテナンス用

Perio-Control



根管洗浄用 (Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥11,500

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U15	Y900177	¥1,700

- Vファイル 23 mm #15 ISO15 ●根管洗浄用 ●6本入

製品名	製品番号	標準価格
V-U20	Y900178	¥1,700

- Vファイル 23 mm #20 ISO20 ●根管洗浄用 ●6本入

製品名	製品番号	標準価格
V-U25	Y900179	¥1,700

- Vファイル 21 mm #25 ISO25 ●根管洗浄用 ●6本入

製品名	製品番号	標準価格
V-U30	Y900180	¥1,700

- Vファイル 22 mm #30 ISO30 ●根管洗浄用 ●6本入

製品名	製品番号	標準価格
V-U35	Y900181	¥1,700

- Vファイル 23 mm #35 ISO35 ●根管洗浄用 ●6本入

製品名	製品番号	標準価格
V-N50	Y900182	¥3,200

- ニッケルチタン ●根管洗浄用 26 mm ●3本入

製品名	製品番号	標準価格
V-N51	Y900183	¥3,200

- ニッケルチタン ●根管洗浄用 30 mm ●3本入

初期う蝕除去(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥11,500

- Vチップホルダー
- Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売

ø0.97



製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

ø1.4



製品名	製品番号	標準価格
V-G71	Y900119	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

ø1.8



製品名	製品番号	標準価格
V-G72	Y900120	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

ø0.6



製品名	製品番号	標準価格
V-G75	Y900121	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

ø0.9



製品名	製品番号	標準価格
V-G76	Y900122	¥3,500

- ダイヤモンドコーティング
- 3本入

形態修正・研磨(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥11,500

- Vチップホルダー
- Eチップ用レンチ付属
- 先端チップ別売

ø1.2



製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- レギュラー
- 3本入

ø1.2



製品名	製品番号	標準価格
V-G78	Y900166	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- ファイン
- 3本入

ø1.2



製品名	製品番号	標準価格
V-G79	Y900167	¥4,100

- ダイヤモンドコーティング
- スーパーファイン
- 3本入

iProphy

コードレスで、
歯面研磨をもっと自由に、
スムーズに




軽く持ちやすい

人間工学に基づいて設計・開発されたエルゴノミックデザイン。軽く持ちやすく、バランスに優れたハンドピースは、比較的時間のかかる歯面研磨でも、手にかかる負担を軽減します。

超ミニヘッドで見やすい

細くて長い超ミニヘッドは、口腔内での広い視野を確保。よりスムーズで正確な治療が可能になります。

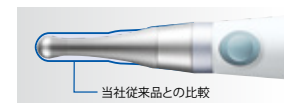

パワーコントロールがラクラク

パワー調整が手元ででき、フットでの微妙なパワーコントロールが不要。通常のコントラアングルでは難しい低速回転の維持も楽に行えます。また、すべての回転域で安定したパワーをキープします。

ヘッドラインナップ



- プロフィー用
- スクリュー式



- プロフィー用
- ラッチ式
- コントラバー用 (φ2.35)



- 上下運動ヘッド
- エパチップ用

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	iFX57	C1102	¥24,500
ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	NAC-F4R	Y110020	¥26,000
ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EVA-F	Y110016	¥23,000

iProphy 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iProphy 標準セット	Y1002819	¥93,000

セット内容

- iProphy モータハンドピース
- iFX57ヘッド
- iProphy スタンド
- ACアダプター

iProphy サブセット(ヘッド無し)

製品名	製品番号	標準価格
iProphy サブセット	Y1003438	¥68,500

セット内容

- iProphy モータハンドピース
- iProphy スタンド
- ACアダプター



薬事情報一覧

■エアータービン

販売名：ティーマックス Z T 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス M T 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス p i c o 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X 4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09BZX00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス Z C 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z 4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス X C 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス X S 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース F Xシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース F X 6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース E Xシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース N R S 2 承認番号：22200BZX00204000
販売名：NSK プロフィー A R 承認番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根研磨用ハンドピース E V A 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ V M 承認番号：20800BZX00762000
販売名：ストレートハンドピース E X - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ M P 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ M P A S 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：i s o E-ラテックス 届出番号：09BZX00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X 2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M 2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S 9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケーラ用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09BZX00016000034
販売名：クリーニングパウダー 届出番号：09BZX00016000001
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09BZX00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09BZX00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフィー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト T C 2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサポート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G 5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000124
販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 届出番号：09BZX00016000123
販売名：ティーマックス X-S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000042
販売名：エスマックス S G 2 0 届出番号：09BZX00016000041
販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09BZX00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G 4 5 届出番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro 2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09BZX00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM-S-E R 届出番号：09BZX00016000018
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 届出番号：09BZX00016000013
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 2 届出番号：09BZX00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09BZX00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09BZX00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR 2-E 届出番号：09BZX00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO 2-E 届出番号：09BZX00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT 2-E 届出番号：09BZX00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：i S D 9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09BZX00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オセオ 100+ 届出番号：09BZX00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09BZX00016000030
販売名：ポリバー-i 7 届出番号：09BZX00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09BZX00016000038
販売名：プレスト アクア Ⅱ 届出番号：09BZX00016000010
販売名：プレスト Ⅱ 届出番号：09BZX00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

カスタムエアアは、(株)モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultitexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bian AirとUNI-FIXは、Bian Air Holding SAの登録商標です。
W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。
iPAD®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間:平日9:00～17:00

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。

仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。
(標準価格は2021年9月1日現在のものです)

