




ENDODONTICS



ENDO-MATE TC2

広がる視野

ミニヘッドとスリムなネックのコントラアングルを採用することで、広い視野を確保できます。

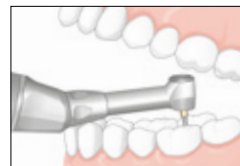


安全性に配慮した機能

- 負荷が変化しても回転速度を一定に保つフィードバック回路を採用。
- 無負荷の状態が10分継続くと、誤作動防止のためのオートパワーオフ機能が作動。


プログラム機能による治療効率の向上

プログラム機能は、選択された回転速度、トルク、ギア比、オートリバースモードの組み合わせを5パターンまでメモリーすることが可能です。

▼プログラム設定パネル

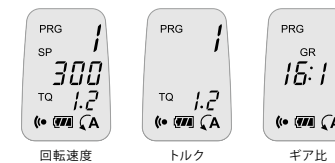

ファイル破折のリスクを大幅に軽減する充実のアラーム機能

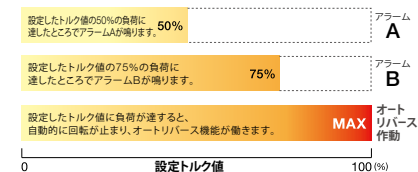

エンドメイト TC2 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 標準セット	Y1001444	¥128,000

セット内容

- MP-F16R ヘッド ●エンドメイト TC2 モーター
- TC2用充電器

エンドメイト TC2 サブセット(ヘッド無し)

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 サブセット	Y1001445	¥94,500

セット内容

- エンドメイト TC2 モーター ●TC2用充電器



仕様 ●最高回転速度：9,000 min⁻¹ ●充電時間：1.5時間 ●連続使用時間：1.2時間

※電池の充電容量によって、連続使用時間が変化することがあります。

ENDO-MATE TC2 用 ヘッド & モーター

エンドメイト TC2用 ヘッド

- プッシュボタン式チャック ●ミニヘッド ●360°回転 ●Ni-Tiファイル用(φ2.35)

エンドメイト治療



減速	製品名	製品番号	標準価格
20:1	MP-F20R	Y110044	¥33,500
16:1	MP-F16R	Y110096	¥33,500



減速	製品名	製品番号	標準価格
20:1	MPAS-F20R	Y110046	¥43,500
16:1	MPAS-F16R	Y110098	¥43,500

- 根管長測定器接続用(シャンク長12 mm)

組み合わせにより広範囲な回転域とトルクをカバー

ギア比	トルク(Ncm)	回転速度(min ⁻¹)
4:1	0.1-0.7	500-2,250
10:1	0.2-2.2	200-900
16:1	0.3-3.0	140-550
20:1	0.4-4.0	100-450

エンドメイト TC2 モーター



製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 モーター	E346	¥68,500

- 最高回転速度：9,000 min⁻¹ ●トルクコントロール機能
- オートリバース機能

iPexII




SmartLogicエンジン搭載の高精度根管長測定器

SmartLogicエンジンはナカニシ独自の「交互発振方式」と「面解析」により、根管内の様々な影響を最大限に排除したクリアな信号解析を行い、高精度な根尖孔検出を実現します。

- 2つの異なる周波数の交互発振方式を測定に採用し、信号解析に影響を与えるノイズの発生を抑え、フィルター回路を通す必要の無い精度の高い波形の抽出を実現。
- 検出された周波数を面解析する独自の方式を採用。様々な状況が想定される根管内に対して、安定した測定値解析を実現し、ファイル挿入との確かな連動感をもたらします。

見やすい3色カラーLCD

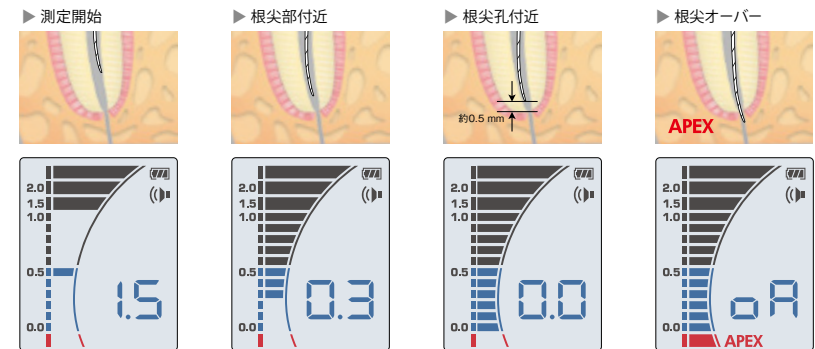

ナカニシのエンドモーターとiPex IIとの組み合わせにより、正確で早い根管治療をサポートします。



iPex II 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iPex II 標準セット	Y1002210	¥98,000

セット内容 ●コントロールユニット ●iPex II プローブ(1.8 m) ●iPex II ファイルクリップ(3本) ●リップフック(3本)
●単4電池(3本) ●iPex II テスター

仕様 ●寸法: W 60 × D 60 × H 86 mm ●ユニット重量: 76 g(単4電池含まず)
●連続使用時間: 60 時間(アルカリ電池使用時) ※連続使用時間は設定条件により異なります。

薬事情報一覧

■エアタービン

販売名：ティーマックス Z T 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス M T 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス p i c o 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X 4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000

一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09BZX00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントラアングル

販売名：ティーマックス Z C 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z 4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス X C 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス X S 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントラアングルハンドピース F Xシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース F X 6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントラアングルハンドピース E Xシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：コントラアングルハンドピース N R S 2 承認番号：22200BZX00204000
販売名：NSK プロフィー A R 承認番号：222ALBZX00027000
販売名：歯根研磨用ハンドピース E V A 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ V M 承認番号：20800BZX00762000
販売名：ストレートハンドピース E X - 6 認証番号：219ALBZX00002000

一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ M P 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ M P A S 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：i s o E-ラテックス 届出番号：09BZX00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X 2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M 2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：バリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：バリオス 9 7 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：バリオス 3 7 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S 9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシセット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：NSK エアスケーラ用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケーラ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロフィーメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09BZX00016000034
販売名：クリーニングパウダー 届出番号：09BZX00016000001
販売名：ペリオメイト パウダー 届出番号：09BZX00016000139
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09BZX00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイプロフィー 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト T C 2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ビバエース 認証番号：227ABBZX00112000
販売名：ビバサポート 2 認証番号：224ALBZX00017000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ビバメイト G 5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ビバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：バリオス 1 7 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000124
販売名：ティーマックス X-D S G 2 0 届出番号：09BZX00016000123
販売名：ティーマックス X-S G 2 0 L 届出番号：09BZX00016000042
販売名：エスマックス S G 2 0 届出番号：09BZX00016000041
販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09BZX00016000137

一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G 4 5 届出番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro 2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントラアングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09BZX00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM-S-E R 届出番号：09BZX00016000018
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 届出番号：09BZX00016000013
販売名：ストレートハンドピース S G S-E 2 届出番号：09BZX00016000014
販売名：アングルハンドピース SGA-E 届出番号：09BZX00016000011
販売名：アングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09BZX00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR 2-E 届出番号：09BZX00016000020
販売名：オシレートハンドピース SGO 2-E 届出番号：09BZX00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT 2-E 届出番号：09BZX00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09BZX00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：i S D 9 0 0 スクリュードライバー 認証番号：222ALBZX00016000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：バリオサージ 3 認証番号：225ABBZX00144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインスツルメント 認証番号：09BZX00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オセオ 100+ 届出番号：09BZX00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ 2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装品用高圧蒸気滅菌器
管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09BZX00016000030
販売名：ポリバー-i 7 届出番号：09BZX00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクア LUX 届出番号：09BZX00016000038
販売名：プレスト アクア Ⅱ 届出番号：09BZX00016000010
販売名：プレスト Ⅱ 届出番号：09BZX00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

カスタムエアア、(株)モリタ東京製作所の登録商標です。
KaVoとMultitexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bian AirとUNI-FIXは、Bian Air Holding SAの登録商標です。
W&Hは、W&H Deutschland GmbHの登録商標です。
iPAD®は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。

株式会社ナカニシ www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間:平日9:00～17:00

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。

仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。
(標準価格は2021年9月1日現在のものです)

