

The image features a series of horizontal bands in a vibrant blue color, separated by white bands. Within the blue bands, the dark silhouettes of various dental instruments are visible, including what appears to be a handpiece, a control knob, and a long, thin tool. The overall aesthetic is clean, modern, and professional.

MOBILE DENTISTRY

VIVA ace

デンタルワークに、フットワークを。

もっと快適で高度な、訪問歯科診療のために

加速する高齢化社会、訪問診療のニーズはますます高まっています。また高齢者の残存歯数も増加し、訪問先においても幅広い治療が求められています。ピバエースは、多目的に使用できる高性能マイクロモーターや超音波スケーラーなど、診療室と変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。軽量で女性でも持ち運びやすく、訪問先での設置も簡単。これまでになかった高度な機動性で、より快適な訪問歯科診療をサポートします。



軽量 & コンパクトボディ



診療室と変わらない高機能システム



セッティング・撤収も簡単スピーディー



軽量 & コンパクトボディ

取り回しやすい軽量8.6 kg。車への積み降ろしや階段の昇り降り、狭い場所もラクに通れるコンパクトサイズ。訪問先から訪問先への移動も容易です。基本性能を落とさず、一つ一つの部品を徹底してコンパクト・軽量化し、このサイズと軽さを実現しました。

オールインワンパッケージ

マイクロモーター、超音波スケーラー、3wayシリンジ、パキューム機能をコンパクトボディに集約。また、全ての付属品を収納する事ができます。

高さ
28.4 cm

奥行き
29.8 cm

幅 46.2 cm





診療室と変わらない高機能システム

視認性に優れた大型液晶パネルと、各インストルメントの性能により、高い効率性と機能性を実現。診療室と変わらない治療環境を提供します。

歯科治療機器をコンパクトなボディに凝縮



※写真にはオプション製品が含まれています。

フットコントロールシステム

ドクター1人体制の診療に
Syncモードにより、モーター・スケーラーとバキュームのON / OFFがひとつのフットコントロールで操作できます。

ドクター+歯科衛生士 2人体制の診療に
モーター・スケーラーのON / OFFと、バキュームのON / OFFを2つのフットコントロールで操作。2つを組み合わせることで、ドクターはモーター・スケーラーの操作だけに専念できます。



モーター・スケーラー・バキューム



モーター・スケーラー

バキューム

高機能マイクロモーター エンド治療にも幅広く対応



NLX plus

高トルク、スムーズな回転、高い静寂性

	回転速度 (min ⁻¹)	トルク値 (Ncm)
一般切削モード	1,000~40,000	4.0
エンドモード	100~5,000	0.3~3.0

多目的超音波スケーラー 多彩なチップラインナップ



Varios2 Lux

ナカニシ独自のiPiezoエンジン搭載
硬い歯石や柔らかい歯石など、歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。取れにくい歯石にも安定したスケリングが可能です。

3way シリンジ



軽量、シンプル操作の3way シリンジ。シリンジノズルが簡単に着脱可能。

バキューム



手元で一時的な吸引停止が可能なバルブレバー付き。

オプション



製品名	製品番号	標準価格
isoE-LUX	Z1265	¥36,500




製品名	製品番号	標準価格
吸引歯ブラシキット	U1144089	¥30,000

●チューブ付(10キット)



VIVA ace
プロモーション
動画

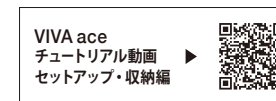

VIVA ace
チュートリアル動画
セットアップ・収納編



VIVA ace
チュートリアル動画
機能編



VIVA ace
チュートリアル動画
メンテナンス編




セッティング・撤収も簡単スピーディー


訪問診療先での設置と撤収が、短時間で簡単に行えるので効率的です。

ホルダーバーとホルダーアームは、4段階の調整が可能です。

OPEN

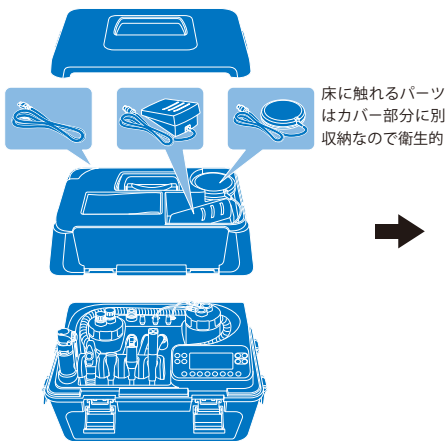

SET UP

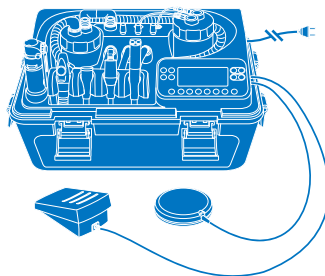

COMPLETE




収納も簡単

ハンドピースを外して、スッキリ収納



お手入れもラクにできる

MAX
51.6 cm

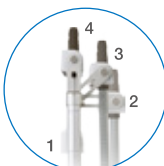

高さ・角度4段階調整

立位、座位など、
様々なポジション
に合わせて調整可能

VIVA ace



製品名	製品番号	標準価格
ビバエース コンプリートセット	Y1003571	¥1,058,000

セット内容

- ビバエース ベーシックセット ●ビバエース モーターキット
- ビバエース スケーラーキット

仕様(コントロールユニット)

- 寸法: W 462 × D 298 × H 284 mm ●総重量: 8.6 kg[®]
 - 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz ●電源入力: 130 VA
- ※ハンドピース類を外した重量



製品名	製品番号	標準価格
ビバエース ベーシックセット	Y1002903	¥745,000

セット内容

- コントロールユニット ●ACコード ●トップケース
- フットコントロール(FC-76S, FC-70S)
- V-ace/バキュームホースセット(ホース/バルブ付)
- V-ace/バキュームボトルセット ●バキュームノズル(10本)
- V-ace注水ボトルセット ●V-ace3wayシリンジセット
- V-aceショルダーベルト

製品名	製品番号	標準価格
ビバエース モーターキット	E1040002	¥156,500

セット内容

- モーター NLX plus ●モーターコード
- モーターキャップ ●プロテクションプラグ

製品名	製品番号	標準価格
ビバエース スケーラーキット	E351006	¥156,500

セット内容

- バリオス2ハンドピース(ライト付) ●スケーラーコード
- スケーリングチップ2本 ●チップ交換レンチ ●チップホルダー

VIVA Q

軽量・静音で安定した吸引量の
ポータブルバキューム



「VIVAシリーズ」より、訪問歯科診療用バキュームVIVA Qが誕生

“VIVA Q”は、訪問歯科診療における様々な施術、メンテナンス～治療まで、幅広く使用可能です。実際に訪問歯科診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングして作られたこの“VIVA Q”は静音・軽量で女性の方でも持ち運びが容易です。

ご自身にあった使用環境での必要なオプション品の組み合わせが可能です。

軽量・静音で安定した吸引量の
ポータブルバキューム

- ・スムーズに移動が可能な重量
- ・静かなバキューム音
- ・安定した吸引量

重量
2.9 kg



3段階に調節可能なホルダ（オプション）

オプションのホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことが可能です。ホルダは3段階の高さに調節可能です。



ナカニシ独自のバキュームボトル構造

独自の構造により、泡を吸引してしまっても[※]、コントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

[※]発泡剤含有の歯磨剤は使用しないでください。歯磨剤が泡立つとコントロールユニット内部に入り込み、故障の原因となります。

水検知センサーを搭載

万一、コントロールユニット内部へ液体が浸入した際、吸引モーターを停止させる水検知センサーを搭載。独自のバキュームボトル構造と、水検知センサーにより2段階で故障の原因となるコントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

VIVA Q



ビバQ 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
ビバQ 100V	Y1004133	¥172,000

セット内容

- コントロールユニット ●バキュームボトルセット
- バキュームホースセット ●バキュームノズル(10個)
- 洗浄アダプター ●電源コード

仕様 (コントロールユニット)

- 寸法: W 191 × D 328 × H 244 mm
- 総重量: 2.9 kg (コントロールユニット、ボトルセット、ホースセット)
- 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz ●電源入力: 120 VA
- 吸引圧力: 6.0-10.0 kPa ●空気流量: 120-150 L/min

オプション


ホルダセット

ホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことができます。ホルダは3段階の高さに調節可能です。



製品名	製品番号	標準価格
ホルダセット	U1173050	¥8,700

- ホルダ、ボール(2本)、ボール台座

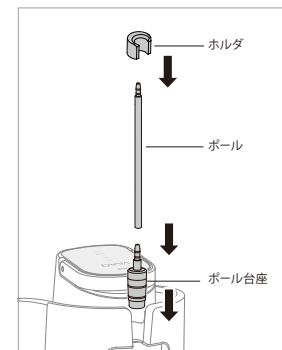

オプション

移動に便利なキャリングバッグ

ビバQ標準セットと訪問診療に必要なグッズなどを簡単に収納できます。訪問診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングし、収納にこだわった機能的な仕様を実現しました。



ポケット部などに
収納可能



製品名	製品番号	標準価格
ビバQ キャリングバッグ	U1173100	¥29,000

- 寸法: W 280 × D 395 × H 265 mm



(イメージ)

ある歯科衛生士の訪問診療時の準備セットの一例

※ナカニシではこのセットの製造・販売は行っていません。

フットコントロール

バキューム機能の作動 / 停止は、フットコントロールでも行えます。手元の操作に集中でき、施術の幅が広がります。未使用時は、キャリングバッグの内側サイドに収納でき、衛生的です。



製品名	製品番号	標準価格
FC-70S	Z1008004	¥7,000

吸引歯ブラシ

コンパクトなヘッドと長くて安定感のあるハンドルは、高いアクセス性と操作性を実現します。



製品名	製品番号	標準価格
吸引歯ブラシキット	U1144089	¥30,000

- チューブ付(10キット)

VIVAMATE G5

訪問歯科診療用 携帯型マイクロモーターユニット



デンチャー調整から本格治療まで携帯型LEDマイクロモーター

訪問歯科診療用に開発された小型マイクロモーターは148 g (モーターコード含む)の軽量ボディにLEDライトを内蔵。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。



バッテリー駆動と通常電源駆動が可能なコンパクトなコントロールユニット

電源の全くない場所でも、バッテリー駆動でどこでも使用できます。充電不足の時は、電源が近くで取れば、そのまま通常電源により使用できるので、安心して訪問先へ持って行けます。サイズは、手のひらサイズ (W 72 × D 180 × H 36 mm) のコントロールユニットで、しかも重量はわずか370 g。簡単に持ち運べます。

フットコントロール(オプション)

踏み込む深さに応じて回転数のコントロールが可能なフットコントロールは、本体のコントロールパネルの操作に気を取られず、治療に集中できる環境を提供します。



キャリングケース

「ビバメイト G5」本体とその付属品がきれいに収まる専用キャリングケースが付属。



ビバメイト G5 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
VIVAMATE G5	Y1001344	¥157,000

セット内容

●コントロールユニット ●ハンドピーススタンド ●ライト付モーター(モーターコード付) ●ACアダプター ●キャリングケース

仕様

コントロールユニット ●寸法: W 72 × D 180 × H 36 mm ●重量: 370 g ●バッテリー充電時間: 約2時間
●バッテリー連続駆動時間: 約1時間(定格負荷) ※バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。
マイクロモーター ●寸法: φ22 × L 68.6 mm ●重量: 148 g (モーターコード含む) ●回転速度: 3,000-30,000 min⁻¹
●トルク: 3 Ncm (30,000 min⁻¹回転時)