



GENERAL CATALOG 2024

GENERAL CATALOG
2024

Create it 



AIR TURBINES

Ti-Max Z890, Z990 / S-Max M micro, M800, M900
S-Max pico / Ti-Max X450

P.18-45

CONTRA-ANGLES

Ti-Max Z Series / Ti-Max X Series
FX Series / EX Series / isoE-LUX

P.46-68

CLINICAL MICROMOTORS

NLX nano / Ti-Max X205L
S-Max M205

P.70-77

ORAL HYGIENE

Varios Combi Pro / Varios 970 / Varios 370 / Ultrasonic Scaler Tips
Prophy-Mate neo / Perio-Mate / Powder Maintenance
Ti-Max S970 / Air Scaler Tips / iProphy

P.78-145

ENDODONTICS

ENDO-MATE TC2 / iPexII

P.146-153

MOBILE DENTISTRY

VIVA ace / VIVA Q / VIVAMATE G5

P.154-167

ORAL SURGERY

Surgic Pro2 / Implant Handpieces
Micro Surgery Handpieces / Micro Saw Handpieces / iSD900
VarioSurg 3 / Ultrasonic Bone Surgery Tips / Osseo 100+

P.168-213

AUTOCLAVE

iClave mini2

P.214-220

MAINTENANCE

iCare / PANA SPRAY Plus / EZ SPRAY

P.222-235

DENTAL LABORATORY

ULTIMATE XL Series / VOLVERE i7
PRESTO Series

P.236-247

SPARE PARTS

P.248-273

Create it

美味しいものを食べることや笑うこと。

人生の幸せと直結し、

健康寿命の延伸にも欠かせない歯科医療。

ナカニシは最良の歯科医療実現に寄与することをミッションに、

あらゆるステークホルダーの皆様に向けて

さまざまな価値をCreateします。

革新的な技術、高精度・高品質、ストレスフリーな製品、

自信や安心、お客様との信頼関係、患者様の笑顔、明るい未来・・・

ナカニシはいつも人に寄り添い、

どこまでも歯の健康と向き合っていきます。

Create_

innovation

precision

quality

professionalism

confidence

partnership

hospitality

sustainability

smile

tomorrow

Made In KANUMA

最新鋭の研究開発設備と

有能なエンジニアリングチームを擁するR&Dセンター〔RD1〕。

歯科用ハンドピースの超精密加工において、

世界最大規模を誇る最先端工場〔A1〕。

現在、ナカニシのすべての製品は鹿沼の地で開発・生産され、

全世界に向けて出荷されます。

これも、最高の製品をつくるためには、

開発と生産は一体であるべきという想いから。

$RD1 \times A1 \times KANUMA = \infty$

ナカニシは、鹿沼から無限大のイノベーションを産み出します。



Global Network



全世界の歯科医療従事者に徹底して寄り添い、
最高のサービスを提供していきたい。
そうした想いを突き詰めた結果が、
16の海外販売子会社と135カ国をカバーする代理店網です。
お客様の声を何よりも大切に、
どんなご要望・ご提案にもできるかぎりお応えできるように
ナカニシの営業パーソンが日々サポートしていきます。

- 1: NAKANISHI INC.
- 2: NSK Europe GmbH
- 3: NSK France S.A.S.
- 4: NSK United Kingdom Ltd.
- 5: NSK Dental Spain S.A.
- 6: NSK Dental Italy S.r.l
- 7: NSK Dental Nordic AB
- 8: NSK America Corp.
- 9: NSK America Latina Ltda.
- 10: NSK Oceania Pty. Ltd.
- 11: NSK Oceania Ltd.
- 12: NSK Shanghai Co.,Ltd.
- 13: NSK Dental Korea Co.,Ltd.
- 14: NSK Nakanishi Asia Pte. Ltd.
- 15: NSK Middle East FZCO
- 16: NSK RUS LLC

Pioneer of Infection Control

= DualDefence™




歯科用インスツルメンツのメーカーとして、
歯科医療従事者の皆さまと患者さまの安全を守る責任がある。
そう考えるナカニシでは、30年以上にわたって
感染予防対策となるソリューションを探求し続けてきました。
この事実と実績こそ、ナカニシが感染予防対策における
業界のリーディングブランドであることを証明しています。

CLEAN HEAD SYSTEM



ナカニシ独自の
ラビリンス機構が、
サックバックを防止。

ANTI-RETRACTION VALVE

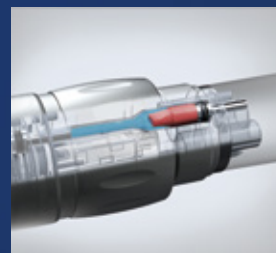

逆止弁が水回路への
汚水の浸入を防止。

DualDefence
動画 ▶



The Environment

環境に配慮した製品、環境に貢献できる製品を
Createしていくことも重要な使命だと考えているナカニシ。
未来の地球環境を守るために環境負荷を低減し、
「低炭素社会」「高度循環社会」「自然共生社会」の構築を目指します。
四季折々に表情を変える、鹿沼の豊かな景観とともに。

切削油のリサイクル率 97%

再生可能エネルギー※ 100%

廃棄物の再資源化率 99.1%


※本社・工場の全電力



カタログ表記の説明


グラスロッドライト

ライトガイドに透過効率の高いグラスロッドを採用。32,000 LUXの照度で術野を鮮明に照らし、ストレスの無い治療を実現します。また、繰り返しのオートクレーブなど、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。

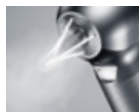

セラミックボールベアリング

セラミックボールはスチールボールより約25%硬く、また重量は約1/2のため磨耗が少なく、カートリッジの長寿命化を実現します。

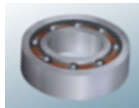

クリーンヘッドシステム

ナカニシ独自のラビリンス機構により、口腔内の血液、異物などの浸入を防ぐサックバック防止機構です。



クイックストップ

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能。口腔内での巻き込み防止などの安全性を向上します。



プッシュボタン式チャック

ナカニシ独自のバーロック機構で、どんな切削でもバーを確実にグリップし、しかもワンタッチ着脱が可能です。



4点注水スプレー

ナカニシの4点注水スプレーは、バー全体に効率よくスプレー可能で高い冷却効果を実現します。



逆止弁(感染予防機構)

ナカニシ社製カップリングには、逆止弁が内蔵されています。ユニットのブルバック機構(水のボタ落ち防止)により、水と共に口腔内の汚物が吸引されるのを予防します。「クリーンヘッドシステム」と同様に感染予防対策として、重要な役割をします。



DURAGRIP®

滑りにくく傷が付きにくい独自の表面処理により、耐久性がアップし快適なグリップ感を確保します。



DURACOAT®

ボディにナカニシ独自の表面硬化処理を施すことにより、傷が付きにくく、耐摩耗性が向上します。



 : 安心の2年保証  : 80 Ncm高トルク対応

 : 熱水洗浄可能  : オートクレーブ可能

Couplings

NSK バテラスカップリング



ライト付ISO
標準4ホール

- ステンレス製ボディ
- チタンコーティング
- 逆止弁付



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	PTL-CL-LED	P1001600	¥42,000

- ステンレス製ボディ
- チタンコーティング
- 逆止弁付
- 水量調節機構付



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	PTL-CL-LED III	P1001601	¥46,200

KaVo® カップリング



ライト付ISO
標準4ホール

- ステンレス製ボディ
- チタンコーティング
- 逆止弁付
- 水量調節機構付



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	KCL-LED	P1005600	¥55,000

Sirona® カップリング



ライト付ISO
標準4ホール

- ステンレス製ボディ
- チタンコーティング
- 逆止弁付
- 水量調節機構付



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	SCL-LED	P1009600	¥55,000

NSK マツハカップリング



ミッドウエスト
4ホール

- ステンレス製ボディ
- 逆止弁付



ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	FM-CL-M4	P434051	¥21,000

カップリング対応表

▼カップリング

▼対応ハンドピース

	Z890 / Z990	M1micro	M1800 / M900	Pico	X450	S970	Prophy-Mate neo	Perio-Mate
NSK カップリング	○	○	○	○	○	○	○	○
モリタαメインチューブ	○	○	○	○	○	○	○	○
ヨシダクイックジョイント	○	○	○	○	○	○	○	○
オサダファイソジョイント	○	○	○	○	—	○	○	○
KaVo® Multiflex®	○	○	○	○	○	○	○	○
Sirona® Quick coupling	○	○	○	○	○	○	○	○

AIR TURBINES



Ti-Max Z890/Z990 S-Max M micro S-Max M800/M900 S-Max pico Ti-Max X450



クラス	Premium	Advanced	Advanced	Special	Special
ヘッド角度	100°	100°	90°	90°	45°
素材	チタン	ステンレス	ステンレス	ステンレス	チタン
DYNAMIC POWER SYSTEM	●				
3X-Power System		●	●		
DURAPOWЕР CHUCK	●				
DURAGRIP	●				
DURACOAT					●
セラミックボールベアリング	●	●	●	●	●
グラスロッドライト	●	●	●	●	●
クリーンヘッドシステム	●	●	●	●	●
クイックストップ	●	●	●		
プッシュボタン式チャック	●	●	●	●	●
カートリッジ交換	●	●	●	●	
水フィルター	●				
注水	4点	4点	4点	1点	3点
製品保証	2年	1年	1年	1年	1年

Ti-Max Z

Premium



DYNAMIC POWER SYSTEM

3X-Power Systemが進化した、さらなる切削感をもたらす新システム「DYNAMIC POWER SYSTEM」を搭載。排気溝の拡大、ノズル構造の最適化、ローターバケットの拡大に加え、独自の機構を加えたことでさらなるパワーアップが実現しました。これにより、時間を要するジルコニアの除去も驚くほどスムーズに。是非、力強く、粘りのある切削感をご体感ください。




Ti-Max Z990L
ジルコニア板切削パワー
比較動画



DURAPOWER CHUCK

現行のチャック*に対して、約2倍の耐久性を誇る新チャック機構「DURAPOWER CHUCK」を搭載。従来モデルより把持力が大きく向上し、高い把持力が長時間継続します。独自の構造によりバーのスリップや芯ブレのリスクを低減し、長時間の切削に持ち堪える耐久性が、ここに実現。

*チャックとは、ハンドピースのバー（切削する棒）を保持する部分。この部分が改良され、新型のチャック機構搭載により、チャックの耐久力が向上。

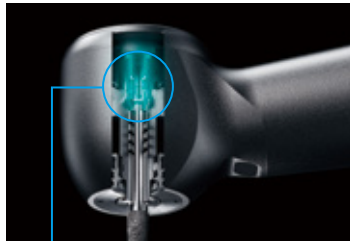

くさび効果により向上した
グリップ力

ナカニシ独自の技術でチャック機能を強化。くさび形状のパーツにより、遊びが少ない高いホールド感でバーをしっかりとグリップ。バー抜けのリスクも防ぎます。


Ti-Max Z990L
DURAPOWER
CHUCK 耐久性の動画




USABILITY

チタン製軽量ボディと100°アングルヘッド

チタン製で、さらに従来より内部構造を見直すことで、従来比16%の軽量化を実現。口腔内の生理的なカーブ（スピーカーブやウィルソーカーブ）を考慮し、100°アングルヘッドが口腔内でのスムーズなアクセスと高トルクの切削で効率良い施術が可能。

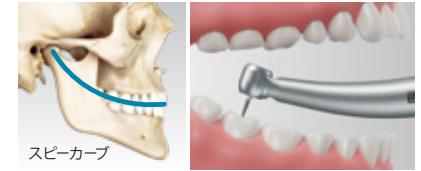


Ti-Max Z890LとZ800Lの比較

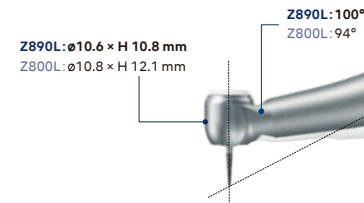

SAFETY & INFECTION CONTROL

クイックストップ搭載の新クリーンヘッドシステム

高速回転から約1秒で急停止するクイックストップ機能をヘッド内の前後に搭載。慣性回転を防ぐ急停止により、口腔内での巻き込み等の怪我のリスクを低減する安全性に配慮した治療が可能となります。また、ヘッド前後からのサックバックを防ぐ機能が向上し、衛生面での安全性も向上しました。

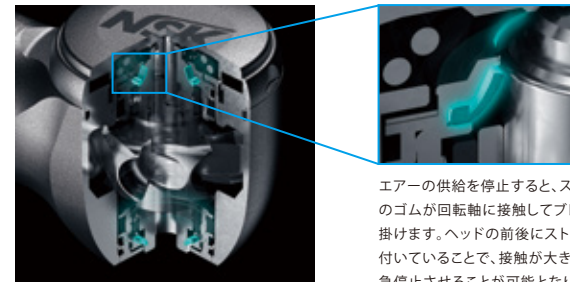

エアーの供給を停止すると、ストッパーのゴムが回転軸に接触してブレーキを掛けます。ヘッドの前後にストッパーが付いていることで、接触が大きくなり、急停止させることが可能となりました。

Ti-Max Z TECHNOLOGY & FUNCTION

クリーンヘッドシステム

高速回転を急停止するクイックストップ機能をヘッド前後に搭載した構造。口腔内での巻き込みや、サックバックのリスクを低減させ、安全性を向上させました。

高い把持力のチャック機構

従来よりチャックの耐久性を向上させた「DURAPOWERC HUCK」を搭載。把持力が落ちにくく、芯ブレのリスクを低減します。

滑りにくいDURAGRIPコーティング

滑りにくく傷が付きにくい独自の表面処理により、耐久性がアップし快適なグリップ感を確保します。

水フィルター内蔵

水経路への異物混入をシャットアウト。水詰まりのトラブルを低減します。

簡単に交換可能なカートリッジ


カートリッジはユーザーで自身で簡単に交換出来る仕様になっているため、修理に出す時間が削減でき、いつも良好な状態での施術環境へ。

冷却範囲を拡大した4点注水スプレー

視認性を妨げることなく、バー全体を効率よく冷却。注水を2方向に分けることにより、様々な長さのバーに対して、適切な冷却が可能。

チタン製の軽量ボディ

軽量で高い強度を持つ純チタン素材をボディに採用。

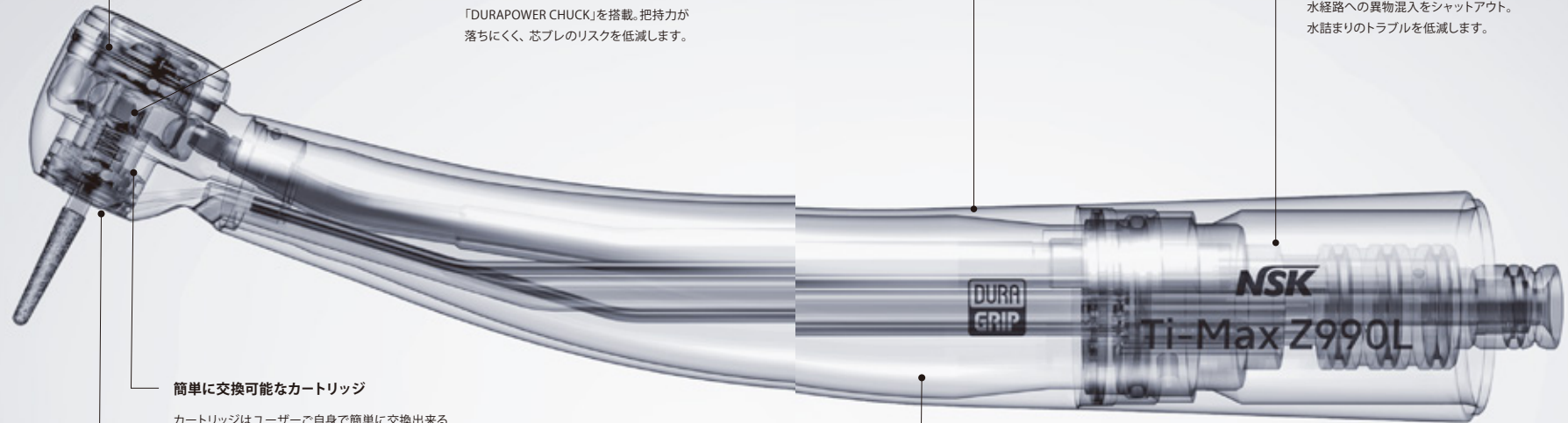

Ti-Max Z Premium

Z890/Z990



100° アングルヘッド
 DYNAMIC POWER SYSTEM
 DURAPOWVER CHUCK
 チタン製ボディー & DURAGRIP
 セラミックボールベアリング
 グラスロッドライト
 クリーンヘッドシステム
 クイックストップ
 プッシュボタン式チャック
 カートリッジ交換可能
 水フィルター内蔵
 4点注水スプレー
 安心の2年保証



スタンダードヘッド
 パワー：41 W*
 回転速度：320,000-400,000 min⁻¹
 ヘッドサイズ：φ10.6 × H 10.8 mm
 スタンダード / ショートシャンクバー用

トルクヘッド
 パワー：44 W*
 回転速度：280,000-360,000 min⁻¹
 ヘッドサイズ：φ12.1 × H 12.7 mm
 スタンダードシャンクバー用

*使用可能給気圧の最大値0.42MPa時の自社試験データ。
 ご使用の際は、0.28MPa以下を推奨致します。

NSK バテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890L	PA23720001	¥142,000
	トルク	●	Z990L	PA23730001	¥142,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890ML	PA23880001	¥142,000
	トルク	●	Z990ML	PA23890001	¥142,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890YL	PA23900001	¥142,000
	トルク	●	Z990YL	PA23910001	¥142,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890FL	PA23920001	¥142,000
	トルク	●	Z990FL	PA23930001	¥142,000
KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890KL	PA23740001	¥142,000
	トルク	●	Z990KL	PA23750001	¥142,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	●	Z890SL	PA23760001	¥142,000
	トルク	●	Z990SL	PA23770001	¥142,000

Ti-Max Z890 / Z990
 プロモーション動画 ▶



Ti-Max Z890 / Z990
 カートリッジ交換動画 ▶



エアタービン
 メンテナンス動画 ▶






S-Max M


M micro / M800 / M900

Advanced


選べるヘッドサイズと高トルクの切削

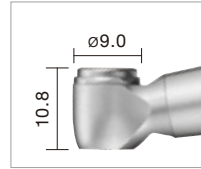

M micro
ミニヘッド 20 W

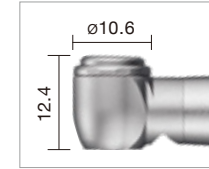

M800
スタンダードヘッド 23 W

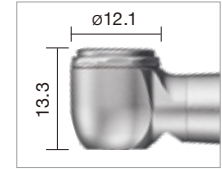

M900
トルクヘッド 26 W

3ステップで簡単に交換可能なカートリッジ

交換手順はわずか3ステップ。修理に出す時間のロスを抑えます。



1 付属のヘッドキャップレンチをヘッドキャップに合わせて、反時計方向に回すと取り外せます。



2 パーを押し上げると、ヘッドからカートリッジが外れます。



3 新しいカートリッジを切り欠きに合わせて挿入。ヘッドキャップを付属のレンチで取り付ければ完成です。

M micro
カートリッジ
交換動画



M800 / M900
カートリッジ
交換動画




S-Max M microの効果的な施術

上顎側部7番への使用 (筋突起が近接した際のアクセス)

日常臨床での施術しにくい部位 (開口時に生じる筋突起の近接) に対して、100°アングルが施術時の視界を妨げず、ミニヘッドがアクセスを容易にし、ストレスを低減した施術が可能です。



写真提供：ウエマツ歯科医院

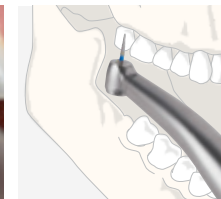

上顎前歯、支台歯形成時の使用

ヘッドの前面が隣在歯に干渉せずに施術が可能です。シリーズ最小ヘッドは様々な施術で効果を発揮します。



写真提供：モリカゲ歯科医院

S-Max M Advanced

M micro



100°アングルヘッド
3X-Power System
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
クイックストップ
プッシュボタン式チャック
カートリッジ交換可能
4点注水スプレー



ミニヘッド
パワー：20 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M micro YL, M micro FL)
ヘッドサイズ：ø9.0 × H 10.8 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用

M800/M900



90°アングルヘッド
3X-Power System
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
クイックストップ
プッシュボタン式チャック
カートリッジ交換可能
4点注水スプレー



スタンダードヘッド
パワー：23 W
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
350,000-450,000 min⁻¹ (M800YL, M800FL)
ヘッドサイズ：ø10.6 × H 12.4 mm
スタンダード / ショートシャンクバー用

トルクヘッド
パワー：26 W
回転速度：325,000-430,000 min⁻¹
300,000-410,000 min⁻¹ (M900YL, M900FL)
ヘッドサイズ：ø12.1 × H 13.3 mm
スタンダードシャンクバー用

S-Max M Advanced

M micro / M800 / M900

NSK バテラスカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro	PA2306	¥108,000
	スタンダード	●	M800L	P1253	¥108,000
	トルク	●	M900L	P1254	¥108,000
NSK マッハカップリング	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	スタンダード	—	M800	P1255	¥82,000
	トルク	—	M900	P1256	¥82,000
モリタαメインチューブ	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro ML	PA2313	¥108,000
	スタンダード	●	M800ML	P1267	¥108,000
	トルク	●	M900ML	P1268	¥108,000
ヨシダクイックジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro YL	PA2314	¥108,000
	スタンダード	●	M800YL	P1269	¥108,000
	トルク	●	M900YL	P1270	¥108,000
オサダファインジョイント	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro FL	PA2315	¥108,000
	スタンダード	●	M800FL	P1271	¥108,000
	トルク	●	M900FL	P1272	¥108,000

KaVo® Multiflex®	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro KL	PA2309	¥108,000
	スタンダード	●	M800KL	P1257	¥108,000
	トルク	●	M900KL	P1258	¥108,000
Sirona® Quick coupling	ヘッド	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	ミニ	●	M micro SL	PA2310	¥108,000
	スタンダード	●	M800SL	P1261	¥108,000
	トルク	●	M900SL	P1262	¥108,000

S-Max M800 /
M900
プロモーション動画



エアタービン
メンテナンス動画



S-Max pico



Special



優しさをカタチにした ウルトラミニヘッド & スーパースリムボディのエアタービン

ウルトラミニヘッドとスーパースリムボディのエアタービンS-Max picoは、MIやマイクロスコープを用いた高い精度を求められる施術のために開発されました。通常のエアタービンと比べて十分な術野が確保できるため、小児治療や顎関節症などで口を大きく開けることの難しい患者さまに対する治療や、臼歯部の舌側遠心の切削、咬合面でのチャンバーオープンやミラーテクニックを用いる際など、繊細さの求められる施術で大きな力を発揮します。

広い術野の確保

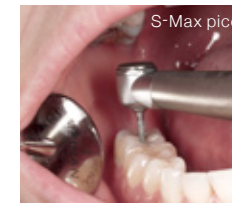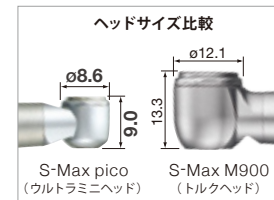

マイクロスコープを用いた施術例



広い術野を確保できるので、マイクロスコープを使用した窩洞形成の際にも、ミラーテクニックを併用して、窩洞内部を確認しながらの形成も可能です。

ミラーテクニックの併用




写真提供：ウエマツ歯科医院

pico専用バー

ナカニシは、S-Max picoの性能を最大限に発揮するために専用のバーを開発しました。この専用バーは、高い真円度と高い芯ブレ精度(3 μ m以下)を誇り、MIなどのより精度を求められる施術に最適です。

高い真円度と高い芯ブレ精度を実現
(回転速度: 400,000 min⁻¹)

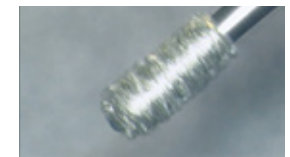

picoバー(PC1)

S-Max pico Special



90°アングルヘッド
ステンレス製ボディ
セラミックボールベアリング
ガラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
シングルスプレー












パワー：9 W
回転速度：380,000~450,000 min⁻¹
360,000~430,000 min⁻¹ (S-Max pico YL, pico FL)
ヘッドサイズ：ø8.6 × H 9.0 mm
ショートシャンクバー / スーパーショートシャンクバー用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico	P1140	¥121,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico ML	P1146	¥121,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico YL	P1148	¥121,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico FL	P1165	¥121,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico KL	P1142	¥121,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S-Max pico SL	P1143	¥121,000

エアータービン
メンテナンス動画 ▶



pico専用バー

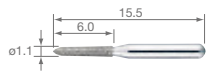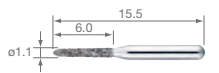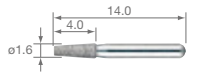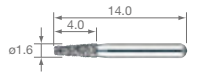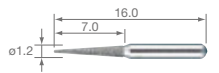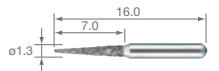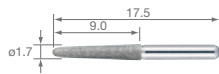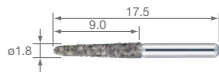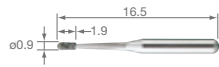

製品名	製品番号	標準価格
PC1	Y1001817	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC2	Y1001818	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3	Y1001819	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC3ff	Y1002019	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4	Y1001820	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC4ff	Y1002020	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5	Y1001821	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC5ff	Y1002021	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6	Y1001822	¥3,000
●3本入		

製品名	製品番号	標準価格
PC6ff	Y1002022	¥3,000
●エクストラファインバー ●3本入		




Ti-Max X450

Special

45°ヘッドがもたらす高いアクセス性 智歯や埋伏歯の分割・抜歯をスムーズに

エアタービンTi-Max X450は、特徴的な45°ヘッドとスリムなボディデザインにより、通常のエアタービンではアクセスの困難な智歯や埋伏歯の分割、抜歯等に大きな力を発揮します。21 Wの高トルクがもたらす力強い切削と、3点ジェット注水方式による高い冷却効果に加え、エアタービンTi-Max X450ならではの多様な術式に対応します。

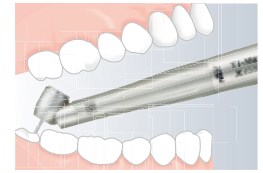

高いアクセス性

45°のヘッド角度により、高いアクセス性と広い視野を確保。埋伏智歯を覆っている硬組織などの削除や歯根の分割に最適です。

21 Wの高トルクによる力強い切削

ヘッド部に搭載されたナカニシ独自のツインノズルにより、ドライブエアの力を余すことなくローターに伝達することで、力強く、粘りのある切削を実現しました。

Ti-Max X450だからこそ実現する臼歯部への高いアクセス性と多様な術式



右下8番埋伏歯の抜歯

口唇や頬粘膜との干渉が少ないため、タービン本体に余分な外力が掛からず、安全にバーを適切な角度に保つことができます。視野の広さも特徴です。



左下6番分割抜歯

前方歯牙との間に十分なスペースが確保でき、無理なくレストが置けます。バーに適切な角度を与えることが容易で、根尖に至るような深さでも正確な分割が可能です。



右下6番遠心舌側隅角部の支台歯形成

口唇や頬粘膜、歯列の影響が少なく、形成歯が前方あるいは頬側に傾斜していても、アンダーカットを生じない適切な軸面形成が可能です。レストも歯牙上に容易に設定できます。

写真提供：青葉会西川歯科クリニック

Ti-Max X450 Special



45°アングルヘッド
チタン製ボディー & DURACOAT
セラミックボールベアリング
グラスロッドライト
クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
3点注水スプレー（チップエアなし）
※注水は噴霧状にはなりません。










パワー：21 W (X450L)、18 W (X450L以外)
回転速度：380,000-450,000 min⁻¹
ヘッドサイズ：φ11.2 × H 13.5 mm
25 mm ロングバー専用

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450L	P1078	¥120,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450ML	P1083	¥120,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450YL	P1085	¥120,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450KL	P1079	¥120,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	X450SL	P1080	¥120,000

エアータービン
メンテナンス動画 ▶

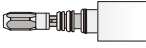

カップリングジョイント タイプ別一覧

カップリング	ライト	Ti-Max Z890		Ti-Max Z990		S-Max M micro	S-Max M800	S-Max M900	S-Max pico	Ti-Max X450
		スタンダードヘッド	トルクヘッド	ミニヘッド	スタンダードヘッド	トルクヘッド	ウルトラミニヘッド	45°アングルヘッド		
NSK パテラスカップリング 	●	製品名	Z890L	Z990L	M micro	M800L	M900L	pico	X450L	
		製品番号	PA23720001	PA23730001	PA2306	P1253	P1254	P1140	P1078	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
NSK マッハカップリング 	—	製品名	—	—	—	M800	M900	—	—	
		製品番号	—	—	—	P1255	P1256	—	—	
		標準価格	—	—	—	¥82,000	¥82,000	—	—	
モリタαメインチューブ 	●	製品名	Z890ML	Z990ML	M micro ML	M800ML	M900ML	pico ML	X450ML	
		製品番号	PA23880001	PA23890001	PA2313	P1267	P1268	P1146	P1083	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
ヨシダクイックジョイント 	●	製品名	Z890YL	Z990YL	M micro YL	M800YL	M900YL	pico YL	X450YL	
		製品番号	PA23900001	PA23910001	PA2314	P1269	P1270	P1148	P1085	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
オサダファインジョイント 	●	製品名	Z890FL	Z990FL	M micro FL	M800FL	M900FL	pico FL	—	
		製品番号	PA23920001	PA23930001	PA2315	P1271	P1272	P1165	—	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	—	
KaVo® Multiflex® 	●	製品名	Z890KL	Z990KL	M micro KL	M800KL	M900KL	pico KL	X450KL	
		製品番号	PA23740001	PA23750001	PA2309	P1257	P1258	P1142	P1079	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	
Sirona® Quick coupling 	●	製品名	Z890SL	Z990SL	M micro SL	M800SL	M900SL	pico SL	X450SL	
		製品番号	PA23760001	PA23770001	PA2310	P1261	P1262	P1143	P1080	
		標準価格	¥142,000	¥142,000	¥108,000	¥108,000	¥108,000	¥121,000	¥120,000	



CONTRA-ANGLES



クラス	Premium	Special	Advanced	Basic
素材	チタン	チタン	チタン	アルミ
DURAGRIP	●	●	●	
アンチヒーティングシステム	●	●		
セラミックボールベアリング	●	●	●	
ガラスロッドライト	●	●	●	
クリーンヘッドシステム	●	●	●	●
プッシュボタン式チャック	●	●	●	●
水フィルター	●	●		
注水	4点	4点	4点	
製品保証	2年	1年	1年	1年

Ti-Max Z

Premium





高い静粛性と低振動

ミクロン単位の厳しい寸法精度の部品とギアの絶妙な組み合わせにより、今までにない高い静粛性と低振動を実現。術者と共に患者さまにも快適な環境を提供します。



アンチヒーティングシステム (Z95L, Z85L, Z84L)

ナカニシ独自の発熱防止機構“アンチヒーティングシステム”は、コントラアングルの構造上のウィークポイントであったハンドピースの発熱を低減します。術者にとっても、患者さまにとっても、より快適な治療を目指しました。

DURABLE

究極のハンドピースを目指して、高い耐久性を実現。

細部に至るまでの緻密な設計と、ナカニシが世界に誇る超精密加工技術の融合により、究極を目指すハンドピースにふさわしい高度な耐久性を実現。滅菌に対する耐久性もさらにアップしました。

COMFORT

臨床現場の声から生まれた、ナカニシハンドピースの最高峰Zシリーズ。

もっと使いやすく、もっと清潔に、もっと安全に。ストレスフリーをさらに高いレベルで実現するために、臨床現場のニーズに応える様々な機能をフルに採用。術者が最も快適に使用できるハンドピースを目指して。そして、患者さまにも安心して心地よい治療環境をご提供できるように。ポディー形状から衛生・安全対策に至るまですべてを見直し、独自の先進技術を惜しみなく注ぎ込みました。ナカニシの最高峰Zシリーズでしか得られない満足感がきっとあります。

スモールヘッド


従来の常識を覆すまでにヘッド部分を小型化。同時に、当社従来品X95Lに比べてヘッド角度を2°外側に傾けました。臼歯部など施術が困難な部位においても、確かな視認性と高いアクセス性を実現します。

スリムネック

ネック部分が細くなったことで、従来よりも視認性が大幅に向上。あらゆる施術において、広い術野を確保できるようになりました。



Ti-Max Z TECHNOLOGY & FUNCTION

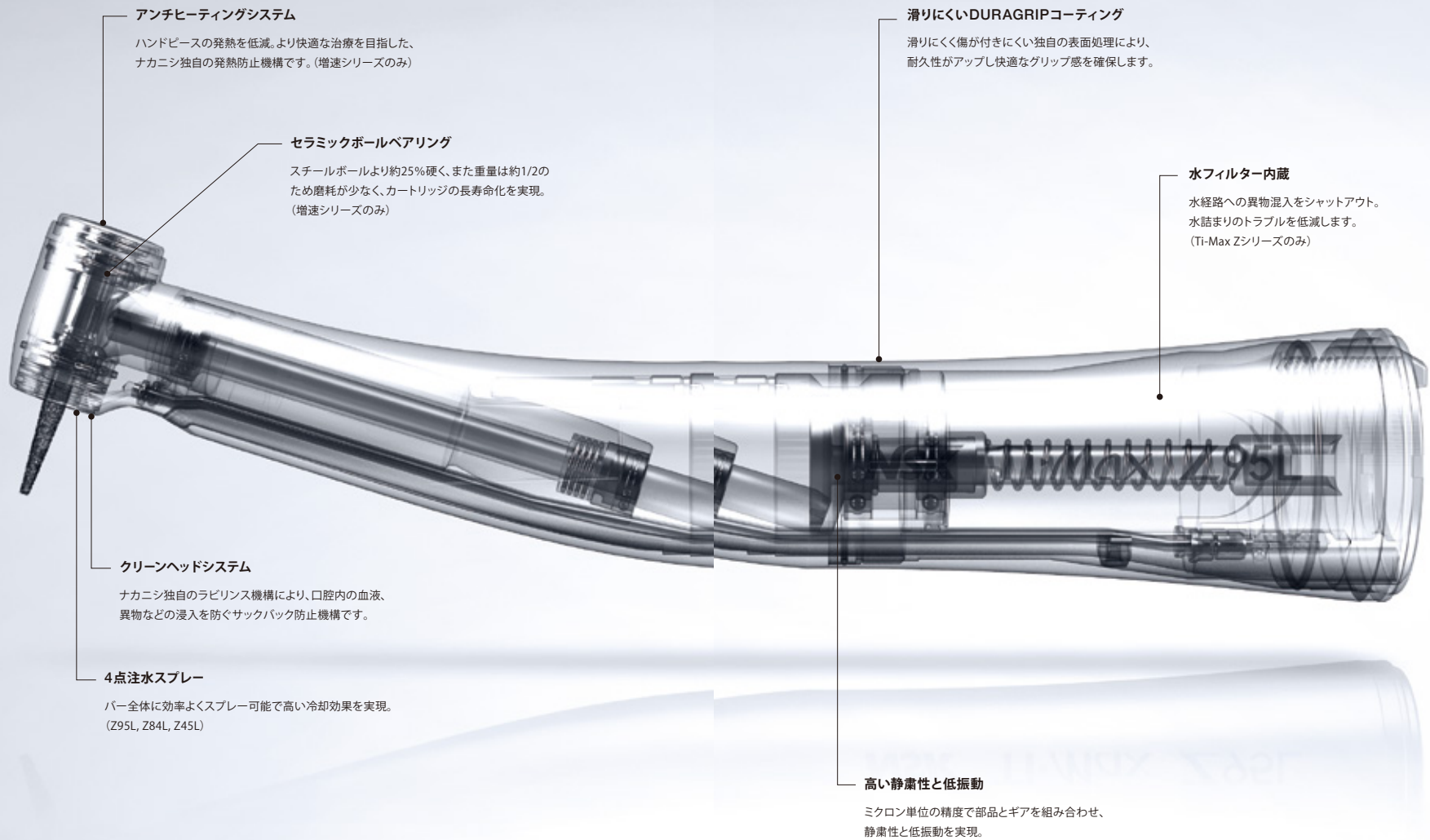

Ti-Max Z Premium



チタン製ボディー & DURAGRIP
アンチヒーティングシステム
セラミックボールベアリング
グラスロッドライト

クリーンヘッドシステム
プッシュボタン式チャック
水フィルター内蔵
4点注水スプレー




ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z95L	C1034	¥163,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- FGバー用(ø1.6)スタンダードシャックバー用



ウルトラミニヘッド

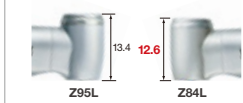

極限まで小型化したヘッドサイズ、92°に設定された独自のヘッド角度。臼歯部など施術が困難な部位においても、スムーズにアプローチできます。

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.5	●	Z84L	C1135	¥168,000

- 最高回転速度：180,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- ヘッドサイズ：ø8.9 × H 12.6 mm ●FGバー用(ø1.6)ショートシャックバー用




チタン製ボディー & DURAGRIP
グラスロッドライト
クリーンヘッドシステム

プッシュボタン式チャック
水フィルター内蔵
シングルスプレー



ウルトラミニヘッド

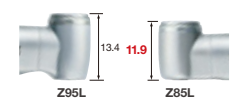

11.9 mmのヘッド高は、従来届きにくかった部位の治療や、小児および顎関節症患者の治療に効果を発揮します。

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	Z85L	C1062	¥168,000

- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- ヘッドサイズ：ø8.9 × H 11.9 mm ●アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング ●FGバー用(ø1.6)ショートシャックバー用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	Z25L	C1038	¥126,000

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹ ●ヘッドサイズ：ø8.9 × H 13.4 mm
- コントラバー用(ø2.35)

Ti-Max Z
プロモーション動画



コントラアングル
メンテナンス動画



Ti-Max Z45L

Special



ナカニシから高速回転機器の新たなイノベーション。


Ti-Max Z45Lは、従来型のハンドピースでは届きにくかった大白歯部へ、前歯部や歯列に干渉されることなく容易にアクセス可能です。コントラアングルならではの、安定した回転と高いトルクはスムーズな埋伏智歯の切断除去を実現し、術者と患者さまの負担を軽減します。また、切替可能な2way注水方式を採用し、外科領域のみならず、歯牙切削においても45°ヘッドの有効性を大いに発揮します。切削バーを歯軸に対して無理なく平行に当てられるため、臼歯部支台歯形成や前歯部カリエス除去なども、ストレスの少ない正確な施術が可能になります。高いアクセス性、安定したレスト、そして視認性の高さをもたらす、ストレスフリーの治療スタイルは、まさに新感覚です。



上顎左側2番近心



上顎左側5番遠心

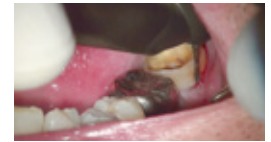

下顎左側7番根間中隔



下顎右側6番舌側



下顎左側3番歯頭部



下顎左側7番咬合面

写真提供:青葉会 西川歯科クリニック



ジェット注水



ミスト注水

切替可能な2way注水方式

観血的処置では、チップエアのないジェット注水で気腫を防止。切削バーと歯牙への高い冷却効果を発揮するミスト注水により歯牙への熱損傷リスクの軽減を実現。施術状況にあわせて切替えができる2way注水方式は術者の自由度を大きく向上させます。



- 最高回転速度：168,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ：φ9.6 × H 14.5 mm
- 45°アングルヘッド ● チタン製ボディ & DURAGRIP
- アンチヒーティングシステム ● セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト ● クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ● 水フィルター内蔵
- 4点注水(2way注水方式) ● FGバー用(φ1.6)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:4.2	●	Z45L	C1064	¥154,000



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Ti-Max X

Advanced



- 最高回転速度：200,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ：φ10.0 × H 14.5 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●4点注水スプレー
- FGバー用(φ1.6)スタンダードシャンクバー用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X95L	C600	¥143,000
	—	X95	C610	¥110,000



- 最高回転速度：200,000 min⁻¹ ●ミニヘッド
- ヘッドサイズ：φ9.6 × H 13.4 mm
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- セラミックボールベアリング
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- FGバー用(φ1.6)ショートシャンクバー用



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:5	●	X85L	C604	¥148,500
	—	X85	C614	¥115,000



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能



- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ：φ9.6 × H 13.4 mm
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- コントラバー用(φ2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X25L	C601	¥111,000
	—	X25	C611	¥83,000



- 最高回転速度：10,000 min⁻¹
- ヘッドサイズ：φ9.6 × H 13.4 mm
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック ●シングルスプレー
- コントラバー用(φ2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X15L	C602	¥124,000
	—	X15	C612	¥92,500



特殊防塵機構



プロフィー用ハンドピース

- 最高回転速度：2,500 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転 ●特殊防塵機構

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	●	X57L	C609	¥106,000
	—	X57	C619	¥72,500



チップロック機構



EVA用ハンドピース

- 最高回転速度：10,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト
- プロフィン / エバチップ / オーソファイル用*
- 上下運動(ストローク幅1.4 mm) ●チップロック機構
- ※金属シャンクは不可

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	●	X55L	C608	¥136,500
	—	X55	C618	¥103,000



ストレートハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- チタン製ボディ & DURAGRIP
- ガラスロッドライト ●クリーンヘッドシステム
- シングルスプレー ●ハンドピースバー用(φ2.35)
- コントラバー用(φ2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X65L	H273	¥111,000
	—	X65	H274	¥60,000

コントラアングル
メンテナンス動画



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

FX series


Basic



エコノミーハンドピースのスタンダードモデル

高いアクセス性と広い術野

細くて長いネック形状とホールド感の高いボディー形状は、従来のハンドピースでは届きにくかった臼歯部へのアクセス性を大きく高めています。

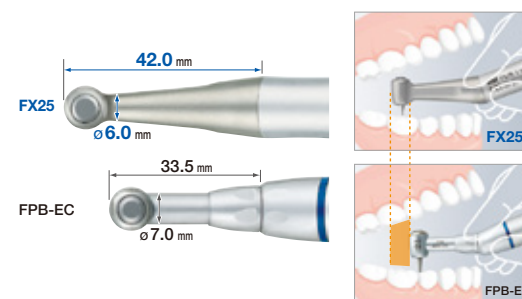

高い利便性 (FX25, FX23)

術者の手元で簡単にカートリッジを交換する事ができるので、修理に出す時間のロスを無くす事ができます。




クリーンヘッドシステム (FX25, FX15, FX65)

コントラヘッド部への異物侵入を防止。衛生的な施術を行えるとともにベアリングの耐久性をアップ。



ペーストディフェンスシステム (FX57)

ヘッドへのクリーニングペーストの侵入を防ぐダブルシールド防塵シールを採用。シール接触部には耐摩耗性を大幅に向上させるDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コーティングを施すことで、ペースト由来のトラブルを解消し、高い耐久性と安心の2年保証を実現しました。

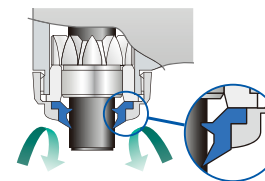

プッシュボタン式チャック

ワンタッチでスムーズなバーの着脱を可能にするプッシュボタン式チャックを採用。



高い静寂性

高精度ギアにより、振動や音の発生を最小限まで抑え、術者へのストレスを大きく軽減します。



FX series Basic




- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX25	C1052002	¥38,000




- 最高許容回転速度：30,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX23	C1056002	¥25,000

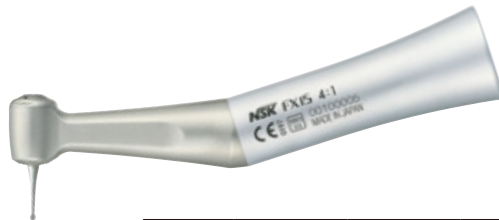

- 最高許容回転速度：10,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング
- 外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX15	C1053002	¥65,000

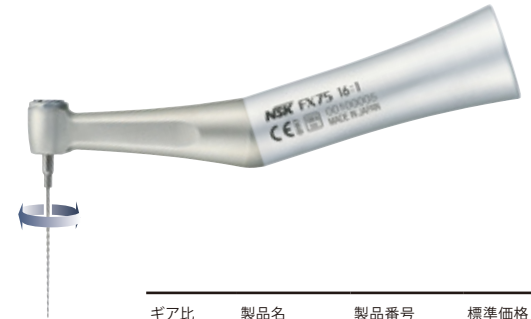

エンド用ハンドピース

- 最高許容回転速度：1,250 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- エンジンファイナル用 ●360°回転

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	FX75	C1055002	¥66,000



ベストディフェンスシステム

プロフィー用ハンドピース

- 最高許容回転速度：5,000 min⁻¹
- プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転 ●ベストディフェンスシステム



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	FX57	C1054002	¥55,000



ストレートハンドピース

- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム ●外部注水
- ハンドピースパー用(ø2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	FX65	H1014002	¥31,500

EX series Basic

一般切削用ヘッド 外部注水



製品名	製品番号	標準価格
FPB-Y	C875	¥27,000

- 最高許容回転速度：40,000 min⁻¹
- クリーンヘッドシステム ●プッシュボタン式チャック
- ボールベアリング ●コントラバー用(φ2.35)



製品名	製品番号	標準価格
NAC-Y	C032002	¥14,500

- 最高許容回転速度：30,000 min⁻¹
- ラッチ式コントラ
- コントラバー用(φ2.35)

プロフィー用ヘッド



製品名	製品番号	標準価格
AR-Y(S)	C187	¥13,000

- 最高許容回転速度：5,000 min⁻¹
- プロフィー用 ●スクリュー式
- 360°回転



EVA用ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
EVA-Y	C235	¥13,000

- 最高許容回転速度：10,000 min⁻¹
- エバチップ用
- 上下往復(ストローク幅1.4 mm)

エンド用ヘッド



製品名	製品番号	標準価格
MP-Y	C547	¥19,000

- 最高許容回転速度：20,000 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
MPAS-Y	C882	¥30,000

- 最高許容回転速度：20,000 min⁻¹
- ミニヘッド ●プッシュボタン式チャック
- 根管長測定器接続用(シャンク長12 mm)
- 360°回転



製品名	製品番号	標準価格
VM-Y	C765001	¥23,000

- 最高許容回転速度：8,000 min⁻¹
- プッシュボタン式チャック ●ハンドファイル用
- 上下往復(ストローク幅0.4 mm)

●最高許容回転速度は、1:1の等速シャンクを装着した時のモーター回転速度を表します。

シャンク



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	EC-30	C100008	¥11,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4:1	ER4	C634	¥38,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 10:1	ER10	C635	¥43,000



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 16:1	ER16	C636	¥47,000

AR-Y(S) ヘッド交換動画 


isoE-LUX

歯科用照明器具



訪問診療先の環境にかかわらず、口腔内を明るく照射します。スリムボディーによる高いアクセス性で、見えにくい部分にもアプローチが可能。

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	isoE-LUX	Z1265	¥36,500

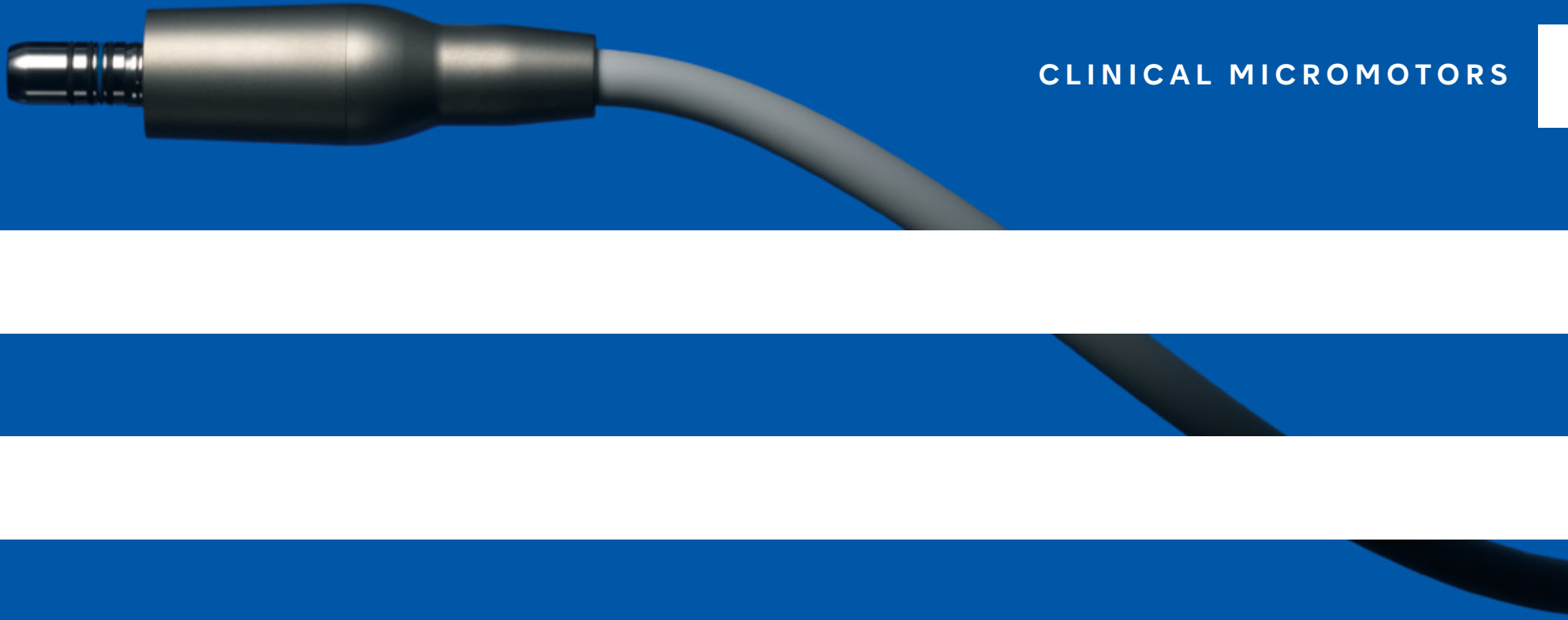

CLINICAL MICROMOTORS

NLX nano



手が求める新しいカタチ。それは、エアータービンと変わらぬ持ちやすさ

従来のマイクロモーターは、エアータービンに比べてトルクが高い一方、重量が重く、またコントラアングルをつけると長くなりバランスが悪いという大きなデメリットがありました。

NLX nanoマイクロモーターは、そのデメリットを排除し、従来の高トルクを維持したまま、軽量、コンパクト、高いバランス性を実現しました。光源にLEDを採用し、32,000 LUXの明るい白色光で治療部位を鮮明に照射します。

長さ25%、重さ20%ダウン

従来のマイクロモーターの高いトルクを損なうことなく、小型化、軽量化に成功。



高いバランス性

マイクロモーターが従来に比べ短く、軽くなったため、コントラアングルを付けた状態でも、高いバランス性を実現。また、エアータービンとほぼ同等の長さになり、同じような感覚でシームレスな治療が可能になります。




広範囲の治療が可能に

NLX nanoマイクロモーターは、術者の方々が既にお持ちのEタイプ*のライト付またはライト無しのコントラアングルをそのまま接続して使用可能です。様々なコントラアングルの組み合わせにより、100から200,000min⁻¹までの広範囲な回転域を実現し、幅広い治療に対応できます。

	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
16:1		100-2,500min ⁻¹					
1:1				2,000-40,000min ⁻¹			
1:5						10,000-200,000min ⁻¹	

*ISO 3964準拠

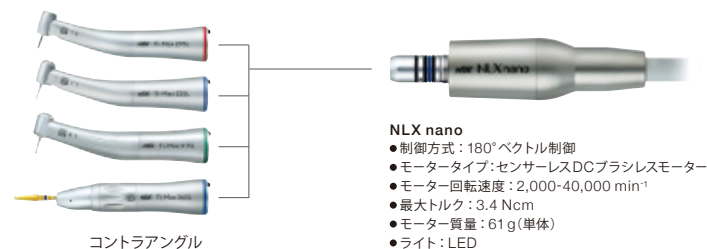

コントラアングル

- NLX nano**
- 制御方式：180°ベクトル制御
 - モータータイプ：センサーレスDCブラシレスモーター
 - モーター回転速度：2,000-40,000min⁻¹
 - 最大トルク：3.4 Ncm
 - モーター質量：61 g(単体)
 - ライト：LED

NLX nano



製品名	製品番号	標準価格
NLX nano 標準セット	Y1001320	¥200,000

セット内容

- 制御ユニット ●ライト付モーター ●モーターコード ●ACアダプター ●ACコード

仕様

[制御ユニット]

- 定格入力: AC 28 V 50/60 Hz ●寸法: W 127 × D 149 × H 54 mm ●重量: 517 g

[モーター]

- 回転速度: 2,000-40,000 min⁻¹ ●最大トルク: 3.4 Ncm



製品名	製品番号	標準価格
NLX nano	E1044051	¥120,000

- NLX nano用ライト付モーター(コード無し)
- 135℃までの温度でオートクレーブ可能



製品名	製品番号	標準価格
NLX CD	E1044061	¥30,000

- NLX nano用コード(2.2 m)



製品名	製品番号	標準価格
NLAC(100V)	U497001	¥17,500

- NLX nano用ACアダプター

Air Motor



治療用モーター

Ti-Max X205L



- 最高回転速度：23,000 min⁻¹ ±10%
- チタン製ボディー & DURACOAT
- ライト付ISO標準4ホール
- 逆止弁付
- 内部注水

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	X205L	M1013	¥126,000

S-Max M205



- 最高回転速度：22,000 min⁻¹ ±10%
- ステンレス製ボディー
- ミッドウエスト4ホール
- 逆止弁付
- 内部注水

ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	M205	M1007	¥100,000



ORAL HYGIENE

Varios Combi Pro



Two Maintenance Systems in One

超音波スケーラーとパウダーデバイス。
幅広いプロフェッショナルケアに対応する2つの高機能ツールを、この1台に凝縮。



ナカニシ独自の構造で、2つの機能をより安全に、スマートに使い分ける。

2つのシステムを1台のスペースで

超音波スケーラーとパウダーデバイス。プロフェッショナルケアに必要な2つのシステムを1台に凝縮しました。よりスムーズな施術を実現するとともに、臨床現場の省スペース化にも貢献します。

プロフィー・ペリオのパウダー機能を自動認識

各チャンバーを取り付けるだけで、プロフィー・ペリオの機能を自動認識。煩わしい機能選択操作が不要で、誤作動の防止にも配慮しました。

ユニットとチャンバーが完全に独立

チャンバーからハンドピースまでが一体になりユニットからは独立構造になっているので、万一、粉詰まりが発生しても、ユニットを分解するなどの面倒な修理が不要になり、個々のパーツ交換が可能です。ユニット内はエアと水回路だけのスマートな発想の設計です。

2種類のパウダーが混入しない安心な設計

プロフィー・ペリオ用でそれぞれ専用のチャンバー、ハンドピース、ハンドピースホースを開発。パウダー流路を丸ごと交換するため、2種類のパウダーが混ざることがなく安心して使用できます。


充実の機能をフットコントロールで

超音波スケーラー、パウダーの2つの機能の使い分けができるマルチフットコントロールにより、手動による操作の切り替えのないスムーズな施術を可能にします。


操作性へのきめ細かな配慮

超音波スケーラーとパウダーのモードを自動認識

超音波モードとパウダーモードは、ハンドピースを持ち替えるだけで自動で切り替わります。パウダーモードのプロフィー・ペリオ機能は、チャンバー交換時に自動認識します。

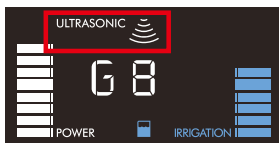


超音波モード使用

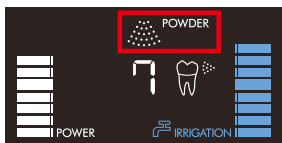


パウダーモード使用

前回使用した機能設定を記憶

機能毎に、前回使用したそれぞれのモードや水量、パワーの設定を記憶することが可能です。

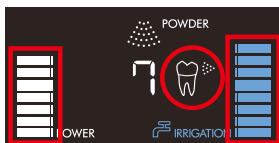

プロフィーモード使用

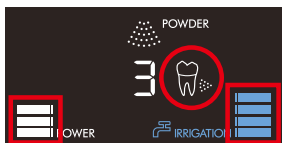

ペリオモード使用

優れたメンテナンス性

オートクリーニング機能で清掃を手軽に

オートクリーニングキーを押すだけで超音波モード、パウダーモード、それぞれのハンドピース、ハンドピースホース内を簡単に清掃することが可能。オートクリーニング中は、残時間が表示されます。

(クリーニング時間は各約45秒)



超音波モード

ユニット内の注水経路を自動的に洗浄します。消毒液使用後などに行うことで、経路の腐食などのリスクを軽減します。

パウダーモード

ホース、ハンドピース内に残った残留水をほぼゼロまで排出し、粉詰まりリスクを軽減。患者さま毎のお手入れが可能です。

マルチに使えるフットコントロール


足でボタンを踏む感覚を追求して開発されたマルチフットコントロール。モード切替、パワー設定やリンス機能の選択など、フットコントロールによってユニット操作のハンズフリー化を実現。施術を中断することなく必要な操作を行なうことができます。



ULTRASONIC

耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

チタン製の超音波スケーラーハンドピースをライト付パリオスシリーズ全てに搭載。チタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。また、細い先端部がアクセスが困難な最後臼歯遠心などへのアプローチをスムーズにし、口腔内で自由な動きが取れるため、チップを適切な角度で当てることが容易に行えます。

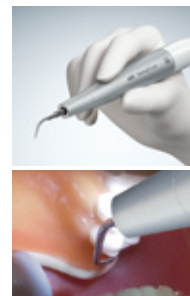

DURAGRIPコーティング

純チタン製ボディの表面に、微小な凹凸によって光沢面を排除するブラスト処理を行い、その表面に独自の「DURAGRIP」コーティングを施しました。傷が付きにくく耐久性がアップすると同時に、表面の凹凸により様々なグローブでも滑りにくく、快適なグリップ感を提供します。

iPiezo engine®

さまざまな状態の歯石に対応する「iPiezo engine®」搭載

「もっと上手にスケーリングをしたい」「もっと簡単に歯石を取りたい」。

歯科衛生士の方々のそんな声を真剣に取り入れ、ナカニシが独自に開発した超音波エンジン「iPiezo engine®」をパリオスシリーズに搭載しました。まるで自分の手の延長のように、チップに術者の意図が的確に伝わり、歯面の状況に合わせた思い通りの操作が可能。スピーディーな施術で、患者さまにとっても優しいスケーリングを実現します。

フィードバック機能


硬い歯石や柔らかい歯石などの歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。硬く取れにくい歯石に対しても、安定したスケーリングを行えます。

オートチューニング機能

チップ先端で設定パワーが発揮される様に、発振周波数を自動的に調整。チップの暴れやバタつきを最小限に抑えるため、吸い付くようにチップが歯面を捉え、歯面状況が手指に的確に伝わります。

安定したスケーリングが可能

従来の超音波スケーラーは、柔らかい歯石から硬い歯石にぶつかるとパワーが落ちてしまうことがありました。パリオスシリーズは「iPiezo engine®」の働きにより、自動的にチップ先端にかかる負荷を感知し、パワーを落とすことなく安定したスケーリングが行えます。


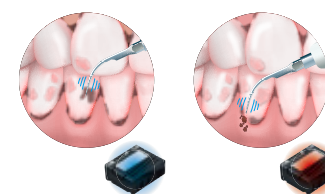


POWDER PROPHY-SYSTEM



安定したパウダー噴射

パワフルで安定したパウダー噴射を実現するために、タービン開発において培った流体解析技術を応用し、チャンバー内での効率的なパウダーの流れを実現。パウダー・水・エアのスムーズな噴射を可能にしました。チェアタイムを短縮しながら、効率良く成果を得られます。

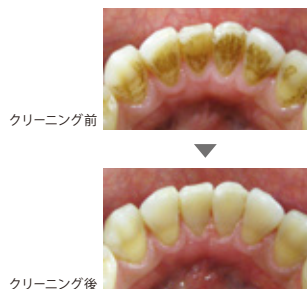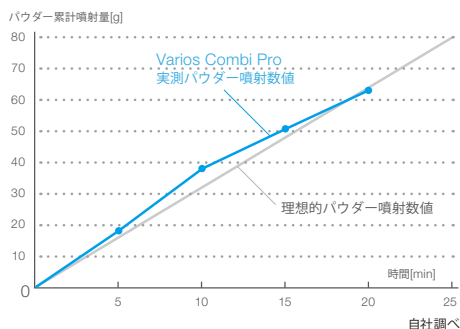

※結果を保証するものではありません。

操作性の高いハンドピースとノズル

アクセス性に優れ、口腔内で操作しやすいスリムなハンドピース。長く小さいノズルは、臼歯部などへのアプローチを容易にします。頬側では必要以上にハンドピースで口角を広げることなく、舌側では広い術野の確保が術者と患者さまの負担を軽減します。



プロフィー用パウダー

歯面へのダメージを抑え、スピーディーにステインやバイオフィルムを落とします。

➡ P124-127 Powder Maintenance



POWDER PERIO-SYSTEM



歯間部、歯肉辺縁のバイオフィルムの除去


- 今まで操作しにくかった部位(叢生部や歯肉辺縁など)のバイオフィルム、軽微なステインの除去。
- 届きにくい部分(複雑な歯列、歯間部、小窩裂溝など)のバイオフィルムの除去。
- インプラント周囲、補綴装置の清掃。
- 縁上用の歯面清掃器より、優しい噴射圧の設計。
- 非接触なので、歯牙/歯肉などへの負担が少ない。
- 補綴修復材料への負担が少ない。



共焦点レーザー顕微鏡※1用いて200倍で処理面を観察

※1 CLSM Lasertec社

さまざまな補綴装置の歯面にダメージを与えることなく施術することが可能です。

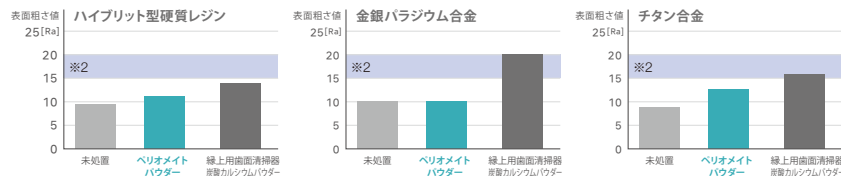

※2 レギュラーダイヤモンドポイントの表面粗さ平均値

資料提供：東京医科歯科大学歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻

ペリオ用パウダー

柔らかなパウダーなので軟組織を傷付けにくく、効率的で優しいプロケアを実現します。

➡ P124-127 Powder Maintenance



POWDER PERIO-SYSTEM



噴射力を自動で調節

チャンバー(ペリオ用)を接続すると、噴射力がプロフィーモードのパワーから自動的に20%低下。歯肉縁下での使用に配慮した設計です。(噴射部位や患者さまの状態を見てパウダー流量と水量を調整してください。口腔内の状況に合わせて低いパワーから徐々に設定を上げていくことをお勧めいたします。)

歯周ポケット内のバイオフィルムを除去

- チップと付着物が非接触で広範囲に除去できるため、チップが届きにくい箇所も清掃が可能。
- パウダーの流れを解析により最適化。
- 目視できない箇所でも、広範囲のパウダー噴射により、プラーク・バイオフィルムなどの取り残しが従来のメンテナンス器具に比べ大幅に減少。
- アクセシビリティと歯肉への安全性を追求した、柔軟性のあるプラスチックノズルを採用。



歯への優しさと除去能力を両立

- デリケートな歯周ポケット内の縁下バイオフィルムを除去するには1歯20秒(1面約5秒)の噴射が最適です。*
- ノズル先端のパウダー噴射方向に沿って横方向に移動させながら、縦方向に往復するように動かすことがポイントです。

* Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haerberlein I, Petersilka G., Subgingival debridement efficacy of glycine powder air polishing., J Periodontol. 2007 Jun;78):1002-10, Petersilka GJ, Steinmann D, Haerberlein I, Heinecke A, Flemmig TF., Subgingival plaque removal in buccal and lingual sites using a novel low abrasive air-polishing powder., J Clin Periodontol. 2003 Apr;30(4):328-33.

ペリオ用パウダー

柔らかなパウダーなので軟組織を傷付けにくく、効率的で優しいプロケアを実現します。


▶ P124-127 Powder Maintenance



Perio Mate Powder

パウダーの流れを最適化

ノズルチップは、歯周ポケット内に使用した際に挿入面全体にパウダーが流れるよう設計されています。このため、ノズルから噴き出したパウダーは、一方向だけに強くは噴射しません。また、パウダー・エアと水は別回路での噴射となっており、パウダー・エアはポケット底に直接当たらない安全を考慮した設計です。

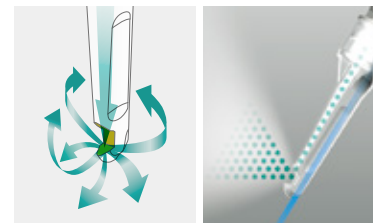

アクセシビリティと歯肉への安全性を追求した柔軟性のあるプラスチックノズル

細くて薄く、柔軟性のあるノズルチップは、歯牙の豊隆に沿ってしなやかに曲がるので、引き締まった歯肉や隣在歯の根面への挿入も容易で、患者さまの苦痛を軽減します。視認性の良い半透明の材質により、歯肉縁下への挿入も快適。ノズルチップは患者さまごとに交換するディスポーザブルタイプ。滅菌済みのため、開封直後に使用可能です。



Perio Mate Nozzle Tip

- 患者さまごとに交換できるディスポーザブルタイプ
- 滅菌済みのため開封直後に使用可能

製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトノズルチップ	Y1002741	¥6,500

- 40本入



Varios Combi Pro



Varios Combi Pro 標準セット

製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
バリオスコンビ Pro ベーシックセット Ti	Y1500790	¥510,000	バリオスコンビ Pro ペリオセット Ti	Y1500791	¥530,000

セット内容

- コントロールユニット
 - ACコード
 - チャンバー(プロフィー用)
 - ハンドピースホース(プロフィー用)
 - パウダーハンドピース(プロフィー用)
 - バリオス2ハンドピース(ライト付)
 - ハンドピースコード
 - VCPボトル400 mL
 - 水フィルター
 - フットコントロール(ハンガー付)
 - スケーリング用チップ3本
 - 滅菌ケース
 - フラッシュバル(15 g × 5袋)
- 他付属品

セット内容

- コントロールユニット
 - ACコード
 - チャンバー(ペリオ用)
 - ハンドピースホース(ペリオ用)
 - パウダーハンドピース(ペリオ用)
 - バリオス2ハンドピース(ライト付)
 - ハンドピースコード
 - VCPボトル400 mL
 - 水フィルター
 - フットコントロール(ハンガー付)
 - スケーリング用チップ3本
 - 滅菌ケース
 - ペリオメイトパウダー(160 g × 1本)
 - ペリオメイトノズルチップ(40本)
 - ペリオメイトノズルリムーバー
- 他付属品

仕様

- ユニット寸法: W 225 × D 290 × H 162 mm(注水ボトル・チャンバー含む)
- ユニット重量: 2.6 kg(注水ボトル・各チャンバー除く)
- 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz
- 駆動周波数: 28-32 kHz
- 最大出力: 11 W

チタン製ハンドピース対象製品

ベーシックセット・ペリオセットのバリオス2ハンドピースがチタン製になります。

オプション



製品名	製品番号	標準価格
バリオスコンビ Pro プロフィーキット	Y1003771	¥165,000

キット内容

- チャンバー(プロフィー用)
 - ハンドピースホース(プロフィー用)
 - パウダーハンドピース(プロフィー用)
 - フラッシュバル(15 g × 5袋)
- 他付属品



製品名	製品番号	標準価格
バリオスコンビ Pro ペリオキット	Y1003042	¥185,000

キット内容

- チャンバー(ペリオ用)
 - ハンドピースホース(ペリオ用)
 - パウダーハンドピース(ペリオ用)
 - ペリオメイトパウダー(160 g × 1本)
 - ペリオメイトノズルチップ(40本)
 - ペリオメイトノズルリムーバー
- 他付属品



iCART-L

製品名	製品番号	標準価格
iCart-L	Z299	¥52,500

- 外寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
- 重量: 10 kg

バリオスコンビ Pro
プロモーション動画 ▶



バリオスコンビ Pro
超音波ハンドピース
メンテナンス動画 ▶



バリオスコンビ Pro
パウダーハンドピース
メンテナンス動画 ▶



Varios 970



スマートなデザインに、使える高機能を凝縮

操作性の高い大型LEDディスプレイ

パワー表示が10段階の数字とバーグラフで確認できる大型LEDディスプレイ。ボトル水量も10段階のバーグラフで確認することができます。また、直感的に操作できるアイコンキーで押し間違いなどを防止。



大容量ボトル

片手で簡単に着脱できる2つのボトルで、治療目的に合わせて消毒液や温水が使用できます。ボトルの容量は400 mLで、十分に注水時間を確保できチェアタイムの短縮にも繋がります。



オートクリーニング機能

注水回路を自動洗浄するオートクリーニング機能を搭載。消毒液使用后、ボトルに水を入れオートクリーニングキーを押すだけで、注水回路を自動的に洗浄します。



耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

チタン製の超音波スケーラーハンドピースをライト付バリオスシリーズ全てに搭載。チタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。



バリオス 970 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA970 LUX Ti	Y1500248	¥310,000
—	VA970	Y1500793	¥260,000

セット内容 ●コントロールユニット ●バリオス2ハンドピース(ライト付/ライト無し) ●ハンドピースコード
●フットコントロール(FC-70) ●スケーリング用チップ3本 ●水フィルターセット ●水供給用コネクター
●チップ交換レンチ(3個・CR-10) ●VAボトル(2本・400 mL) ●滅菌ケース 他付属品

仕 様 ●ユニット寸法: W 160 × D 270 × H 190 mm(ボトル含む) ●ユニット重量: 2.1 kg ●ボトル容量: 400 mL(× 2本)
●電源: AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数: 28-32 kHz ●最大出力: 11 W(Gモード時)

チタン製ハンドピース対象製品

ライト付セットのバリオス2ハンドピースがチタン製になります。

Varios 370



高性能を、よりシンプルに、コンパクトに

コンパクトボディ

軽量でコンパクトなボディは、場所を選ばずチェアユニットに設置できることが魅力です。コンパクトボディの中に「iPiezo engine®」を搭載し、パワフルかつ繊細なスケーリングが行えます。



設置例

取付け位置のバリエーションが広がる各種取付けホルダーを用意しています（一部オプション）。



アーム固定
コントロールユニットホルダー +
バリオス350 / 370用スタンド



テーブルマウント テーブルトップ
コントロールユニットホルダー



テーブル固定
コントロールユニットホルダー +
バリオス350 / 370用ステー

耐久性に優れたライト付チタン製ハンドピース

チタン製の超音波スケーラーハンドピースをライト付バリオスシリーズ全てに搭載。チタン製を採用することで、再生処理による耐久性を向上。ハンドピースの表面に独自のDURAGRIPコーティングを施すことで、滑りにくく、安定感のある快適な操作が可能になります。



バリオス 370 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VA370 LUX Ti	Y1500792	¥204,000
—	VA370	Y1500794	¥153,000

セット内容 ●コントロールユニット(ハンドピースコード付) ●バリオス370 / 370LUX ACアダプター
●バリオス2ハンドピース(ライト付 / ライト無し) ●コントロールユニットホルダー ●スケーリング用チップ2本
●ハンドピースホルダー ●フットコントロール(FC-71) ●水フィルターセット ●水供給用コネクター
●チップ交換レンチ(CR-10) 他付属品

仕様 ●ユニット寸法: W 80 × D 115 × H 32 mm (つまみとコード除く) ●ユニット重量: 430 g (ハンドピース除く)
●電源: AC 100 V 50/60 Hz ●発振周波数: 28-32 kHz ●最大出力: 11 W (Gモード時)


チタン製ハンドピース対象製品

ライト付セットのバリオス2ハンドピースがチタン製になります。

Ultrasonic Scaler Tips

チップの数だけ臨床の幅が広がります

口腔内の状況に合わせて選べる、豊富なチップラインナップ。

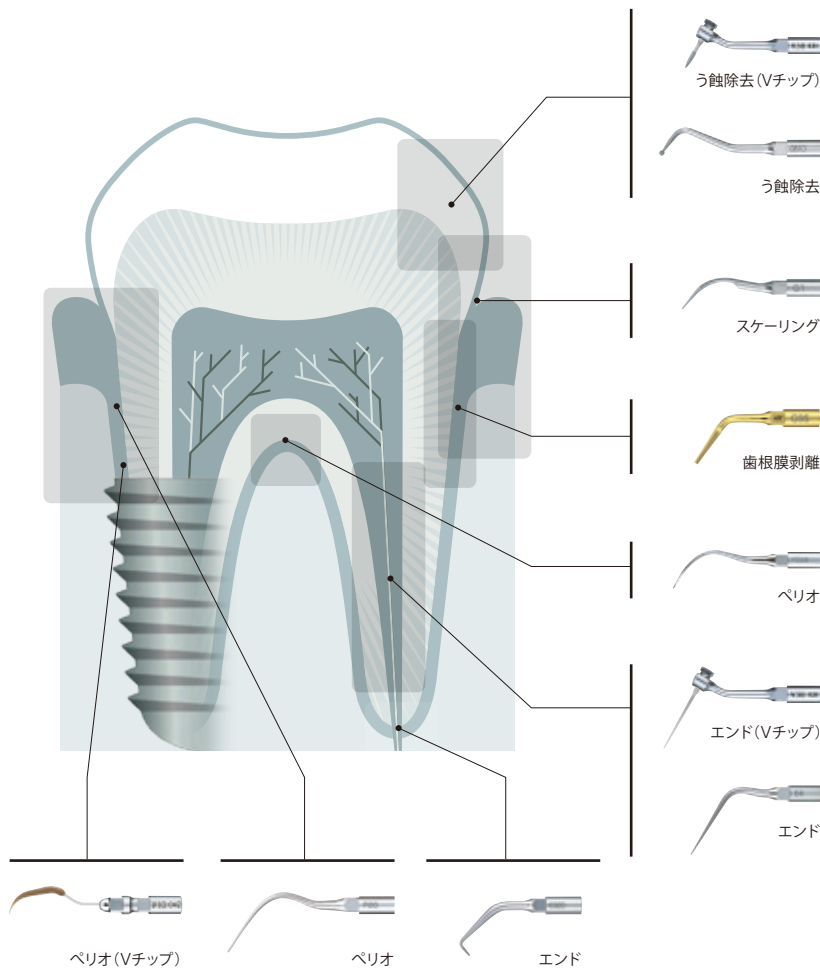

超音波スケーラーチップ

スケーリング/ペリオチップの断面・先端の種類と特長

パリオスチップは外観の違い以外にも断面形状や材質、表面の加工などに違いがあります。症例や付着物の状態に合ったチップを選択することで、歯面や軟組織にも効果的にご使用いただけます。

断面形状・チップ	チップ先端の材質	除石効果	歯質への優しさ	用途・内容
G1, G5, G6 G8, G9, G16	金属 鏡面加工	◎	△	歯肉縁上・縁下の除石
P1, P20, P21R/L, P25R/L	金属 鏡面加工	△	◎	歯肉縁上・縁下のステイン除去 バイオフィルム除去
P1D, P2D, P3D	金属 ダイヤモンド加工	○	○	歯肉縁下(隣接面・分岐部)の 除石
P10, P11R/L, P26R/L	金属 シャープエッジ	◎	△	歯肉縁下の除石
P40, P41	金属 先端側方2孔注水	×	◎	イリゲーション
V-P10, V-P11R/L V-P12, V-P26R/L	プラスチック	△	◎	補綴装置

スケーリング

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
G1	Z217101	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G2	Z217102	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G3	Z217103	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G4	Z217104	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G5	Z217105	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G6	Z217106	¥9,500



製品名	製品番号	標準価格
G8	Z217108	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G9	Z217109	¥9,500



製品名	製品番号	標準価格
G11	Z217411	¥8,400

スケーリング

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
G12	Z217412	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G13	Z217413	¥8,400



製品名	製品番号	標準価格
G16	Z217120	¥9,500

スケーリングチップ プラス1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。



製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG1パック	Y900501	¥42,000

●G1: 6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG4パック	Y900502	¥42,000

●G4: 6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG6パック	Y900503	¥47,500

●G6: 6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG8パック	Y1002163	¥42,000

●G8: 6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG9パック	Y1002164	¥47,500

●G9: 6本入

製品名	製品番号	標準価格
スケーリングG16パック	Y1003898	¥47,500

●G16: 6本入

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

☒ 熱水洗浄可能 135℃ オートクレーブ可能

☒ 熱水洗浄可能 135℃ オートクレーブ可能

ペリオ

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
P1	Z217404	¥9,000



製品名	製品番号	標準価格
P1D	Z217405	¥9,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
P2D	Z217402	¥9,000

●ダイヤモンドコーティング ●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P3D	Z217403	¥9,000

●ダイヤモンドコーティング ●左湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P10	Z217410	¥9,000

●シャープエッジ



製品名	製品番号	標準価格
P11R	Z217408	¥9,000

●シャープエッジ ●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P11L	Z217409	¥9,000

●シャープエッジ ●左湾曲タイプ

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

ペリオ

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
P20	Z217420	¥9,000



製品名	製品番号	標準価格
P21R	Z217422	¥9,000

●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P21L	Z217421	¥9,000

●左湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P25R	Z217424	¥9,000

●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P25L	Z217425	¥9,000

●左湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P26R	Z217426	¥9,000

●シャープエッジ ●右湾曲タイプ



製品名	製品番号	標準価格
P26L	Z217427	¥9,000

●シャープエッジ ●左湾曲タイプ

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

ペリオ

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
P40	Z217550	¥6,600

●チップφ0.6mm ●2孔注水



製品名	製品番号	標準価格
P41	Z217555	¥6,600

●チップφ0.8mm ●2孔注水

ペリオチップ プラス1パック

チップ6本を、5本分の価格でご購入いただけます。



製品名	製品番号	標準価格
ペリオP10パック	Y900504	¥45,000

●P10:6本入

製品名	製品番号	標準価格
ペリオP20パック	Y900505	¥45,000

●P20:6本入

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

ペリオ(Vチップ)

プラスチック素材を使用しているため、補綴装置・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。超音波スケーラーならではのスピーディーな施術は、患者さまへの負担も軽減します。

Perio-Control



製品名	製品番号	標準価格
V10	Z217041	¥5,600

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- プラスチックチップ別売

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
V-P10	Y900184	¥3,000

- 3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P12	Y1002167	¥3,200

- 3本入 ●V10ホルダー別売



最後臼歯遠心部



前歯部の薄い歯肉

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)



ペリオ(Vチップ)

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
V-P11R	Y1002165	¥3,200

- 右湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11L	Y1002166	¥3,200

- 左湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P26R	Y1002168	¥3,200

- 右湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P26L	Y1002169	¥3,200

- 左湾曲 ●3本入 ●V10ホルダー別売



マージン部や歯冠隅角



インプラント体から
補綴装置への移行部

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)



エンド

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
E4	Z217428	¥7,600

- 根管洗浄・異物除去用

製品名	製品番号	標準価格
E4D	Z217528	¥9,000

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口拡大・根管洗浄用

製品名	製品番号	標準価格
E5	Z217305	¥7,600

- ドライ仕様
- 充填用

製品名	製品番号	標準価格
E6	Z217306	¥7,600

- ドライ仕様
- 充填用

製品名	製品番号	標準価格
E7	Z217307	¥7,600

- ドライ仕様
- 充填・除去用

製品名	製品番号	標準価格
E7D	Z217317	¥9,000

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口拡大・根管洗浄用

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

エンド

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
E8	Z217308	¥7,600

- ドライ仕様
- 充填・除去用

製品名	製品番号	標準価格
E8D	Z217318	¥9,000

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口拡大・根管洗浄用

製品名	製品番号	標準価格
E15D	Z217319	¥10,000

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口の探索、根管内の形成用

※E5, E6, E7, E7D, E8, E8Dのチップは付属のEチップ用レンチをご使用ください。


断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

エンド



製品名	製品番号	標準価格
E11	Z217031	¥10,000

- Uファイル用ホルダー(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用 ●Eチップ用レンチ付属
- 120°アングル ●ファイル別売

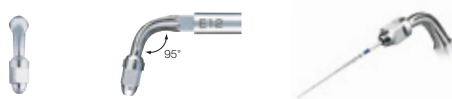

製品名	製品番号	標準価格
E12	Z217032	¥10,000

- Uファイル用ホルダー(φ0.8 mm)
- 根管洗浄用 ●Eチップ用レンチ付属
- 95°アングル ●ファイル別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33mm ISO 15	Y900062	¥1,600

- 6本入 ●ファイル用ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33mm ISO 20	Y900063	¥1,600

- 6本入 ●ファイル用ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33mm ISO 25	Y900064	¥1,600

- 6本入 ●ファイル用ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33mm ISO 30	Y900065	¥1,600


- 6本入 ●ファイル用ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
Uファイル 33mm ISO 35	Y900066	¥1,600

- 6本入 ●ファイル用ホルダー別売

使用時の取り付け長

	ISO 15	ISO 20	ISO 25	ISO 30	ISO 35
E11	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
E12	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm

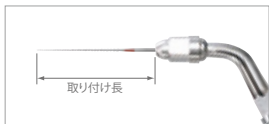

逆根管充填用窩洞形成

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
E30RD	Z217212	¥10,000

- ダイヤモンドコーティング
- 右曲がり



製品名	製品番号	標準価格
E30LD	Z217213	¥10,000

- ダイヤモンドコーティング
- 左曲がり



製品名	製品番号	標準価格
E31D	Z217210	¥10,000

- ダイヤモンドコーティング
- 先端角度70°



製品名	製品番号	標準価格
E32D	Z217211	¥10,000

- ダイヤモンドコーティング
- 先端角度90°

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

歯根膜剥離

チップ先端および両側面が鋭いエッジになっているので、チップを無理なく挿入することができます。このチップを使用して歯根膜を剥離することで歯槽骨を損傷するリスクが低くなります。

- ヘーベルなどと異なり、抜歯窩の窩壁の損傷を抑えます。
- 手用器具では挿入しにくいアングルからのアプローチができます。
- 薄いチップ先端形状と両側面の鋭いエッジ形状で高いアクセス性を実現しました。

残根抜歯(上顎左2番抜歯)

残根周囲歯槽骨を過剰に切削することなく歯槽骨形態を保持しながら抜歯することが可能です。



半埋伏歯(下顎左8番抜歯)

抜歯前の前処置として使用することで可動性が得やすくなるため埋伏歯の処置にも有効です。



※ヘーベルのように力を入れすぎないように注意してください。
写真提供：西川歯科クリニック(埼玉県川口市)

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
G95	Z217705	¥16,000

- チタンコーティング ●厚さ：0.7 mm
- 3方向がシャープな両刃

断面形状：チップ先端より1 mmの形状(原寸の3倍)

う蝕除去



製品名	製品番号	標準価格
G61D	Z217601	¥12,600

- ダイヤモンドコーティング
- チップ先端 ø1.2 mm



製品名	製品番号	標準価格
G62D	Z217602	¥12,600

- ダイヤモンドコーティング
- チップ先端 ø1.6 mm

V-TIP System

エンド(Vチップ)


う蝕除去 P112-113

- う蝕除去用
- 形態修正・研磨用



エンド P111

- 根管洗浄用
- 根管拡大・形成用

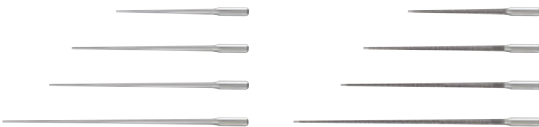

V30
120°アングル

ペリオ P98-99

- メンテナンス用(補綴装置)

Perio-Control



V10
ストレート



- 根管洗浄用 17 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- 根管洗浄用 23 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- 根管洗浄用 26 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- 根管洗浄用 32 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売

製品名	製品番号	標準価格
V-S50	Y900169	¥4,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S51	Y900170	¥4,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S52	Y900171	¥4,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S53	Y900172	¥4,300



※ステップを作りにくくするため、先端部1mmの部分にはダイヤモンドコーティングを施してありません。

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 17 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 23 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 26 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

- ダイヤモンドコーティング
- 根管拡大・形成用 32 mm ●3本入
- Vチップホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-S50D	Y900173	¥6,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S51D	Y900174	¥6,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S52D	Y900175	¥6,300

製品名	製品番号	標準価格
V-S53D	Y900176	¥6,300

う蝕除去(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売



製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- V30ホルダー別売




製品名	製品番号	標準価格
V-G71	Y900119	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- V30ホルダー別売




製品名	製品番号	標準価格
V-G72	Y900120	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- V30ホルダー別売

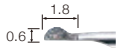

製品名	製品番号	標準価格
V-G75	Y900121	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- V30ホルダー別売

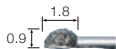

製品名	製品番号	標準価格
V-G76	Y900122	¥3,700


- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- V30ホルダー別売

形態修正・研磨(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
V30	Z217030	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売

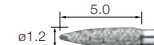


製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- レギュラー ●3本入 ●V30ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-G78	Y900166	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- ファイン ●3本入 ●V30ホルダー別売

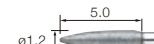

製品名	製品番号	標準価格
V-G79	Y900167	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- スーパーファイン ●3本入
- V30ホルダー別売

チップキット



ペリオ

製品名	製品番号	標準価格
ペリオキット A	Y900144	¥36,000

セット内容

- P1D, P2D, P3D, P10: 各1本入
- チップホルダー付属



ペリオ

製品名	製品番号	標準価格
ペリオキット B	Y900145	¥27,000

セット内容

- P20, P25R, P25L: 各1本入
- チップホルダー付属



ペリオ

製品名	製品番号	標準価格
ペリオコントロールチップ スターターキット	Y1002606	¥9,000

セット内容

- V10ホルダー
- V-P11R, V-P11L, V-P12, V-P26R, V-P26L: 各1本入
- Eチップ用レンチ付属




エンド

製品名	製品番号	標準価格
エンドキット E11	Y900146	¥16,400

セット内容

- E11(120°)
- Uファイナル33 mm ISO15, ISO20, ISO25, ISO30, ISO35: 各6本入
- Eチップ用レンチ付属

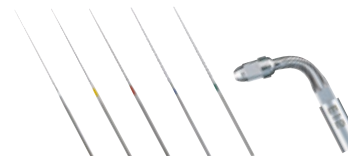

エンド

製品名	製品番号	標準価格
エンドキット E12	Y900147	¥16,400

セット内容

- E12(95°)
- Uファイナル33 mm ISO15, ISO20, ISO25, ISO30, ISO35: 各6本入
- Eチップ用レンチ付属



逆根管充填用窩洞形成

製品名	製品番号	標準価格
レトロキット	Y900149	¥40,000

セット内容

- E30RD, E30LD, E31D, E32D: 各1本入
- チップホルダー付属

Prophy-Mate neo



恋スル白イ歯を創る、プロフィーメイト neo

ツインノズルでパワフルな噴射力を持続

ナカニシ独自のツインノズルにより、パワフルかつなめらかでパウダーロスの少ない安定した噴射を実現。高い噴射持続力とポリッシング能力で、チェアタイムを短縮しながら効率的な成果が得られます。



クリーニング前



クリーニング後



※結果を保証するものではありません。

操作性に優れた2種類のノズル

長くて小さいノズルは、患者さま・術者の負担を軽減。頬側では必要以上にハンドピースで口唇を広げることなく、舌側では広い術野の確保が可能です。また、ノズルの角度は前歯部に適した60°と臼歯部に適した80°があり、施術箇所に応じて使い分けることで、クリーニング効果を最大限に発揮します。



指先で簡単に回せるハンドピース

スリムでくるくる回せるハンドピースは、使用角度の調整が行いやすく、無理な挿入角度や姿勢をとらずに施術が行えます。



ワンタッチ着脱

カップリングへの接続、ハンドピース接続のいずれもワンタッチで簡単に着脱できます。



Prophy-Mate neo

歯面清掃用ハンドピース



ノズル60°、ノズル80°



対応カップリング	製品名	製品番号	標準価格
NSK カップリング	PMNG-PTL-P	Y135029	¥159,000
モリタαメインチューブ	PMNG-MR-P	Y1001297	¥159,000
ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみ) ご使用いただけます	PMNG-YS-P	Y1001968	¥159,000
オサダファインジョイント	PMNG-FJ-P	Y1001954	¥159,000
KaVo® Multiflex®	PMNG-KV-P	Y135030	¥159,000
Sirona® Quick coupling	PMNG-SR-P	Y135031	¥159,000

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

セット内容

- プロフィーメイト neo ハンドピース(ノズル60°、ノズル80°付) ●パウダーケース
- パウダーケースカバー予備1個 ●フラッシュパール(15g入)×5袋 ●プロアーノズル ●リングレンチ
- 掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイル、掃除用ブラシ ●タービン用オイル

プロフィーメイト neo
メンテナンス動画



ハンドピースは全て熱水洗浄可能



135℃ オートクレーブ可能

FLASH pearl

- 主成分：炭酸カルシウム
- 平均粒子径54 μm

製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール	Y900698	¥19,500

- 300g × 4本



製品名	製品番号	標準価格
フラッシュパール (100袋入)	Y900693	¥24,500

- 15g × 100袋



SOFT pearl

- 主成分：グリシン
- 平均粒子径65 μm
- 仕上げ研磨なしで単体使用が可能

製品名	製品番号	標準価格
ソフトパール	Y1500721	¥21,800

- 250g × 4本



Perio-Mate



美しく健康な歯を創る、ペリオメイト

効率的で、歯にも優しいプロケア

使用中のチェアユニットにワンタッチで接続が可能なハンディータイプ、パウダーメンテナンスを既存設備のまま手軽に導入できます。粉詰まりのリスクが少ない、パウダー経路が短くシンプルな構造。スピーディーで効果的なバイオフィルムの除去ができます。




パウダー流量調整が可能

口腔内の状況に応じてパウダー流量の調整が手で簡単に行えます。調整リングを指先で回すだけでパウダー流量を調整可能。リングを絞ることによりパウダーを止めることができ、患部の洗浄も行えます。




360°回せるハンドピースとノズルチップ

ハンドピースとノズルチップは指先で容易に回すことが可能。隣在歯や豊隆部などの影響を受けにくく、ノズルチップを歯面に沿わせることができます。ノズルチップを回すことで、効果的な噴射位置を保つことができ、無理な使用角度での挿入・操作が減少します。

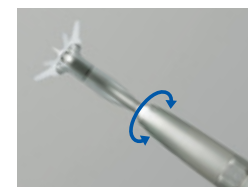

狭い口腔内でも操作が容易なスリムノズル

スリムノズルは狭い口腔内でも広い作業域と、高い視認性を実現。細長いノズル形状は、頬粘膜や口唇の干渉を受けにくくなっています。アクセスが困難な部位へのアプローチもスムーズに行え、ノズルチップの挿入向きを妨げません。また、臼歯部の歯間などハンドピースの挿入が難しい部位でも広い視野を確保することができます。

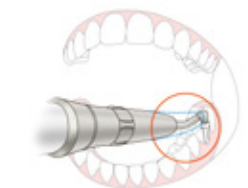

Perio-Mate

歯面清掃用ハンドピース



対応カップリング	製品名	製品番号	標準価格
NSK カップリング	PER-PTL-P	Y1003009	¥180,000
モリタαメインチューブ	PER-MR-P	Y1002661	¥180,000
ヨシダクイックジョイント (ライト付ヨシダタイプジョイントのみ ご使用いただけます)	PER-YS-P	Y1002663	¥180,000
オサダファインジョイント	PER-FJ-P	Y1002664	¥180,000
KaVo® Multiflex®	PER-KV-P	Y1003010	¥180,000
Sirona® Quick coupling	PER-SR-P	Y1003011	¥180,000

使用中はライトが点きません(ライト付カップリング使用の場合)

セット内容

- ペリオメイトハンドピース ●パウダーケース ●パウダーケースカバー予備
- ペリオメイトパウダー(160g入×1本) ●ペリオメイトノズルチップ(40本)
- ペリオメイトノズルチップリムーバー ●プロアノズル ●リングレンチ
- 掃除用ワイヤー(大・小)、掃除用ファイル、掃除用ブラシ ●タービン用オイル

ペリオメイト
メンテナンス動画



ハンドピースは全て熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Perio Mate Powder

- 主成分：グリシン
- 平均粒子径25 μ m
- 仕上げ研磨なしで単体使用が可能
- 歯周ポケットに使っても滞留しにくい高い水溶性で、象牙質やセメント質よりも柔らかいモース硬度です。

製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトパウダー	Y900938	¥9,000

- 160g×2本



Perio Mate Nozzle Tip

- 患者さまごとに交換できるディスプレイタイプ
- 滅菌済みのため開封直後に使用可能

製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトノズルチップ	Y1002741	¥6,500

- 40本入



Powder Maintenance

パウダーメンテナンス



パウダーメンテナンスの使い分け

歯面清掃用器具	部位	対象	使用パウダー・粒子
歯肉縁上のパウダーメンテナンス（プロフィール用） Prophy-Mate neo  	 縁上	天然歯	 FLASH pearl (炭酸カルシウム)  SEM画像 (x150) 平均粒子径 54μm
		補綴装置* (SOFT pearlのみ)	 SOFT pearl (グリシン)  SEM画像 (x150) 平均粒子径 65μm
歯肉縁上・縁下のパウダーメンテナンス（ヘリオ用） Varios Combi Pro   	 縁上 (歯肉辺縁)	天然歯	 Perio Mate Powder (グリシン)  SEM画像 (x150) 平均粒子径 25μm
		補綴装置	 縁下 (歯周ポケット)


*露出した象牙質、エナメル質のう蝕、コンポジットレジン及び金の詰め物には直接噴射しないこと。[それらの表面に傷をつける恐れ]

FLASH pearl

- 主成分：炭酸カルシウム
- 平均粒子径 54 μm

【使用ポイント】

- ・ノズルは歯面表面に対して3~5mm離し、10~60°の角度で使用してください。噴射時は球体状粒子のパウダーを歯面に転がすイメージで行います。
- ・術後は新たな着色予防や歯面を滑らかにすることを目的に、粒度の細かいペーストとラバーカップを使用し、低速回転で仕上げ研磨することをお勧めいたします。

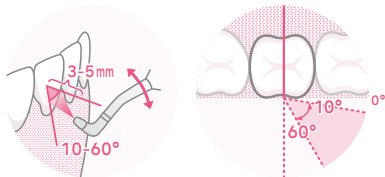

- 300g × 4本




- 15g × 100袋

SOFT pearl

- 主成分：グリシン
- 平均粒子径 65 μm
- 仕上げ研磨なしで単体使用が可能

【使用ポイント】

- ・ノズルは歯面表面に対して3~10mm離し、30~90°の角度で使用してください。軽度から中程度のステイン除去に効果を発揮します。

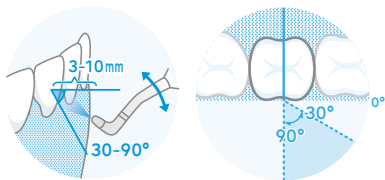

- 250g × 4本

Perio Mate Powder


- 主成分：グリシン
- 平均粒子径 25 μm
- 仕上げ研磨なしで単体使用が可能
- 歯周ポケットに使っても滞留しにくい高い水溶性で、象牙質やセメント質よりも柔らかいモース硬度です。

製品名	製品番号	標準価格
ペリオメイトパウダー	Y900938	¥9,000

- 160g × 2本


【使用ポイント】 歯肉縁上・歯肉辺縁

- ・[歯肉縁上の軽微なステインの除去] ノズルを歯面に対して5~10mm離し、30~60°の角度で使用してください。小さく円を描くように動かします。
- ・[歯肉辺縁（歯周ポケット内3mm未満程度まで）のバイオフィルムの除去] ノズルを歯肉辺縁に向け、歯面に対して5~10mm離し、30~60°の角度で使用してください。歯面全体に噴射するようゆっくり動かします。

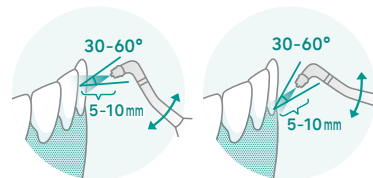

【使用ポイント】 歯肉縁下(歯周ポケット)

- ・[歯周基本治療を行った6mm未満の歯周ポケット内バイオフィルムの除去] ノズルチップを3mm以上の歯周ポケット位置までゆっくり挿入してください。ポケット数値に応じて挿入する深さを調節してください。ノズルチップはパウダーの噴射方向に沿って横方向に移動させながら、縦方向に往復するように動かしてください。(同一の歯周ポケット内での噴射は最大5秒)

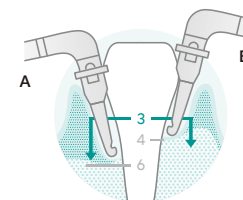

A : PPD 6mm未満の場合
B : PPD 4mmの場合


Ti-Max S970



幅広いケアに対応するエアーケーラーの進化形


安定した振動をチップに供給

S970シリーズはチップに対する負荷が大きくなってもパワーが落ちにくく※、この安定性が効果的な施術を可能にします。また、エアーケーラーは電磁波を発生しないことから、ペースメーカーなど、使用する機器に制限のある患者さまにも安心して使用できます。

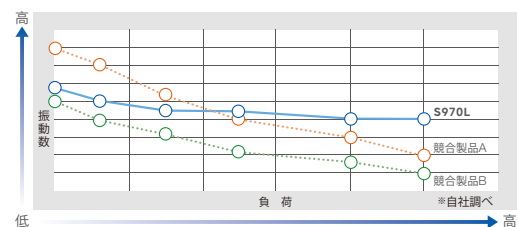

口腔内における操作性と視野の確保を追求

S970シリーズのスリムなボディーは、届きにくい最後臼歯遠心部等へのアクセスを容易にし、施術のストレスを軽減。さらに効率的な施術を実現することでチェアタイムを短縮し、術者に優しく、患者さまにも優しい治療を実現します。

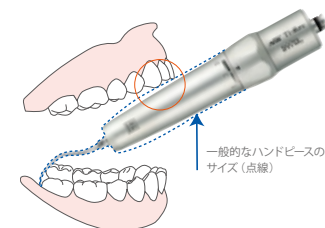

パワーコントロール機能

S970シリーズ独自のパワーコントロール機能は3段階で出力調節ができ、症例に応じた最適なパワー設定が可能です。



用途	使用チップ	パワーレベル		
		1	2	3
スケーリング	S1, S2, S3	←→	←→	←→
ペリオ	S10, S20, S21R, S21L	←→	←→	←→
ペリオ (Vチップ)	S35+Vチップ (V-P10-A, V-P11R-A, V-P11L-A, V-P12-A)	←→	←→	←→
ソニックブラシ	S50+各種ブラシ (S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2)	←→	←→	←→
う蝕除去	S65D, S66D, S67D, S68D	←→	←→	←→
形成	S81D, S82D, S83D, S86D, S71D, S72D	←→	←→	←→
う蝕除去 (Vチップ)	S75+Vチップ (V-G70, V-G71, V-G72, V-G75, V-G76)	←→	←→	←→
	S75+Vチップ (V-G77, V-G78, V-G79)	←→	←→	←→
エンド (Vチップ)	S75+Vチップ (V-U15, V-U20, V-U25, V-U30, V-U35)	←→	←→	←→

上記パワーレベルは目安です。症例に応じて低いレベルからご使用ください。

Ti-Max S970



チタン製ボディー & DURACOAT
ガラスロッドライト
3段階パワー調整可能



標準付属
チップ3種 (S1, S2, S3)、
チップカバー (L)、
チップ交換レンチ (CR-20)

NSK バテラスカップリング	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970L	T1005	¥186,000
	—	S970	T1020	¥146,000
モリタαメインチューブ	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970ML	T1017	¥186,000
ヨシダクイックジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970YL	T1035	¥186,000
オサダファインジョイント	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970FL	T1036	¥186,000
KaVo® Multiflex®	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970KL	T1013	¥186,000
Sirona® Quick coupling	ライト	製品名	製品番号	標準価格
	●	S970SL	T1015	¥186,000




Air Scaler Tips

チップの数だけ臨床の幅が広がります

口腔内の状況に合わせて選べる、豊富なチップラインナップ。

エアースケーラーチップ

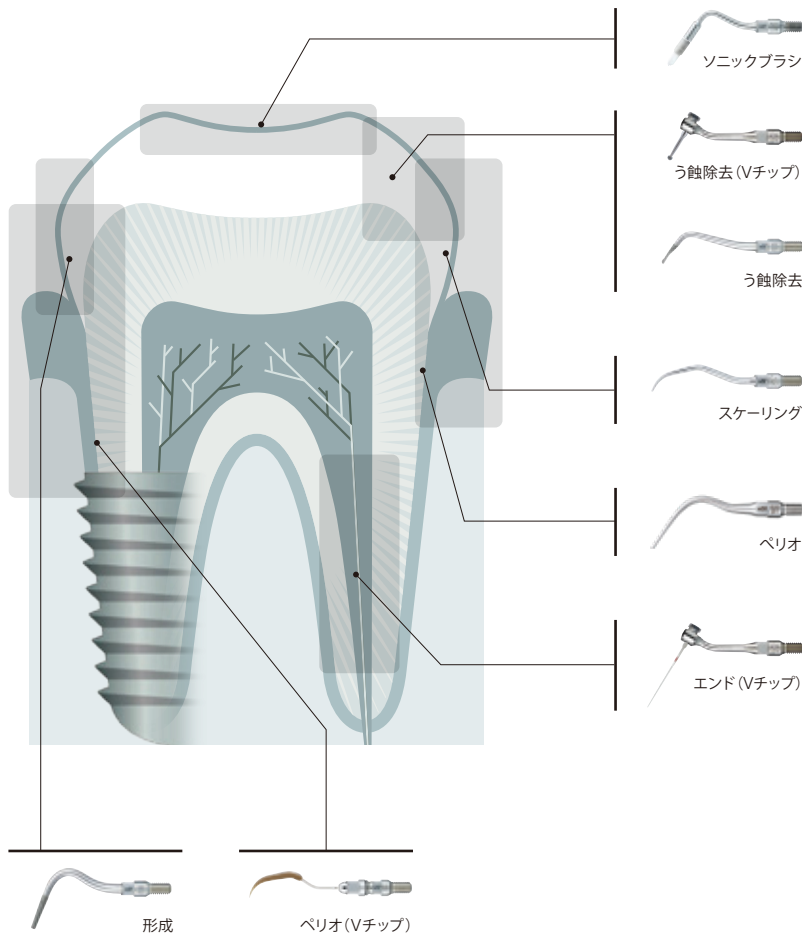

スケーリング

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
S1	Z252411	¥5,800

●ユニバーサルタイプ



製品名	製品番号	標準価格
S2	Z252413	¥5,800

●シックルタイプ



製品名	製品番号	標準価格
S3	Z252412	¥5,800

●ペリオタイプ

- スケーリング/Vチップ(う蝕除去)以外は、S970/S950専用チップになります。
- パワー調整機能の付いていないハンドピース(S900など)ではご使用になれませんのでご注意ください。

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

ソニックブラシ

軟らかい樹脂製のブラシにより、歯質や補綴装置等を傷つけることなく効率的な清掃が可能です。



製品名	製品番号	標準価格
S50	Z252450	¥16,700

●ソニックブラシホルダー ●Eチップ用レンチ付属 ●ブラシ別売



製品名	製品番号	標準価格
S50-C1	Y900097	¥2,900

●コニカルブラシ(小) ●5個入
●S50ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
S50-F1	Y900099	¥2,900

●フラットブラシ(小) ●5個入
●S50ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
S50-C2	Y900098	¥2,900

●コニカルブラシ(大) ●5個入
●S50ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
S50-F2	Y900100	¥2,900

●フラットブラシ(大) ●5個入
●S50ホルダー別売

ソニックブラシセット



製品名	製品番号	標準価格
S50ソニックブラシセット	Y900096	¥28,000

セット内容 ●ソニックブラシホルダー
●S50-C1, S50-C2, S50-F1, S50-F2: 各5個入
●Eチップ用レンチ付属

ソニックブラシの使用例 写真提供: 貞光歯科医院(奈良県奈良市), モリカゲ歯科医院(埼玉県さいたま市)



シーラント接着前



矯正装置周囲



染出し後



補綴装置マージン部付近




補綴装置接着前の歯牙表面



アバットメント

ペリオ

断面形状

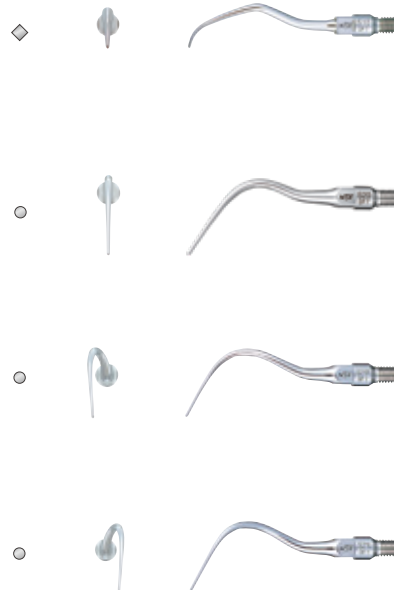

製品名	製品番号	標準価格
S10	Z252420	¥8,900

●ユニバーサルタイプ(スリムライン)

製品名	製品番号	標準価格
S20	Z252441	¥8,900

●ストレートタイプ

製品名	製品番号	標準価格
S21R	Z252442	¥8,900

●右湾曲タイプ

製品名	製品番号	標準価格
S21L	Z252443	¥8,900

●左湾曲タイプ

断面形状: チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

ペリオ(Vチップ)

プラスチック素材を使用しているため、補綴装置・修復物へのキズを最小限に抑えて付着物を除去することができます。

Perio-Control



製品名	製品番号	標準価格
S35	Z252015	¥5,600

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- プラスチックチップ別売

断面形状



製品名	製品番号	標準価格
V-P10-A	Y1002746	¥3,000

- 3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P12-A	Y1002749	¥3,200

- 3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11R-A	Y1002747	¥3,200

- 右湾曲 ●3本入 ●S35ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-P11L-A	Y1002748	¥3,200

- 左湾曲 ●3本入 ●S35ホルダー別売

エアスケラキット



製品名	製品番号	標準価格
ペリオコントロールチップ エアスケラキット	Y1002754	¥8,400

- セット内容
- S35ホルダー
 - V-P10-A, V-P11R-A, V-P11L-A, V-P12-A：各1本入
 - Eチップ用レンチ付属

断面形状：チップ先端より1mmの形状(原寸の3倍)

う蝕除去

先端が半球形のチップは歯頸部付近やコンタクト直下のう蝕除去、切端隅角部の調整に適しています。



製品名	製品番号	標準価格
S65D	Z252465	¥14,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S66D	Z252466	¥14,500

- ダイヤモンドコーティング




製品名	製品番号	標準価格
S67D	Z252467	¥14,500

- ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S68D	Z252468	¥14,500

- ダイヤモンドコーティング

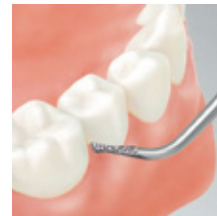

S65D

形成

トルベードシェイプチップは、ラミネートベニアなど隣接面マージンの最終形成に適しています。削りすぎや象牙質露出の危険性が少なく、隣接面においてより保存的な形成が可能となります。



製品名	製品番号	標準価格
S71D	Z252471	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S72D	Z252472	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング



クラウンエッジの仕上げ・位置決め



ラミネートベニア形成隣接面フィニッシングライン仕上げ

支台歯形成における概形成、軸面形成を回転切削器具で行った後の、フィニッシュラインの形成に適しています。回転切削器具だけでは除去できない微細な鋭縁など、フィニッシュラインを明確に仕上げることが可能です。



製品名	製品番号	標準価格
S81D	Z252469	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S82D	Z252462	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング




製品名	製品番号	標準価格
S83D	Z252461	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング



製品名	製品番号	標準価格
S86D	Z252460	¥16,000

●ダイヤモンドコーティング

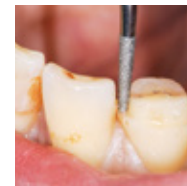


支台歯形成の最終仕上げ



J Shapeの除去



形成限界の明示

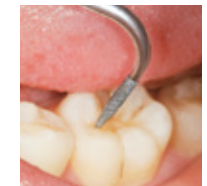

シーラント除去(再充填)

V-TIP System

エンド(Vチップ)

う蝕除去 P142-143

- う蝕除去用
- 形態修正・研磨用



エンド P141

- 根管洗浄用



S75
120°アングル

ペリオ P136

- メンテナンス用(補綴装置)

Perio-Control



S35
ストレート



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U15	Y900177	¥1,800

- Vファイル 23 mm ISO15 ●根管洗浄用 ●6本入
- S75ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U20	Y900178	¥1,800

- Vファイル 23 mm ISO20 ●根管洗浄用 ●6本入
- S75ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U25	Y900179	¥1,800

- Vファイル 21 mm ISO25 ●根管洗浄用 ●6本入
- S75ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U30	Y900180	¥1,800

- Vファイル 22 mm ISO30 ●根管洗浄用 ●6本入
- S75ホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-U35	Y900181	¥1,800

- Vファイル 23 mm ISO35 ●根管洗浄用 ●6本入
- S75ホルダー別売

う蝕除去(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売



製品名	製品番号	標準価格
V-G70	Y900118	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- S75ホルダー別売




製品名	製品番号	標準価格
V-G71	Y900119	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- S75ホルダー別売




製品名	製品番号	標準価格
V-G72	Y900120	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- S75ホルダー別売

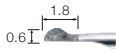

製品名	製品番号	標準価格
V-G75	Y900121	¥3,700

- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- S75ホルダー別売

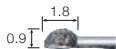

製品名	製品番号	標準価格
V-G76	Y900122	¥3,700


- ダイヤモンドコーティング ●3本入
- S75ホルダー別売

形態修正・研磨(Vチップ)



製品名	製品番号	標準価格
S75	Z252035	¥12,000

- Vチップホルダー ●120°アングル
- Eチップ用レンチ付属 ●先端チップ別売

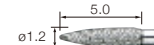


製品名	製品番号	標準価格
V-G77	Y900165	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- レギュラー ●3本入 ●S75ホルダー別売



製品名	製品番号	標準価格
V-G78	Y900166	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- ファイン ●3本入 ●S75ホルダー別売

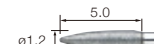

製品名	製品番号	標準価格
V-G79	Y900167	¥4,300

- ダイヤモンドコーティング
- スーパーファイン ●3本入 ●S75ホルダー別売

iProphy

コードレスで、
歯面研磨をもっと自由に、
スムーズに



軽くて持ちやすい

人間工学に基づいて設計・開発されたエルゴノミックデザイン。軽くて持ちやすく、バランスに優れたハンドピースは、比較的時間のかかる歯面研磨でも、手にかかる負担を軽減します。

超ミニヘッドで見やすい

細くて長い超ミニヘッドは、口腔内での広い視野を確保。よりスムーズで正確な治療を可能にします。



パワーコントロールがラクラク

パワー調整が手元ででき、フットでの微妙なパワーコントロールが不要。通常のコントラアングルでは難しい低速回転の維持も楽に行えます。また、すべての回転域で安定したパワーをキープします。

ヘッドラインナップ



- プロフィー用
- スクリュー式



- プロフィー用 ●ラッチ式
- コントラバー用(φ2.35)



- 上下運動ヘッド
- エパチップ用

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4 : 1	iFX57	C1102	¥25,800
ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 4 : 1	NAC-F4R	Y110020	¥28,000
ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1 : 1	EVA-F	Y110016	¥24,500

iProphy 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iProphy 標準セット	Y1002819	¥100,500

セット内容

- iProphy モータハンドピース ●iFX57ヘッド
- iProphy スタンド ●ACアダプター

iProphy サブセット(ヘッド無し)

製品名	製品番号	標準価格
iProphy サブセット	Y1003438	¥74,000

セット内容

- iProphy モータハンドピース ●iProphy スタンド ●ACアダプター






ENDODONTICS



ENDO-MATE TC2

広がる視野

ミニヘッドとスリムなネックのコントラアングルを採用することで、広い視野を確保できます。

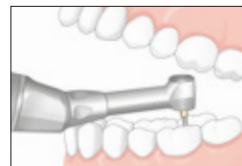


安全性に配慮した機能

- 負荷が変化しても回転速度を一定に保つフィードバック回路を採用。
- 無負荷の状態が10分連続くと、誤作動防止のためのオートパワーオフ機能が作動。


プログラム機能による治療効率の向上

プログラム機能は、選択された回転速度、トルク、ギア比、オートリバースモードの組み合わせを5パターンまでメモリーすることが可能です。

▼プログラム設定パネル

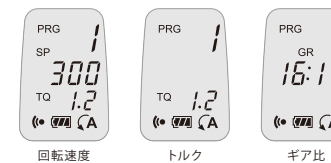

ファイル破折のリスクを大幅に軽減する充実のアラーム機能

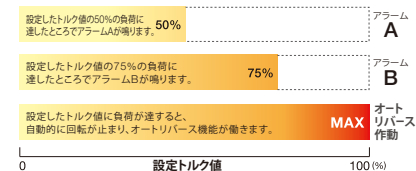

エンドメイト TC2 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 標準セット	Y1001444	¥138,500

セット内容

- MP-F16R ヘッド ●エンドメイト TC2 モーター
- TC2用充電器

エンドメイト TC2 サブセット(ヘッド無し)

製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 サブセット	Y1001445	¥102,000

セット内容

- エンドメイト TC2 モーター ●TC2用充電器

仕様 ●最高回転速度：9,000 min⁻¹ ●充電時間：1.5時間 ●連続使用時間：1.2時間
※電池の充電容量によって、連続使用時間が変化することがあります。

ENDO-MATE TC2 用ヘッド & モーター

エンドメイト TC2用 ヘッド

- プッシュボタン式チャック ●ミニヘッド ●360°回転 ●Ni-Tiファイル用(φ2.35)



減速	製品名	製品番号	標準価格
20:1	MP-F20R	Y110044	¥35,000
16:1	MP-F16R	Y110096	¥35,000



減速	製品名	製品番号	標準価格
20:1	MPAS-F20R	Y110046	¥46,000
16:1	MPAS-F16R	Y110098	¥46,000

- 根管長測定器接続用(シャンク長12 mm)

組み合わせにより広範囲な回転域とトルクをカバー

ギア比	トルク(Ncm)	回転速度(min ⁻¹)
4:1	0.1-0.7	500-2,250
10:1	0.2-2.2	200-900
16:1	0.3-3.0	140-550
20:1	0.4-4.0	100-450

エンドメイト TC2 モーター



製品名	製品番号	標準価格
エンドメイト TC2 モーター	E346	¥74,000

- 最高回転速度: 9,000 min⁻¹ ●トルクコントロール機能
- オートリバース機能



熱水洗浄可能
(エンドメイト TC2モーターは除く)



135℃ オートクレーブ可能
(エンドメイト TC2モーターは除く)

iPexII




根管長測定器

SmartLogicエンジン搭載の高精度根管長測定器

SmartLogicエンジンはナカニシ独自の「交互発振方式」と「面解析」により、根管内の様々な影響を最大限に排除したクリアな信号解析を行い、高精度な根尖孔検出を実現します。

- 2つの異なる周波数の交互発振方式を測定に採用し、信号解析に影響を与えるノイズの発生を抑え、フィルター回路を通す必要の無い精度の高い波形の抽出を実現。
- 検出された周波数を面解析する独自の方式を採用。様々な状況が想定される根管内に対して、安定した測定値解析を実現し、ファイル挿入との確かな運動感をもたらします。

見やすい3色カラーLCD

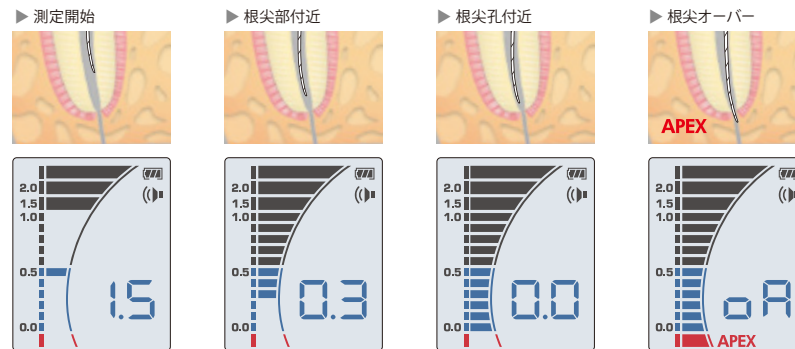

ナカニシのエンドモーターとiPex IIとの組み合わせにより、正確で早い根管治療をサポートします。



iPex II 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iPex II 標準セット	Y1002210	¥106,000

セット内容 ●コントロールユニット ●iPex IIプローブ(1.8 m) ●iPex IIファイルクリップ(3本) ●リップフック(3本)
●単4電池(3本) ●iPex IIテスター

仕様 ●寸法: W 60 × D 60 × H 86 mm ●ユニット重量: 76 g(単4電池含まず)
●連続使用時間: 60時間(アルカリ電池使用時) ※連続使用時間は設定条件により異なります。

The image features a series of horizontal bands in a vibrant blue color, separated by white bands. Within the blue bands, the dark silhouettes of various dental instruments are visible, including what appears to be a handpiece, a control knob, and a long, thin tool. The overall aesthetic is clean and professional.

MOBILE DENTISTRY

VIVA ace

デンタルワークに、フットワークを。

もっと快適で高度な、訪問歯科診療のために

加速する高齢化社会、訪問診療のニーズはますます高まっています。また高齢者の残存歯数も増加し、訪問先においても幅広い治療が求められています。ビバエースは、多目的に使用できる高性能マイクロモーターや超音波スケーラーなど、診療室と変わらない治療環境をコンパクトに凝縮。軽量で女性でも持ち運びやすく、訪問先での設置も簡単。これまでになかった高度な機動性で、より快適な訪問歯科診療をサポートします。



軽量 & コンパクトボディ



診療室と変わらない高機能システム



セッティング・撤収も簡単スピーディー



軽量 & コンパクトボディ

取り回しやすい軽量8.6 kg。車への積み降ろしや階段の昇り降り、狭い場所もラクに通れるコンパクトサイズ。訪問先から訪問先への移動も容易です。基本性能を落とさず、一つ一つの部品を徹底してコンパクト・軽量化し、このサイズと軽さを実現しました。

オールインワンパッケージ

マイクロモーター、超音波スケーラー、3wayシリンジ、パキューム機能をコンパクトボディに集約。また、全ての付属品を収納する事ができます。

高さ
28.4 cm

奥行き
29.8 cm

幅 46.2 cm





診療室と変わらない高機能システム

視認性に優れた大型液晶パネルと、各インストルメントの性能により、高い効率性と機能性を実現。診療室と変わらない治療環境を提供します。

歯科治療機器をコンパクトなボディに凝縮



※写真にはオプション製品が含まれています。

フットコントロールシステム

ドクター1人体制の診療に
Syncモードにより、モーター・スケーラーとバキュームのON / OFFがひとつのフットコントロールで操作できます。

ドクター+歯科衛生士 2人体制の診療に
モーター・スケーラーのON / OFFと、バキュームのON / OFFを2つのフットコントロールで操作。2つを組み合わせることで、ドクターはモーター・スケーラーの操作だけに専念できます。



モーター・スケーラー・バキューム



モーター・スケーラー

バキューム

高機能マイクロモーター エンド治療にも幅広く対応



NLX plus

高トルク、スムーズな回転、高い静寂性

	回転速度 (min ⁻¹)	トルク値 (Ncm)
一般切削モード	1,000~40,000	4.0
エンドモード	100~5,000	0.3~3.0

多目的超音波スケーラー 多彩なチップラインナップ



Varios2 Lux

ナカニシ独自のiPiezoエンジン搭載
硬い歯石や柔らかい歯石など、歯面の状態に合わせて、チップ先端に適正なパワーを供給。取れにくい歯石にも安定したスケーリングが可能です。

3way シリンジ



軽量、シンプル操作の3way シリンジ。シリンジノズルが簡単に着脱可能。

バキューム



手元で一時的な吸引停止が可能なバルブレバー付き。

オプション



製品名	製品番号	標準価格
isoE-LUX	Z1265	¥36,500




製品名	製品番号	標準価格
吸引歯ブラシキット	U1144089	¥30,000

●チューブ付(10キット)



VIVA ace
プロモーション
動画

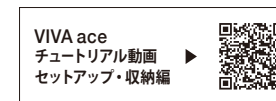

VIVA ace
チュートリアル動画
セットアップ・収納編



VIVA ace
チュートリアル動画
機能編



VIVA ace
チュートリアル動画
メンテナンス編




セッティング・撤収も簡単スピーディー

訪問診療先での設置と撤収が、短時間で簡単に行えるので効率的です。


ホルダーバーとホルダーアームは、4段階の調整が可能です。

OPEN

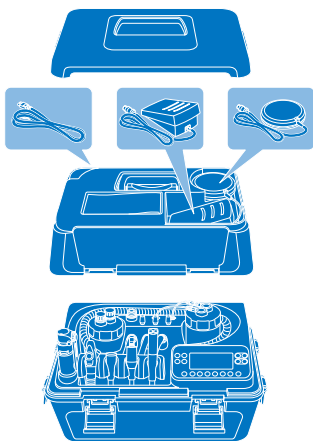

床に触れるパーツはカバー部分に別収納なので衛生的

SET UP

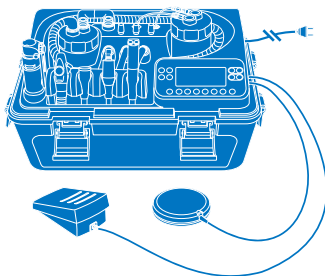

COMPLETE




収納も簡単

ハンドピースを外して、スッキリ収納



お手入れもラクにできる

MAX
51.6 cm

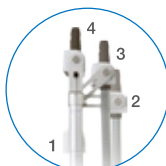

高さ・角度4段階調整
立位、座位など、様々なポジションに合わせて調整可能

VIVA ace



製品名	製品番号	標準価格
ビバエース コンプリートセット	Y1003571	¥1,058,000

セット内容

- ビバエース ベーシックセット ●ビバエース モーターキット
- ビバエース スケラーキット

仕様(コントロールユニット)

- 寸法: W 462 × D 298 × H 284 mm ●総重量: 8.6 kg[®]
- 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz ●電源入力: 130 VA
- ※ハンドピース類を外した重量



製品名	製品番号	標準価格
ビバエース ベーシックセット	Y1002903	¥745,000

セット内容

- コントロールユニット ●ACコード ●トップケース
- フットコントロール(FC-76S, FC-70S)
- V-ace/バキュームホースセット(ホース/バルブ付)
- V-ace/バキュームボトルセット ●バキュームノズル(10本)
- V-ace注水ボトルセット ●V-ace3wayシリンジセット
- V-aceショルダーベルト

製品名	製品番号	標準価格
ビバエース モーターキット	E1040002	¥156,500

セット内容

- モーター NLX plus ●モーターコード
- モーターキャップ ●プロテクションプラグ

製品名	製品番号	標準価格
ビバエース スケラーキット	E351006	¥156,500

セット内容

- バリオス2ハンドピース(ライト付) ●スケラーコード
- スケールチップ2本 ●チップ交換レンチ ●チップホルダー

VIVA Q

軽量・静音で安定した吸引量の
ポータブルバキューム



「VIVAシリーズ」より、訪問歯科診療用バキュームVIVA Qが誕生

“VIVA Q”は、訪問歯科診療における様々な施術、メンテナンス～治療まで、幅広く使用可能です。実際に訪問歯科診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングして作られたこの“VIVA Q”は静音・軽量で女性の方でも持ち運びが容易です。

ご自身にあった使用環境での必要なオプション品の組み合わせが可能です。

軽量・静音で安定した吸引量の
ポータブルバキューム

- ・スムーズに移動が可能な重量
- ・静かなバキューム音
- ・安定した吸引量

重量
2.9 kg



3段階に調節可能なホルダ（オプション）

オプションのホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことが可能です。ホルダは3段階の高さに調節可能です。



ナカニシ独自のバキュームボトル構造

独自の構造により、泡を吸引してしまっても[※]、コントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

※発泡剤含有の歯磨剤は使用しないでください。歯磨剤が泡立つとコントロールユニット内部に入り込み、故障の原因となります。

水検知センサーを搭載

万一、コントロールユニット内部へ液体が浸入した際、吸引モーターを停止させる水検知センサーを搭載。独自のバキュームボトル構造と、水検知センサーにより2段階で故障の原因となるコントロールユニット内部への液体の浸入を防ぎます。

VIVA Q



ビバQ 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
ビバQ 100V	Y1004133	¥172,000

セット内容

- コントロールユニット ●バキュームボトルセット
- バキュームホースセット ●バキュームノズル(10個)
- 洗浄アダプター ●電源コード

仕様 (コントロールユニット)

- 寸法: W 191 × D 328 × H 244 mm
- 総重量: 2.9 kg (コントロールユニット、ボトルセット、ホースセット)
- 電源: AC 100-240 V 50/60 Hz ●電源入力: 120 VA
- 吸引圧力: 6.0-10.0 kPa ●空気流量: 120-150 L/min

オプション


ホルダセット

ホルダセットを使用することで、バキュームノズルを使いやすい位置に置くことができます。ホルダは3段階の高さに調節可能です。



製品名	製品番号	標準価格
ホルダセット	U1173050	¥8,700

- ホルダ、ボール(2本)、ボール台座

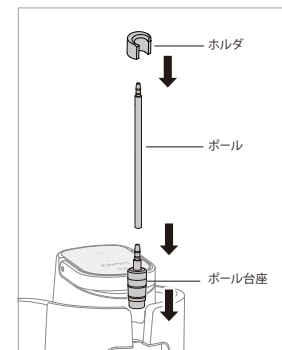

オプション

移動に便利なキャリングバッグ

ビバQ標準セットと訪問診療に必要なグッズなどを簡単に収納できます。訪問診療を行う歯科医師、歯科衛生士の声をヒアリングし、収納にこだわった機能的な仕様を実現しました。



ポケット部などに
収納可能



製品名	製品番号	標準価格
ビバQ キャリングバッグ	U1173100	¥29,000

- 寸法: W 280 × D 395 × H 265 mm



(イメージ)

ある歯科衛生士の訪問診療時の準備セットの一例

※ナカニシではこのセットの製造・販売は行っていません。

フットコントロール

バキューム機能の作動 / 停止は、フットコントロールでも行えます。手元の操作に集中でき、施術の幅が広がります。未使用時は、キャリングバッグの内側サイドに収納でき、衛生的です。



製品名	製品番号	標準価格
FC-70S	Z1008004	¥7,000

吸引歯ブラシ

コンパクトなヘッドと長くて安定感のあるハンドルは、高いアクセス性と操作性を実現します。



製品名	製品番号	標準価格
吸引歯ブラシキット	U1144089	¥30,000

- チューブ付(10キット)

VIVAMATE G5

訪問歯科診療用 携帯型マイクロモーターユニット



デンチャー調整から本格治療まで携帯型LEDマイクロモーター

訪問歯科診療用に開発された小型マイクロモーターは148 g (モーターコード含む)の軽量ボディにLEDライトを内蔵。携帯性を維持しながら機能を充実させることで幅広い治療に対応します。



バッテリー駆動と通常電源駆動が可能なコンパクトなコントロールユニット

電源の全くない場所でも、バッテリー駆動でどこでも使用できます。充電不足の時は、電源が近くで取れば、そのまま通常電源により使用できるので、安心して訪問先へ持って行けます。サイズは、手のひらサイズ (W 72 × D 180 × H 36 mm) のコントロールユニットで、しかも重量はわずか370 g。簡単に持ち運べます。

フットコントロール(オプション)

踏み込む深さに応じて回転数のコントロールが可能なフットコントロールは、本体のコントロールパネルの操作に気を取られず、治療に集中できる環境を提供します。



キャリングケース

「ビバメイト G5」本体とその付属品がきれいに収まる専用キャリングケースが付属。



ビバメイト G5 標準セット


製品名	製品番号	標準価格
VIVAMATE G5	Y1001344	¥157,000

セット内容

●コントロールユニット ●ハンドピーススタンド ●ライト付モーター(モーターコード付) ●ACアダプター ●キャリングケース

仕様

コントロールユニット ●寸法: W 72 × D 180 × H 36 mm ●重量: 370 g ●バッテリー充電時間: 約2時間
●バッテリー連続駆動時間: 約1時間(定格負荷) ※バッテリーの充電時間や連続駆動時間は使用環境により変化します。
マイクロモーター ●寸法: φ22 × L 68.6 mm ●重量: 148 g (モーターコード含む) ●回転速度: 3,000-30,000 min⁻¹
●トルク: 3 Ncm (30,000 min⁻¹回転時)

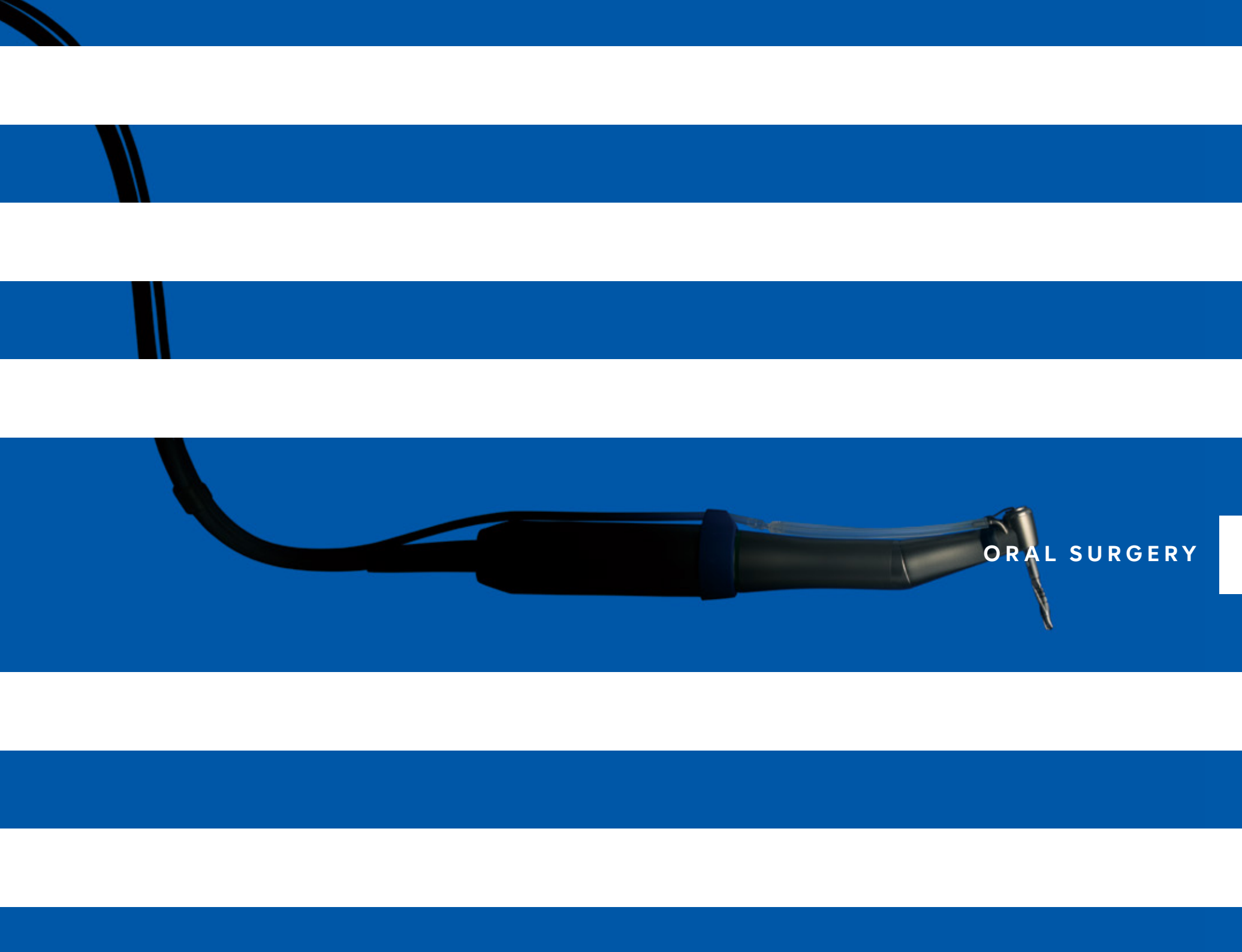

ORAL SURGERY

Surgic Pro2 × VarioSurg 3



SYNERGY IN IMPLANTOLOGY

Surgic Pro2 × VarioSurg 3 が生み出すシナジー効果

口腔外科用マイクロモーターシステム“Surgic Pro2”と、超音波ボンサージェリーシステム“VarioSurg 3”の2つのシステムを、ワイヤレス接続により、1台のフットコントロールで操作可能です。それぞれのシステムを共通のインターフェイスでコントロールし、そのシナジー効果で多様な術式に対応。インプラント治療の効率が上がります。また、クリニック環境の煩雑化を避け、よりスマートな診療を実現。すでにどちらか1台を所有している場合も、設備の拡張が簡単に行えます。一体型と比べ、コストの面でも導入しやすくなっています。

2つのシステムを簡単にシームレスにつなげる 「Bluetooth®接続」



コンパクトなリンクモジュールを使用することでVarioSurg 3とのBluetooth®接続が可能になります。また、専用リンクスタンド 2を使用することで最小限のスペースで2つのシステムを設置することができます。

1つのフットコントロールで2つのデバイスを制御



Surgic Pro2とVarioSurg 3をBluetooth®接続することで、2つのユニット操作を1つのフットコントロールで操作することが可能になります。設定も操作も簡単に切り替えが可能で、スムーズな作業と院内スペースの効率化にも寄与します。

視認性と操作性に優れた大型液晶パネル



ディスプレイの調光を10段階で調整可能な大型のバックライト付きLCDパネルを採用することで、視認性が向上しました。

*当機能を使用するには、Surgic Pro2他、弊社指定の口腔外科用マイクロモーターシステム（別売品）とリンクセット（別売品）が必要です。



Surgic Pro2

GO BEYOND

従来より高く評価されている口腔外科用マイクロモーターシステム「Surgic Pro」は、動作性、安全性、ワイヤレスによるネットワークの拡張性を兼ね備え、「Surgic Pro2」へ進化しました。Surgic Proの基本性能を向上させるだけでなく、さまざまなデバイスとの接続により、術者の操作性と安全性が向上し、効率の良い施術をサポートします。

3つの進化ポイント

OPERABILITY

SAFETY

WIRELESS
EXTENSIBILITY

OPERABILITY

術者のニーズを最優先しSurgic Proの操作性をさらにアップグレード。




操作性の向上とコンパクトで新しいモーター

ナカニシ独自のマイクロモーター技術により、従来と比べ、モーターのサイズと重量を大幅に削減しました。モーターが小さくなり、重心がよりハンドピースのヘッドに近くなったことで、ハンドリングがしやすくなり、治療時の操作性が大幅に向上しました。

長さ 20.4 mm 小型化^{※1}

重さ 11g 軽量化^{※1}

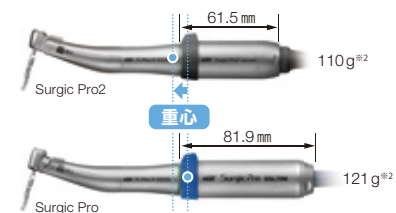

※1 従来品と比べ

※2 モーターコードを除く

ミニヘッドで様々なサージカルガイドに対応可能な標準セットのハンドピース

標準セットのハンドピースは従来品よりヘッドサイズが約2mm小さくなりました*。これにより、ドリリング時のサージカルガイドにも十分対応可能です。

また、術者の視野が大きく確保でき、口腔内へのアクセス性も大きく向上。さらに、患者の開口時の負担を大きく軽減することが可能となり、快適な施術をサポートします。

*標準セットハンドピース ライト付：X-SG20ML ライト無：SG20M



視認性と操作性に優れた大型液晶パネル

ディスプレイに調光を10段階で調整可能な大型のバックライト付きLCDパネルを採用することで、視認性が向上しました。また、直感的でわかりやすいアイコンにより、スムーズな操作が可能です。高感度タッチパネルにより、手術用のグローブを使用しているときでもストレスなく操作できます。



視認性が向上した高演色LED

高演色LEDを使用することで、治療中の血液や歯肉の視認性が向上します。



静かでスムーズな新設計のイリゲーションポンプ

新設計のイリゲーションポンプは、静かで安定した注水を実現します。イリゲーションチューブのセットアップもシンプルで簡単に行えます。




SAFETY

施術で要求される正確なトルク値を維持するAHC(Advanced Handpiece Calibration)機能と、ISQ測定器「Osseo 100+」を組み合わせることで、インプラント治療をより安全に進めることが可能になります。



正確なトルク補正による、安全な治療をサポート

ナカニシ独自のハンドピースキャリブレーション機能(AHC: Advanced Handpiece Calibration)により、施術で要求される正確なトルク値を出力します。使用するハンドピースのベアリングやギア摩耗状況により、実際に出力されるトルク値と設定したトルク値の間にズレが生じます。このAHC機能はこのズレを補正し、正しいトルク値を維持します。

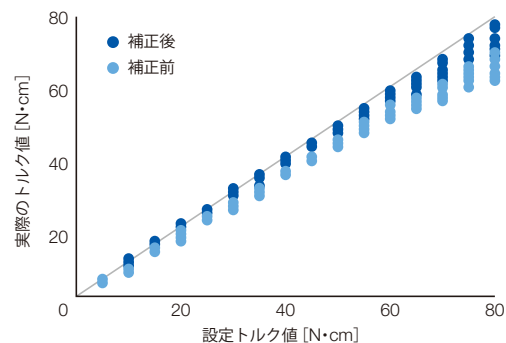

WIRELESS EXTENSIBILITY

様々なデバイスとのワイヤレス接続により、インプラント治療の数値データの管理ができ、シームレスで効率的な治療をサポートします。



ISQ値測定器「Osseo 100+」とのリンク

ISQ測定器「Osseo 100+」は、ISQ値を簡単な手順で測定でき、インプラント荷重時期の計画を立てることができます。また、Bluetooth®を使用することでSurgic Pro2と接続することが可能です。さらにSurgic Pro2を介してiPadと接続することで、測定されたISQ値を、iPadに表示しデータの共有や管理、保管することが可能です。測定するインプラント体をiPad上で選択し、それぞれ測定することにより、部位毎に分けて測定データを管理することが可能です。



※ 歯別に計測する際はiPad上で選択し、それぞれ計測することで、歯毎のデータ管理が可能です。

超音波ボンサージェリーシステム「VarioSurg 3」とのリンク

Surgic Pro2は、リンクモジュールを使用することで、ナカニシの超音波ボンサージェリーシステム「VarioSurg 3」と簡単にBluetooth®リンクすることができます。それにより、2つのユニット操作を1つのフットコントロールで操作することが可能になります。


簡単な操作で2つのシステムを切り替えることができ、スムーズに作業を行うことが可能です。



iPadとのリンク

iPadに専用アプリケーションをインストールし、Surgic Pro2と接続することで、回転速度やトルク値などの詳細なデータをリアルタイムで表示し、そのデータを保存することもできます。

また、Surgic Pro2を介し、Osseo 100+に接続すると、ISQ値のデータを保存することも可能になります。

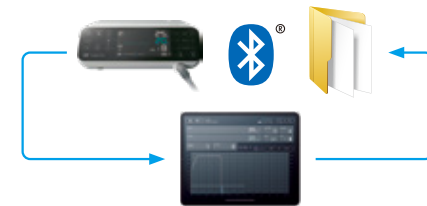

ワイヤレスフットコントロールとのリンク

Bluetooth®接続により、ケーブルの長さを気にせずに最適な位置を選択できます。フットコントロールは前モデルより軽量化され、位置変更が容易。IPX8の耐水性もあり、術者は治療に専念することができます。フットコントロールの上部にある3つの選択ボタンは術者の用途に合わせてカスタマイズ*できる仕様となっています。電池残量が少なくなると、コントロールユニットの液晶パネルのフットコントロール表示箇所が点滅してお知らせします。

*出荷時は「注水量選択ボタン」、「プログラム選択ボタン」、「回転方向選択ボタン」の設定となっております。



※ 出荷時は「注水量選択ボタン」、「プログラム選択ボタン」、「回転方向選択ボタン」の設定となっております。

Surgic Pro2

標準セット



Surgic Pro2 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	Surgic Pro2 OPT	Y1500356	¥754,000
—	Surgic Pro2 NON-OPT	Y1500357	¥592,000

セット内容

- コントロールユニット
 - SGL80M ライト付マイクロモーター
 - ワイヤレスフットコントロール
 - X-SG20ML ライト付ハンドピース(20:1減速)
 - イリゲーションチューブ(3本入)
- 他付属品

セット内容

- コントロールユニット
 - SG80M ライト無しマイクロモーター
 - ワイヤレスフットコントロール
 - SG20M ハンドピース(20:1減速)
 - イリゲーションチューブ(3本入)
- 他付属品

仕様

コントロールユニット(AHC機能付)

- 電源: AC 100-240 V 50 / 60 Hz
- 注水ポンプ最大出力量: 75 mL / min
- プログラム数: 8プログラム
- 寸法: W 245 × D 235 × H 90 mm
- 重量: 2.1 kg
- トルク: 5-80 Ncm

マイクロモーター

- 回転速度: 200-40,000 min⁻¹
- ライト: 高演色LED(ライト付きモーター)
- 重量: 0.2 kg(モーターコード含む)

ワイヤレスフットコントロール

- 電源: 単四電池3本
- 寸法: W 260 × D 185 × H 65 mm
- 重量: 1.1 kg(ハンガー含む)

オプション

リンクツール (Surgic Pro2 × VarioSurg 3)

コンパクトなリンクモジュールを使用することでVarioSurg 3とのBluetooth®接続が可能になります。また、リンクスタンド 2を使用することで最小限のスペースで2つのシステムを設置することができます。



製品名	製品番号	標準価格
リンクモジュール	Z1402001	¥22,000

- リンクボックス
- リンクケーブル



製品名	製品番号	標準価格
リンクスタンド 2	Z1452001	¥16,200



キャリングケース

移動に便利なキャリングケースは、Surgic Pro2と周辺機器を収納できる専用設計。

製品名	製品番号	標準価格
Carrying Case (Surgic Pro2)	Y1500395	¥63,000

- 寸法: W 534 × D 427 × H 207 mm



iCart-L

本体と付属品を安全に設置できる移動式カート。

製品名	製品番号	標準価格
iCart-L	Z299	¥52,500


- 外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
- 重量: 10 kg

Surgic Pro2
プロモーション動画 ▶



Implant Handpieces

高トルク対応 分解式コントラ 80 Ncm

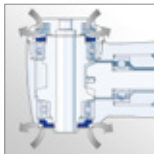

ダブルシーリングシステム

ナカニシ独自のダブルシーリングシステムは、ヘッド内部への異物の混入を上下2方向からブロック。血液や蛋白などのヘッド内部への流入を防ぎ、耐久性を飛躍的に向上させます。

簡単に分解・洗浄

X-DSG20シリーズは本体をワンタッチで簡単に分解でき、内部に固着した血液や蛋白を徹底的に洗浄する事ができます。また、ナカニシ独自のピンロック機能が術中の誤分解を防ぎます。

Ti-Max X-DSG20L 分解式



- 最高回転速度：2,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURACOAT
- ガラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック
- ダブル注水(センター、外部)
- ダブルシーリングシステム
- 最大トルク：80 Ncm



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 20:1	●	X-DSG20L	C1068	¥172,500
	—	X-DSG20	C1067	¥148,500

新設計ミニヘッド：操作性が大幅に向上したインプラント用コントラアングル

Ti-Max X-SG20ML



- 最高回転速度：2,000 min⁻¹
- ミニヘッド
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- ガラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック
- ダブル注水(センター、外部)
- ダブルシーリングシステム
- 最大トルク：80 Ncm



従来品よりもヘッドの高さを2mm小型化しました。臼歯部など施術が困難な部位においても、スムーズにアプローチできます。

S-Max SG20M

- 最高回転速度：2,000 min⁻¹
- ミニヘッド
- ステンレス製ボディー
- プッシュボタン式チャック
- ダブル注水(センター、外部)
- ダブルシーリングシステム
- 最大トルク：80 Ncm



従来品よりもヘッドの高さを2mm小型化しました。臼歯部など施術が困難な部位においても、スムーズにアプローチできます。



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 20:1	●	X-SG20ML	CA13030001	¥155,500



ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
減速 20:1	—	SG20M	CA13020001	¥131,500

Implant Handpieces

Ti-Max X-SG93L



- 最高回転速度：120,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- ガラスロッドライト(X-SG93L)
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- 3点注水スプレー ●外部注水
- FGバー用(ø1.6)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:3	●	X-SG93L	C1004	¥149,500
	—	X-SG93	C1007	¥113,500

Ti-Max X-SG65L



ストレートハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- ガラスロッドライト(X-SG65L)
- クリーンヘッドシステム ●外部注水
- ハンドピースバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X-SG65L	H1009	¥134,500
	—	X-SG65	H1038	¥100,000

Ti-Max X-SG25L



- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- ガラスロッドライト
- プッシュボタン式チャック
- クリーンヘッドシステム ●外部注水
- コントラバー用(ø2.35)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	●	X-SG25L	C1011	¥134,500

Ti-Max Z-SG45L



- 最高回転速度：120,000 min⁻¹
- チタン製ボディー & DURAGRIP
- アンチヒーティングシステム
- セラミックボールベアリング
- ガラスロッドライト(Z-SG45L)
- クリーンヘッドシステム
- プッシュボタン式チャック
- 3点外部注水スプレー
- FGバー用(ø1.6 / 20-25 mm)

ギア比	ライト	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:3	●	Z-SG45L	C1107	¥151,500
	—	Z-SG45	C1108	¥115,500

Implant Handpieces

SGM-ER20i



ラッチ式超ミニヘッド

- 最高許容回転速度：1,000 min⁻¹

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 20:1	SGM-ER20i	Y110127	¥106,000

SGMS-ER20i



着脱が簡単な調整幅8 mmと12 mmの2種類のストッパー。



ラッチ式超ミニヘッド (ストッパー付)

- 最高許容回転速度：1,000 min⁻¹

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 20:1	SGMS-ER20i	Y110147	¥117,000

- 最高許容回転速度以降の表記は、ヘッド(バー)が示す速度を表わしています。



熱水洗浄可能



オートクレーブ可能

Micro Surgery Handpieces



ストレートハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	SGS-ES	H264	¥96,000



ストレートハンドピース

- 最高回転速度：80,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:2	SGS-E2S	H266	¥117,000



20°アングルハンドピース

- 最高回転速度：40,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
等速 1:1	SGA-ES	H263	¥131,500




20°アングルハンドピース

- 最高回転速度：80,000 min⁻¹
- リング式チャック
- サージカルバー用(φ2.35)

ギア比	製品名	製品番号	標準価格
増速 1:2	SGA-E2S	H265	¥153,000

●最高回転速度以降の表記は、ヘッド(バー)が示す速度を表わしています。


下顎枝からの自家骨採取 (Micro Surgery Handpieces / Micro Saw Handpieces)

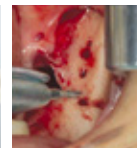

1 マイクロサージェリーハンドピース(20°アングル / SGA-ES)を使用した骨採取部位の明示。

ボンサージェリー用バー[®]を装着し、採取骨の外形を点で形成。この時、骨に熱傷を与えないように注意が必要。

※ナカニシでは取り扱っておりません。

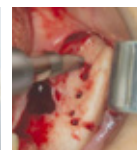


2 マイクロソー レシプロ (SGR2-E)を使用した下顎枝前縁部の骨切り。

前後動を利用し骨溝を形成していく。ブレードが薄いので骨損失が非常に少ない。(刃厚 0.35 mm)



3 マイクロソー レシプロ (SGR2-E)を使用した下顎枝外側部の骨切り。

頬側部の深い位置まで容易に骨切りが可能。

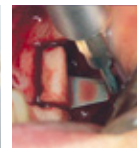

4 マイクロソー オシレート (SGO2-E)を使用した下顎枝外側下縁部の骨切り。

ブロックの底部を注意深く分離する。90°アングルなので頬粘膜を損傷することなく容易に分離することができる。

資料提供：横浜口腔インプラントセンター・木津歯科 センター長
東京歯科大学 オールラメディシン・口腔外科学講座 臨床講師 木津康博 先生

Micro Saw Handpieces

レシプロ



- 1.8 mm前後動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.2 : 1	SGR2-E	SH162	¥184,000

オシレート



- 17°左右動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.3 : 1	SGO2-E	SH164	¥236,500

サジタル



- 3°左右動
- 外部注水ノズル付



ギア比	製品名	製品番号	標準価格
減速 3.2 : 1	SGT2-E	SH163	¥218,400

※各種ブレードは別売りです。

SGR-E レシプロ用ブレード

製品名	製品	製品番号	標準価格
SGR-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900072	¥17,000
SGR-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900073	¥18,000
SGR-3	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900074	¥19,000

SGO-E オシレート用ブレード

製品名	製品	製品番号	標準価格
SGO-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174034	¥2,700
SGO-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174044	¥2,700
SGO-3	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174031	¥2,700
SGO-4	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.3 mm ● 1枚入 	H174041	¥2,700
SGO-5	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1枚入 	H174032	¥3,000
SGO-6	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1枚入 	H174042	¥3,000

SGT-E サジタル用ブレード


製品名	製品	製品番号	標準価格
SGT-1	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900075	¥17,000
SGT-2	<ul style="list-style-type: none"> ● 刃厚0.35 mm ● 1ケース10枚入 	Y900076	¥18,000

iSD900

施術スピードの向上と
正確なトルク



— トルクキャリブレーションシステム —

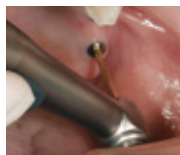

広い術野がもたらすスピーディーでハイクオリティの施術

両手による操作が求められる従来のハンドトルクレンチでは、術野確保のための頬粘膜排除などの作業が困難でした。iSD900では、片手で操作が可能のため、広い術野が確保でき、スピーディーで質の高い施術が可能です。

写真提供：ウエマツ歯科医院



施術の安全性を高めるTCS（トルクキャリブレーションシステム）

iSD900 独自のTCS（トルクキャリブレーションシステム）により、正確なトルク値による施術が可能です。術式に合わせた正確なトルクコントロールは、安全な施術に貢献します。



幅広い術式に対応するトルクレンジと3つの回転速度

10 Ncmから40 Ncmまでの幅広いトルクレンジを実現。術式に合わせて1 Ncm、もしくは5 Ncm単位でトルク値の調整・設定が可能です。また、回転速度は術式に合わせて3段階（15、20、25 min⁻¹）に設定でき、操作も非常にシンプルです。



iSD900 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
iSD900 標準セット	Y1001356	¥156,500

セット内容

- iSD900 モーターハンドピース ●iSD-HP コントラアングルヘッド
- iSD900用充電器 ●ACコード ●トルクキャリブレーター
- キャリブレーションバー ●ON / OFFスイッチレバー
- Fタイプスプレーノズル ●モーターキャップ

仕様

- 重量：148 g (iSD900モーターハンドピース + iSD-HPコントラアングルヘッド)
- トルク：10-40 Ncm (1 Ncm毎 / 5 Ncm毎)
- 回転速度：15、20、25 min⁻¹ ●充電時間：1.5時間
- 連続使用時間：1.2時間

※電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

VarioSurg 3



Trinity

超音波の性能を決める三位一体の優れたバランス

超音波サージェリーの切削効率や切れ味は、ワット数だけでは決まりません。重要なのはコントロールユニットの周波数コントロールと、ハンドピースの振動特性、そしてハイパワーに対応したチップ刃先の、「力率」と言われる三位一体のバランスです。“VarioSurg 3”ではこの3大要素のマッチングを最適化することで、より優れた超音波性能を引き出しました。



安定したパワーバランスで、より効率的な施術を実現

従来比50%のパワーアップ(Surgモード)を実現した最大出力は常に正確に制御され、切れ味の良いVarioSurgチップとの相乗効果により、効率的な施術とチェアタイムの短縮をサポートします。

※各チップの指定されたパワー以内でお使いください。

VarioSurg



最大パワー 従来比50%アップ

VarioSurg3



「フィードバック & オートチューニング機能」で常に安定した切削

フィードバック機能

術部の状況による負荷を自動的に感知することで適正なパワーをチップに供給。常に安定したパワーにより施術の効率を高めます。


オートチューニング機能

設定した出力値を常にチップの先端で発揮するために発振周波数を自動的にコントロール。設定した出力をチップ先端で再現し、連続使用においても理想的な振動状態を維持します。

VarioSurg 3 コントロールユニット


さらに進化したバーストモード

施術中でも切り替え可能なバーストモードは、一定の振動に対して周期的に小さな振動を与えることで、振動に変化を加え硬い皮質骨を切削する際に適した「ハンマー効果」を生み出します。3段階のバースト設定により、術式や骨の密度や硬さに応じたパワー選択ができます。

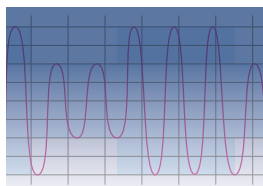

光量調整機能付きライト

術者の好みや施術環境により、シンプルなボタン操作でLEDハンドピースの光量を3段階に調整することができます。

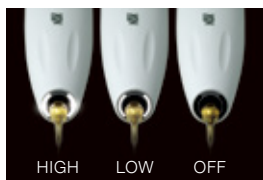

3つのモード切替

3つのモード切替が可能 (PERIO, ENDO, SURG)。骨切りから術後のメンテナンスまで、幅広い用途に使用できます。



選択可能な注水量

チップを効果的に冷却する最大75 mL / minの豊富な注水量を、チップの種類や口腔内の状況に合わせて5段階に選択可能。効果的な注水はチップ先端の発熱を抑え、骨細胞の熱的損傷等のリスクを軽減します。

施術内容や設定のメモリー機能

施術内容や使用するチップに応じた設定をプログラムごとにメモリー可能。設定したプログラムはプログラムボタンで簡単に呼び出せ、煩わしい操作は不要です。

VarioSurg 3 ハンドピース


スーパースリムなハンドピース

“スーパースリムデザイン”のLEDハンドピースは、高いアクセス性と視認性を実現。人間工学に基づく適正なバランスにより、術者の意思を忠実に反映し、正確な施術をバックアップ。手指への負担を最大限に軽減するデザインで、長時間の施術においても術者に負担を感じさせません。



ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VS3-LED-HPSC	E1133	¥281,000

●2 mコード付

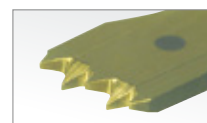

切れ味を追求した骨切削用 TiNコーティングチップ (骨切り用、骨切除・骨整形用、抜歯用)

チップの刃先を目立て処理することで切削力を高め鋭い切れ味を実現。先端の目詰まりも軽減します。

ユニットのパワーをロスなく伝え、発熱も抑えるハンドピース

ハンドピース内の振動子の素材、また振動子との結合部の連結方法にこだわり、ユニットからのパワーをできる限りロスなくチップに伝わるよう調整。ロスの表れである発熱もほとんどないことが、効率よくチップにパワーを伝えている証です。

LEDライトが正確な施術をサポート

自然光に近いナカニシのLEDライトは、術野を的確に照射し、正確な施術と施術時間の短縮をサポート。長時間の連続使用においても発熱しない高い安全性と、長寿命による経済性を併せ持ちます。また、独自のツインLEDライトは術野に影をつくりにくく、クリアな視野であらゆる施術をバックアップします。



VarioSurg 3

超音波ホーンサージエリ



パリオサージ 3 標準セット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VarioSurg 3 (100V)	Y1002724	¥1,026,000

- セット内容**
- コントロールユニット
 - LEDハンドピース(ハンドピースコード2 m)
 - FC-78フットコントロール
 - 滅菌ケース
 - ハンドピーススタンド
 - チップ(H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG17)
 - イリゲーションチューブ
 - チップホルダー
 - チップ交換レンチ
- 他付属品

仕様

- コントロールユニット**
- 寸法: W 265 × D 220 × H 103 mm(突起部を含まず)
 - 電源: AC 100 V 50/60 Hz
 - 発振周波数: 28-32 kHz
 - 注水量: 10-75 mL/min
 - プログラム数: SURG × 5, ENDO × 2, PERIO × 2
- フットコントロール**
- 寸法: W 250 × D 170 × H 50 mm
 - 重量: 1.5 kg(ハンガー・コード含む)


パリオサージ 3 フットコントロール無しセット

ライト	製品名	製品番号	標準価格
●	VarioSurg 3 (100V) Non FT	Y1002829	¥930,000

- セット内容**
- コントロールユニット
 - LEDハンドピース(ハンドピースコード2 m)
 - 滅菌ケース
 - ハンドピーススタンド
 - チップ(H-SG1, SG5, SG6D, SG7D, SG11, SG17)
 - イリゲーションチューブ
 - チップホルダー
 - チップ交換レンチ
- 他付属品

充実の機能を足元でコントロール

超音波のON/OFF、注水量の選択やプログラム選択が可能なフットコントロールは、ユニット操作のハンズフリー化を実現。付属のハンガーは手を使わずにフットコントロールを簡単に移動できます。

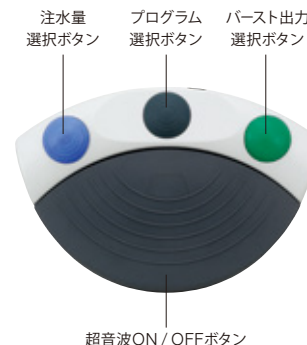


フットコントロール

製品名	製品番号	標準価格
FC-78	Z1102003	¥96,000

- 2 mコード付
- 寸法: W 250 × D 170 × H 50 mm
- 重量: 1.5 kg(ハンガー・コード含む)

滅菌ケース

ハンドピース、コード、チップ交換レンチなどの各パーツが簡単に収納できる滅菌ケースが付属します。

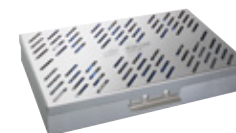

製品名	製品番号	標準価格
VA-SG-CASE	20001326	¥41,000

- 寸法: W 281 × D 171.5 × H 47 mm

オプション



キャリングケース

移動に便利なキャリングケースは、VarioSurgと周辺機器を収納できる専用設計。

製品名	製品番号	標準価格
パリオサージ 3用 キャリングケース	Y1002768	¥63,000

- 寸法: W 534 × D 427 × H 207 mm



iCART-L

本体と付属品を安全に設置できる移動式カート。

製品名	製品番号	標準価格
iCart-L	Z299	¥52,500

- 外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
- 重量: 10 kg

Ultrasonic Bone Surgery Tips

多様な術式に対応する豊富なチップラインナップ

骨切り用



拔牙用(歯根拔牙時骨切除用)



骨切り用(骨窓の開窓など)



粘膜剥離用



スクーリング用



逆根管充填窩洞形成用



骨切除・骨整形用



骨切り用(MAXI REACH)



ソケットリフト用



骨切削用(インプラント窩の前処置)



ペリオ用



ペリオ用(補綴装置のメンテナンス)

Perio-Control



骨切り用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 150%	H-SG1	Z305151	¥23,000

- チップ先端から3 mm、6 mm、9 mmにマーク入り
- 刃数：5、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG1A	Z305138	¥23,000

- チップ先端から3 mm、6 mm、9 mm、12 mm、15 mmにマーク入り
- 刃数：5、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG2R	Z305102	¥23,000

- 右湾曲[®] ●刃数：3、厚さ：0.6 mm
- チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG2L	Z305103	¥23,000

- 左湾曲[®] ●刃数：3、厚さ：0.6 mm
- チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 150%	H-SG8	Z305155	¥23,000

- チップ先端から3 mm、6 mm、9 mmにマーク入り
- 刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG8A	Z305139	¥23,000

- チップ先端から3 mm、6 mm、9 mm、12 mm、15 mmにマーク入り
- 刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 150%	H-SG8R	Z305156	¥23,000

- チップ先端から2 mm、4 mmにマーク入り(片面のみ)
- 右湾曲[®] ●刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 150%	H-SG8L	Z305157	¥23,000

- チップ先端から2 mm、4 mmにマーク入り(片面のみ)
- 左湾曲[®] ●刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

- パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。
- ※チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。
- チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

骨切り用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG14R	Z305122	¥23,000

- 右湾曲[®] ●刃数：5、厚さ：0.6 mm
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG14L	Z305123	¥23,000

- 左湾曲[®] ●刃数：5、厚さ：0.6 mm
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG19	Z305135	¥23,000

- チップ先端から3 mmにマーク入り
- 刃数：5、厚さ：0.8 mm ●チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG30	Z305137	¥18,500

- シャープエッジ ●最厚部：0.5 mm、最薄部：0.15 mm
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG58	Z305141	¥23,000

- チップ先端から3 mm、6 mm、9 mmにマーク入り(片面のみ)
- 刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG68	Z305143	¥23,000

- チップ先端から2 mm、4 mmにマーク入り(片面のみ)
- 刃数：3、厚さ：0.6 mm ●チタンコーティング

骨切除・骨整形用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG3	Z305104	¥18,500

- 先端と両サイドがシャープな片刃
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG4	Z305105	¥18,500

- 先端がシャープな両刃
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG5	Z305106	¥18,500

- 先端円周部がシャープな片刃
- チタンコーティング

抜歯用(歯根抜歯時骨切除用)



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG17	Z305132	¥18,500

- 厚さ：0.7 mm ●3方向がシャープな両刃
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG18R	Z305133	¥18,500

- 厚さ：0.7 mm ●3方向がシャープな両刃
- チタンコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG18L	Z305134	¥18,500

- 厚さ：0.7 mm ●3方向がシャープな両刃
- チタンコーティング

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップのLR (左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

●チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップのLR (左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

●チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

骨切り用(MAXI REACH)



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	M-RE2	Z305715	¥23,000

- チタンコーティング ●刃数：11、厚さ：0.6 mm



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	M-ST1	Z305713	¥44,500

- チタンコーティング ●刃数：3、厚さ：0.6 mm



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	M-OC1R	Z305709	¥44,500

- チタンコーティング ●右湾曲*
- チップ先端から2 mmにマーク有り ●刃数：3、厚さ：0.6 mm



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	M-OC1L	Z305710	¥44,500


- チタンコーティング ●左湾曲*
- チップ先端から2 mmにマーク有り ●刃数：3、厚さ：0.6 mm

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。


※チップのLR（左右）表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

●チップ先端の目盛りを目安に、強さを確認する事が出来ます。

M-RE2

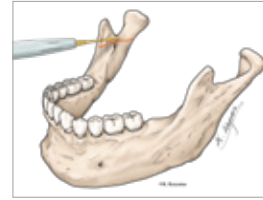


下顎枝矢状分割法(SSRO)
内側の水平骨切り

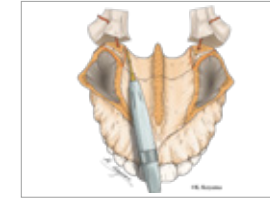

Le Fort I型骨切り術
下行口蓋動脈付近のトリミング


M-ST1

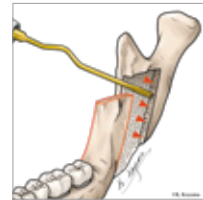


下顎枝矢状分割法(SSRO)
矢状分割時の皮質骨と海面骨の分離



M-OC1R / L

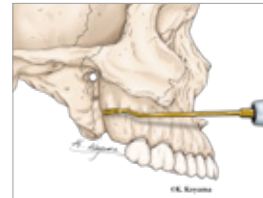

Le Fort I型骨切り術
翼突上顎縫合部の切離

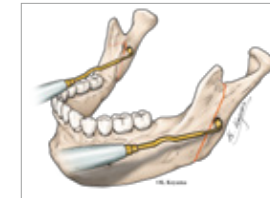

下顎枝矢状分割法(SSRO)
下顎枝垂直骨切り術(IVRO)
起始点・ガイドグループの付与



熱水洗浄可能




オートクレーブ可能

歯槽頂アプローチによる上顎洞底挙上術(ソケットリフト用)

外科的侵襲が少なく、短い施術時間でサイナスリフトを行うことが出来るソケットリフト法を、より安全に行えるチップ。超音波振動による骨切削はシュナイダー膜への損傷リスクを軽減。オステオトームによる槌打がないため、患者さんの不快感を軽減します。


ハリオサイチップ

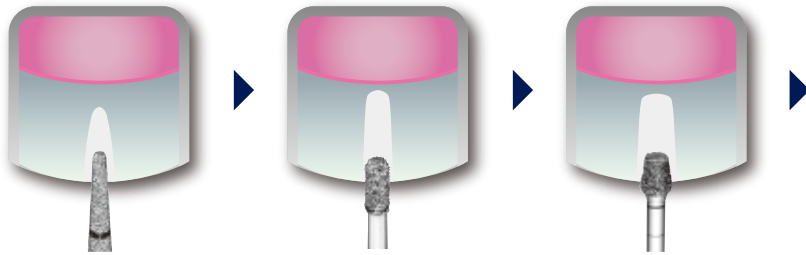

上顎洞底骨手前まで形成します。チップを押し込みすぎないように注意します。

深度ゲージを使うときと同じように、インプラント窩を探りながら形成します。

十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

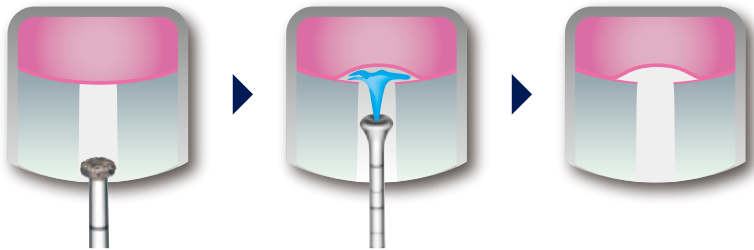

十分な注水下で形成します。注水量は3に設定します。チップ先端部のエッジ部分を使って、インプラント窩の窩底のエッジを切削します。チップを押し込みすぎますと、上顎洞粘膜に水圧がかかりますので、注意が必要です。チップ先端を円運動させるように小刻みに動かします。

十分な注水下で、確実に粘膜を挙上します。注水量は1に設定します。

上顎洞粘膜を挙上し、インプラント窩を形成します。

ソケットリフト用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SCL1	Z305170	¥27,000

●内部注水




パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SCL3	Z305172	¥27,000

●内部注水



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SCL5	Z305174	¥27,000

●内部注水

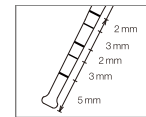

インプラント窩の深さはチップ先端の目盛りを目安に確認することができます。

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

ソケットリフト用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SCL11D	Z305201	¥27,000

●外部注水 ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SCL12D	Z305202	¥27,000

●外部注水 ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SCL13D	Z305203	¥27,000

●外部注水 ●ダイヤモンドコーティング




パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SCL14D	Z305204	¥27,000

●外部注水 ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SCL15D	Z305205	¥27,000


●外部注水 ●ダイヤモンドコーティング

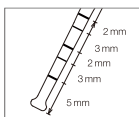

インプラント窩の深さはチップ先端の目盛りを目安に確認することができます。

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

ハンドインストゥルメント

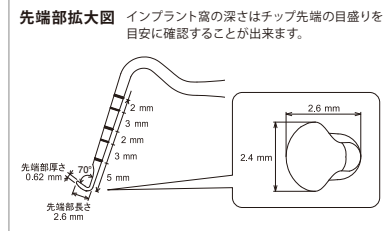

製品名	製品番号	標準価格
ソケットリフト ハンドインストゥルメント	Z305001	¥16,200

●全長168 mm

粘膜剥離用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG9	Z305110	¥14,500

●剥離、挙上用 角度90°



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG10	Z305111	¥14,500

●剥離、挙上用 角度135°



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG11	Z305112	¥14,500

●剥離、挙上用

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

骨切削用(インプラント窩の前処置)

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG15A	Z305124	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mmにマーク入り
- チップ先端径：0.7 mm ●ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG15B	Z305125	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mmにマーク入り
- チップ先端径：1.3 mm ●ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG15C	Z305126	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mm、12 mmにマーク入り
- チップ先端径：0.9 mm ●ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG15D	Z305127	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mm、12 mmにマーク入り
- チップ先端径：1.3 mm ●ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG16A	Z305128	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mmにマーク入り
- チップ先端径：2.0 mm ●ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG16B	Z305129	¥21,000

- チップ先端から5 mm、10 mmにマーク入り
- チップ先端径：2.6 mm ●ダイヤモンドコーティング

骨切り用(骨窓の開窓等)

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 80%	SG6D	Z305107	¥21,000

- ダイヤモンドコーティング

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	SG7D	Z305108	¥21,000

- ダイヤモンドコーティング

スケーリング用

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
SURG 50%	G1-S	Z305113	¥14,500

ペリオ用

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
PERIO 100%	P20-S	Z305114	¥14,500

- ストレート

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
PERIO 100%	P25R-S	Z305115	¥14,500

- 右湾曲[®]

パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
PERIO 100%	P25L-S	Z305116	¥14,500

- 左湾曲[®]

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

逆根管充填窩洞形成用



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
ENDO 50%	E30RD-S	Z305118	¥21,000

- 白歯部用(右曲がり) ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
ENDO 50%	E30LD-S	Z305119	¥21,000

- 白歯部用(左曲がり) ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
ENDO 50%	E31D-S	Z305120	¥21,000

- 前歯部・白歯部用(70°) ●ダイヤモンドコーティング



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
ENDO 50%	E32D-S	Z305121	¥21,000

- 前歯部用(90°) ●ダイヤモンドコーティング

ペリオ用(補綴装置のメンテナンス)

Perio-Control



パワーレベル	製品名	製品番号	標準価格
PERIO 100%	V10-S	Z305117	¥7,800

- Vチップホルダー ●Eチップ用レンチ付属
- プラスチックチップ別売

製品名	製品番号	標準価格
V-P10-S	Y1002772	¥3,000

- 3本入 ●V10-Sホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-P12-S	Y1002771	¥3,200

- 3本入 ●V10-Sホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-P11R-S	Y1002769	¥3,200

- 右湾曲[®] ●3本入 ●V10-Sホルダー別売

製品名	製品番号	標準価格
V-P11L-S	Y1002770	¥3,200

- 左湾曲[®] ●3本入 ●V10-Sホルダー別売

- V-P11R-S, V-P11L-S, V-P12-Sは、バリオサージ 3のみで使用いただけます。

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

●パワーレベル表記値は、各チップにおける使用最大パワーレベルを示しています。チップは必ず指定されたパワー以下でご使用ください。

※チップのLR(左右)表記はチップの先端を正面から見た曲がりの方向を示しています。

Osseo 100+



Removes Doubt

ISQ測定器Osseo 100+は、インプラントの安定性を非接触で測定し、ISQ値（インプラント安定指数）を表示します。これにより、インプラントの荷重時期が判断できるようになる為、インプラント治療における施術計画に役立ち、術者をサポートします。

ISQ値測定の3ステップ



- 1 マルチペグをマルチペグドライバーでインプラントに装着します。
- 2 Osseo 100+の先端より、磁気パルスを発振。マルチペグとの共振周波数を測定し、安定性を数値で表示します。
- 3 ISQ値がディスプレイに表示されます。これは、ISQ値の安定性レベル（1~99）を反映しています。ISQ値が高いほど、インプラントの安定性が高いということになります。

Surgic Pro2を介したワイヤレスデータ管理

Surgic Pro2とBluetooth®接続することが可能。さらにSurgic Pro2を介してiPadと接続することで、測定されたISQ値を、iPadに表示しデータの共有や管理、保管することが可能です。測定するインプラントをiPad上で選択し、それぞれ測定することにより、部位毎に分けて測定データを管理することも可能です。



再利用可能なマルチペグ

- 様々なインプラントシステムに対応^{*1}
- 生体にやさしく、耐久性のあるチタン製
- オートクレーブ可能（20回）

※1 様々なインプラントメーカーに対応可能なマルチペグがございます。右記の対応表よりご確認ください。



マルチペグ対応表



Osseo 100+ 標準セット

製品名	製品番号	標準価格
Osseo 100+ set	Y1500447	¥346,000

セット内容 ● Osseo 100+ 本体 ● マルチペグドライバー ● ACアダプター ● ACアダプター用プラグ US / JP ● ISQテスター
(マルチペグは別売りです。本体には含まれていません。)

仕様

- <Osseo 100+>
 ● 定格入力：DC5V 1VA ● 重量：78 g ● バッテリー充電時間：約3時間^{*2} ● バッテリーの連続使用時間：約1時間^{*}
 <ACアダプター>
 ● 定格入力：AC100-240V 50 / 60Hz 0.18A ● 定格出力：DC5.2V 0.8A
 ※2 使用状況により異なります。



AUTOCLAVE



iClave mini2



ハンドピースにやさしく、内部までしっかり滅菌


高圧蒸気重力置換による高い滅菌力

滅菌前の重力置換工程を従来より増やし、さらにハンドピースの滅菌に適した縦型配置により、蒸気浸透度を高めることで、滅菌力が向上しました。

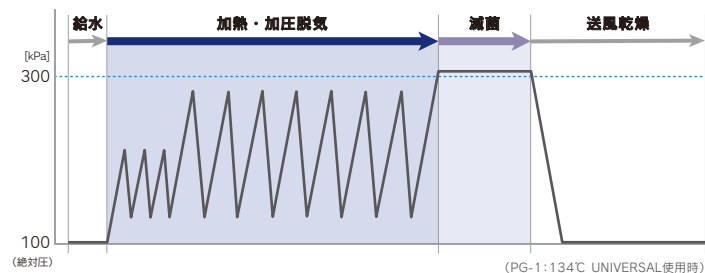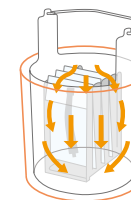

コンパクトサイズで大容量

専用バスケットで、効率の良い配置が可能です。未包装で最大12本、一重包装で最大6本までのハンドピースを一度に滅菌できます。

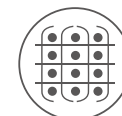

しっかりと滅菌できる直熱ヒートシステム

直熱ヒーターにより、チャンパー内部を効率的に温めます。また、チャンパーをすっぽり覆う一体型の断熱ジャケットにより、熱を効率よく内部に保留。温度ムラが少なく、効率的な加熱を実現。これによりスムーズに滅菌工程へ移行し、効率的な高圧蒸気滅菌を行います。



優れた操作性で、お手入れも簡単

見えやすく、簡単操作のLCDパネル

LCDパネルを採用したことで、視認性が大幅にアップ。用途に合ったプログラムの中から選択し、ボタンを押すだけの簡単操作。また、プログレスバーにより、現在の進行状況や残り時間が一目でわかります。



使いやすさと清掃性が向上したスマートデザイン

LCDパネルを採用したシームレスな外装は、清掃がしやすく、簡単にお手入れが可能です。



残水量表示

着脱式大容量タンクで 給水時間の節約と簡単お手入れ

1回の給水で4回分の滅菌が可能*。使用した水は毎回排水タンクに自動排水します。タンクの残水量は正面から見えやすく、給水タイミングが分かりやすい設計。取り外しも簡単で、タンクの清掃も簡単に行えるため、常に清潔な水の供給が可能です。



分解して水洗い可能

使いやすさと安全性を向上した充実の機能

音声案内によるお知らせ機能


滅菌開始や終了時などを、音声でお知らせします。

🔊) 滅菌を開始します

🔊) 滅菌が終了しました

通常ロックとインターロックの 二重ロック構造による安全性の向上

内部の圧力が下がらないとロックが解除されないインターロックと、通常のロックの二重ロック構造により、間違えて開けてしまう危険を防ぎます。

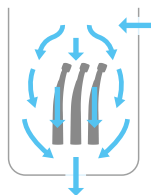

自動延長送風乾燥機能

滅菌が完了してもふたを開けるまで送風乾燥状態を延長することが可能。これにより、被滅菌物の乾燥に寄与します。

進化した、ハンドピースのための、スマート滅菌器

さらに洗練された、歯科医療へ。

ジャパンメイドの信頼性と、ヨーロッパ基準クラスSに準拠した滅菌性能。そして、使いやすさにこだわったデザイン。ハンドピースメーカーのナカニシが、毎日の施術と安全を考え、ハンドピースのための滅菌器をよりスマートに進化させました。

ヨーロッパ滅菌基準 EN13060 : Class S 準拠



製品名	製品番号	標準価格
iClave mini2 標準セット	Y1500013	¥459,000

セット内容

- iClave mini2ユニット ● 各種基本パーツ
- 仕切りスタンド ● バスケット ● 排水タンク
- 仕切り板(長) × 4 ● 仕切り板(短)

- 仕様 ● 外形寸法 (ドア全開時: H) : W 210 × D 370 × H 360 mm (H 600 mm) ● 総重量 (ユニット本体) : 17.5 kg
 ● 電源 : AC 100 V 50/60 Hz ● 消費電力 : 750 VA (定格消費電力 750 W) ● チャンバー寸法 : ø130 × L 200 mm
 ● チャンバー容量 : 2.5 L ● 給水タンク容量 : 1.5 L ● 排水タンク外形寸法 : W 140 × D 195 × H 234 mm
 ● 排水タンク容量 : 5 L ● 排水ホース : 1.5 m ● ハンドピース滅菌本数目安 : 12本 (未包装)、6本 (一重包装)

	プログラム	温度	滅菌時間	包装形態
PG-1	134°C UNIVERSAL	134°C	5.5分	一重包装
PG-2	134°C FAST	134°C	3.5分	未包装
PG-3	121°C UNIVERSAL	121°C	35.5分	一重包装
PG-4	121°C FAST	121°C	30.5分	未包装

- UNIVERSAL : 一重包装
FAST : 未包装 (滅菌後即時使用)
- 滅菌 (STERILIZING) 工程の前に、加熱 (HEATING) 工程が約8~25分かかります。
- 使用する水は、15 μS/cm以下の蒸留水、精製水、純水、または、イオン交換水、RO水のいずれかをご使用ください。
- 送風乾燥時間は (2~90分) の変更が可能です。

滅菌フロー



加熱



直熱ヒートシステムより、チャンバー内部を一気に温めることで、温度ムラが少なく、効率的な加熱をします。

加熱時間
約24分


重力置換



高圧蒸気重力置換による加圧脱気を繰り返し、被滅菌物内の空気を排除します。

重力置換
10回


滅菌

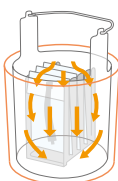

空気をできる限り排除した環境で滅菌を行うことで、機器内部への蒸気浸透度が高まり、より高い滅菌効果が期待できます。


滅菌時間
5.5分

排水

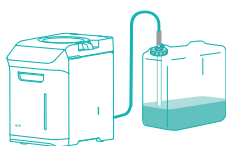

滅菌が完了すると専用の排水タンクへ自動で排水します。

送風乾燥

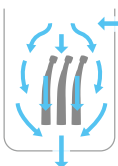

滅菌が終了したら送風乾燥によりチャンバー内の乾燥を促します。さらに、ふたを開けるまで送風乾燥状態を延長することが可能です。

送風乾燥
時間
10分*

- PG-1:134°C UNIVERSAL使用時。
- 各項目の記載時間は、あくまでも目安です。
- ※送風乾燥時間は(2-90分)の変更が可能です。

iClave mini2
チュートリアル動画





MAINTENANCE

iCare



日々の診療に不可欠なハンドピースの自動注油システム

ハンドピースのタイプに応じて、適正な注油量がプリセットされており、簡単なボタン操作のみで、ハンドピースのメンテナンスが完了。

さらにチャック清掃機能により、チャック内部の汚れや磨耗粉を効果的に取り除くことで、チャック由来のトラブルを未然に防ぎ、長期にわたりハンドピースをより良い状態に維持します。


また、オイル注油量の最適化などにより、ランニングコストを低減します。

シンプル操作で、確実な注油

エアタービン・コントラングル、それぞれに合わせた適切な注油量がプリセットされているため、ボタンを押すだけの簡単な操作で、ハンドピースの自動注油が行えます。


エアタービン

エアタービンは、エア回路、注水回路、およびチップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

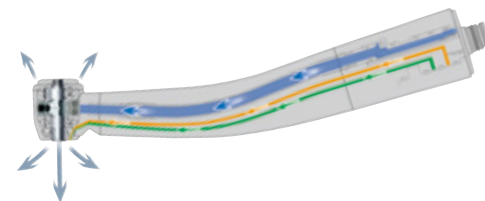

コントラングル

コントラングルは、ハンドピースのギアをモーターで回転させながら注油。複雑なギアの隅々まで確実にオイルを送り込むことが可能です。注水回路、チップエア（水を霧状にするためのエア）回路のすべてに注油されます。

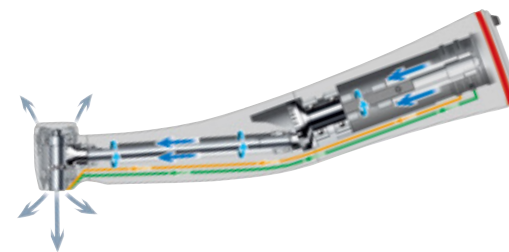

エアの吹き出し時間を選択

注油後、余剰オイルを排出するためのエアの吹き出し時間を選択できるため、ハンドピースの使用環境やお好みに合わせたメンテナンスが可能です。



チャック清掃機能

付属のチャック清掃用ノズルを使用することで、チャック内部の汚れや磨耗粉を取り除きます。



オイルミスト漏れを軽減 (別売品)

ハンドピースヘッドフィルターを装着して注油を行うことで、オイルミスト漏れを軽減します。



着脱が簡単な前面ドア

前面ドアを完全に取り外すことができるため、庫内のお手入れが簡単に行えます。



大型オイルタンク

iCareの大型タンク(1.2 L)は、メンテナンスオイル(1 L)を1回で補充できるため、余ったオイルの保管場所や、ボトルからのオイル漏れによる汚れの心配がなく、衛生的です。メンテナンス用ノズルを使用することで、上蓋から簡単・確実に補充できます。



各社仕様エアタービン装着用のアダプターを用意

各社仕様のエアタービンもアダプター(別売品)をタービンジョイントの形状に合わせて装着するだけで、使用することができます。

iCare専用メンテナンスオイル


iCareの高い注油効果の実現に欠くことができない専用のメンテナンスオイルです(付属品)。お得な6本入りセットもご用意。

アラーム機能で安全動作を実現

オイルの不足時やエア圧の低減時など、本体の異常を自動で検知し、操作パネル上にLEDの点灯・点滅によるエラー表示をします。

スタイリッシュ & コンパクト

医院内での使いやすさを追い求めたiCareは、スタイリッシュでコンパクトなデザインのため、限られたスペースの中で効率よく設置できます。

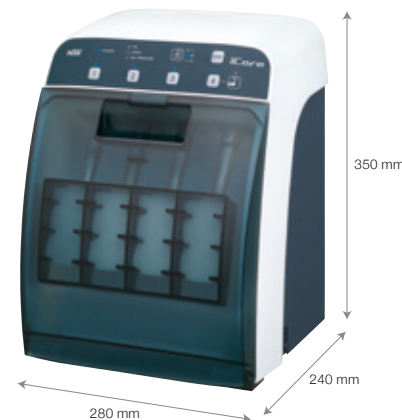

iCare 標準セット



C2 Type

コントラ2本、エアタービン2本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C2 Type	Y1002794	¥255,000



C3 Type

コントラ3本、エアタービン1本 仕様

製品名	製品番号	標準価格
iCare C3 Type	Y1002795	¥275,000

セット内容 ●iCare ユニット ●電源コード ●iCare用メンテナンスオイル(1 L) ●ミストフィルターセット ●エアチューブ ●オイルシート ●チャック清掃用ノズル

仕様 ●寸法: W 280 × D 240 × H 350 mm ●重量: 6.5 kg (C2タイプ / C3タイプ) ●電源: AC 100 V 50/60 Hz ●適正空気圧: 0.5-0.6 MPa(5.0-6.0 kgf/cm²) ●タンク容量: 1.2 L

- エアタービン取付ジョイントはミッドウェスト4ホール
- エア配管が必要となります。(5.0-6.0 kgf/cm²)
- エアスケラ (弊社製Ti-Max S970シリーズを除く)、およびパテラスエアモーターはメンテナンスオイルが抜けない構造のため、本製品では使用できません。これらのハンドピースへ注油を行う場合は、各製品の取扱説明書に従って注油してください。
- 血液などがハンドピース内に浸入した場合は、パナスプレープラスでのメンテナンスをおすすめします。本製品では十分な洗浄が行えず、血液などが内部で凝固するなど故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品はハンドピース内部の洗浄を意図した製品ではありません。

iCare アダプター

※アダプターは、エアタービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

製品名	製品番号	標準価格
PTL アダプター	Z257010	¥10,500

- パテラス、マッハ用

製品名	製品番号	標準価格
B2 / M4 アダプター	T904	¥7,000

- ボーテン2ホール用

製品名	製品番号	標準価格
KV アダプター	Z257020	¥10,500

- カボ用

製品名	製品番号	標準価格
SR アダプター	Z257023	¥10,500

- シロナ用

製品名	製品番号	標準価格
WH アダプター	Z257021	¥10,500

- W&H用

製品名	製品番号	標準価格
BA アダプター	Z280022	¥10,500

- ピエン・エア用

製品名	製品番号	標準価格
MT アダプター	Z257030	¥10,500

- モリタ用

製品名	製品番号	標準価格
MH アダプター	Z257048	¥10,500

- モリタ4H用

製品名	製品番号	標準価格
YS アダプター	Z257031	¥10,500

- ヨシダ用

製品名	製品番号	標準価格
YS-2 アダプター	Z257044	¥10,500

- ヨシダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS アダプター	Z257032	¥10,500

- オサダ用

製品名	製品番号	標準価格
OS-2 アダプター	Z257034	¥10,500

- オサダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS-4 アダプター	Z257038	¥10,500

- オサダ用(ライト付) ●排気回収タイプ

製品名	製品番号	標準価格
F-タイプ アダプター	Z280042	¥10,500

- エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド

メンテナンスオイル

製品名	製品番号	標準価格
iCare用メンテナンスオイル 1 L	Z016130	¥11,500
iCare用メンテナンスオイルセット 6本入	Y1002783	¥65,000



(1 L)

マルチスタンド

エアタービン、コントラアングルハンドピースなどの注油後の保管に便利です。ハンドピースと一緒に135℃でオートクレーブ可能です。



製品名	製品番号	標準価格
マルチスタンド フルセット	Z036	¥5,250

- パテラスエアタービン / モーター用、E-タイプ®コントラ用
- スタンド用ポスト(A), (B) × 各5個
- スタンド用ポスト(C) × 4個 ※ISO3964準拠品



製品名	製品番号	標準価格
マルチスタンド パテラス用	Z036002	¥3,600

- スタンド用ポスト(A) × 3個
- スタンド用ポスト(C) × 2個

マルチスタンド用ポスト

製品名	製品	製品番号	標準価格
スタンド用ポスト(A)	●パテラス エアタービン用 ●パテラス モーター用	Z036201	¥210
スタンド用ポスト(B)	●E-タイプ® コントラ用 ※ISO3964準拠品	Z036202	¥210
スタンド用ポスト(C)	●パテラスカップリング用 ●マッハカップリング用	Z036203	¥210
スタンド用ポスト(KV)	●カボ エアタービン用	Z036204	¥210
スタンド用ポスト(SR)	●シロナ エアタービン用	Z036205	¥210
スタンド用ポスト(WH)	●W&H エアタービン用	Z036207	¥210
スタンド用ポスト(BA)	●ピエン・エア エアタービン用	Z036206	¥210
スタンド用ポスト(MT)	●モリタ エアタービン用	Z036208	¥210
スタンド用ポスト(FL)	●オサダファインジョイント用	Z036213	¥210
スタンド用ポスト(F)	●エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用	Z036209	¥210

PANA SPRAY Plus

「パナスプレープラス」には、アルコール含有の特殊な潤滑油が採用されており、タービン・コントラなどに内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、ハンドピースの寿命を延ばします。
また、アルコール入りのため、スプレー使用時の潤滑油による手のベタつきも軽減され、より使いやすくなっています。



製品名	製品番号	標準価格
パナスプレープラス	Z182100	¥5,000

●エアタービン、ハンドピース用 ●480 mL ●アルコール含

製品名	製品番号	標準価格
パナスプレープラス 6本セット	Y900630	¥26,000

製品名	製品番号	標準価格
チップノズル	Z020010	¥210

パナスプレープラス用ノズル

製品名	製品番号	標準価格
パテラス スプレーノズル	●パテラスカップリング式 エアタービン / モーター用	P183090 ¥1,100
スプレーノズル(KV)	●KaVo® Multiflex® カップリング用	Z090051 ¥1,600
スプレーノズル(SR)	●Sirona® Quick coupling用	Z090052 ¥1,600
スプレーノズル(WH)	●W&H® Roto Quick カップリング用	Z090054 ¥1,600
スプレーノズル(BA)	●Bien Air® UNIFIX® カップリング用	Z090053 ¥1,600
スプレーノズル(ML)	●モリタαメインチューブ用	Z090055 ¥1,600
スプレーノズル(YS)	●ヨシダクイックジョイント用	Z090057 ¥1,600
スプレーノズル(FL)	●オサダファインジョイント用	Z090062 ¥1,600
E-タイプスプレーノズル	●E-タイプ用®	Z019090 ¥1,600
サージカルスプレーノズル	●E-タイプ用® ●SGM-I / SGMS-I ヘッド用	Z114090 ¥1,100
F-タイプスプレーノズル	●エンドメイト TC2 / iProphy / iSD900 ヘッド用	Z256090 ¥1,100

※ISO3964準拠品

スプレーミスト吸収パック

スプレーによるハンドピースへの注油時、ミスト状のオイルが飛散し、周囲を汚す可能性があります。このスプレーミスト吸収パックにより、オイルミストを効果的に吸収し、診療室をクリーンに維持できます。また、手にもオイルが付着しないため、ハンドピースのメンテナンスを楽に行えます。




製品名	製品番号	標準価格
スプレーミスト吸収パック	Y900084	¥5,000

●10パック入

EZ SPRAY



EZスプレーは、スプレーグリップとハンドピースを確実に装着してオイルの洗浄・注油が行えるので、人によるバラつきがなく、誰がやっても簡単にオイルメンテナンスが行えます。また、各社のエアータービンハンドピースをご使用いただく場合は、各社仕様エアータービン装着用アダプターをご使用ください。

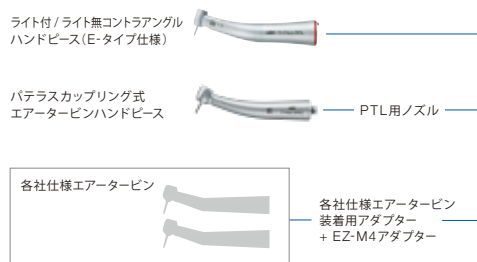

各社仕様エアータービンを使用の際は、各社仕様エアータービン装着用アダプターとEZ-M4アダプターを組み合わせてください。



※ナカニシのパンスプレープラス専用です。
パンスプレープラスとPTL用ノズルは付属しておりません。

各社仕様エアータービン装着用アダプター (各社用アダプター + EZ-M4アダプター)

※アダプターは、エアータービンの種類によっては装着できないものもあります。販売店にご相談ください。

製品名	製品番号	標準価格
KV アダプター	Z257020	¥10,500

●カボ用

製品名	製品番号	標準価格
SR アダプター	Z257023	¥10,500

●シロナ用

製品名	製品番号	標準価格
WH アダプター	Z257021	¥10,500

●W&H用

製品名	製品番号	標準価格
BA アダプター	Z280022	¥10,500

●ビエン・エア用

製品名	製品番号	標準価格
MT アダプター	Z257030	¥10,500

●モリタ用

製品名	製品番号	標準価格
MH アダプター	Z257048	¥10,500

●モリタ4H用

製品名	製品番号	標準価格
YS アダプター	Z257031	¥10,500

●ヨシダ用

製品名	製品番号	標準価格
YS-2 アダプター	Z257044	¥10,500

●ヨシダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS アダプター	Z257032	¥10,500

●オサダ用

製品名	製品番号	標準価格
OS-2 アダプター	Z257034	¥10,500

●オサダ用(ライト無し)

製品名	製品番号	標準価格
OS-4 アダプター	Z257038	¥10,500

●オサダ用(ライト付) ●排気回収タイプ

製品名	製品番号	標準価格
F-タイプ アダプター	Z257042	¥10,500

●エンドメイト TC2 / iProphy ヘッド

製品名	製品番号	標準価格
EZ-M4 アダプター	Z229040	¥5,250

EZグリップセット



注油によるハンドピース内の余分なオイルをエアブローにより排出します。EZグリップを使用する場所には、エアチューブ(外径φ6mm)のエア配管が必要です。

製品名	製品番号	標準価格
EZグリップセット	ZA02290100	¥17,000

●EZスプレーグリップ ●コイルチューブ ●エア配管用継手PEG6-4

Multi Gauge

給気圧、排気圧、水圧、チップエア圧を正確に測定できるので、エアタービンなどの適正圧力の設定が可能になります。















製品名	製品番号	標準価格
MG-4H マルチゲージ	Z109400	¥26,500

●ライト付ISO標準4ホール、ミッドウェスト4ホール/5ホールの手元圧測定

エアタービン適正エア圧

Handpieces Air Pressures

		適正エア圧 MPa(kgf/cm ²)
エアタービン	 Ti-Max Z890 / Z990	0.25-0.42 MPa (2.5-4.2 kgf/cm ²)
	 S-Max M micro	0.20-0.30 MPa (2.0-3.0 kgf/cm ²)
	 S-Max M800 / M900	
	 S-Max pico	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)
	 Ti-Max X450	0.25-0.30 MPa (2.5-3.0 kgf/cm ²)
エアモーター	 Ti-Max X205L	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)
	 S-Max M205	
歯面清掃用ハンドピース	 Prophy-Mate neo	0.25-0.35 MPa (2.5-3.5 kgf/cm ²)
	 Perio-Mate	0.30-0.40 MPa (3.0-4.0 kgf/cm ²)
エアスケラー	 Ti-Max S970	0.30 MPa (3.0 kgf/cm ²)
技工用ハンドピース	 PRESTO AQUA II	0.25-0.30 MPa (2.5-3.0 kgf/cm ²)
	 PRESTO II	0.20-0.25 MPa (2.0-2.5 kgf/cm ²)

※NSK/パテラスカップリングタイプ



DENTAL LABORATORY



ULTIMATE XL series



力と技が織り成す造形美 技工用エンジン「アルチメイト XL」シリーズ

180°ベクトルモーター制御によるスムーズな回転と、確かなトルクは高い作業効率を可能にします。様々なフィールドテストにおいて実証されたハンドピース形状による高いホールド性は、精密な作業をサポートし、長時間の作業においても疲れにくく、ストレスを軽減させます。



アルチメイト XLシリーズ ラインナップ

4つのコントロールユニットと、2つのモーターハンドピースから自由に組み合わせてお選び頂けます。

— 卓上タイプ —
ULTIMATE XL



UMXL-G

— 卓上縦置きタイプ —
ULTIMATE XL-D



UMXL-D

— 膝コントロールタイプ —
ULTIMATE XL-K



UMXL-K

— 床置きタイプ —
ULTIMATE XL-F



UMXL-F

ULTIMATE XL



Bench Type



アルチメイト XL 標準セット

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- メンテナンスモードを設定
- オートクルーズ機能
- エラーコード表示機能

※エアタービンとの連動はできません。

タイプ	製品名	製品番号	標準価格
トルク	UMXL-GT	Y141446	¥181,000
コンパクト	UMXL-GC	Y141447	¥181,000

セット内容 ●コントロールユニット ●モーターハンドピース ●フットペダル
●ハンドピーススタンド

仕様 ●寸法：W 167 × D 247 × H 77 mm ●重量：2.8 kg
●電源：AC 100 V 50/60 Hz

ULTIMATE XL-K



Knee Type



アルチメイト XL-K 標準セット

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- メンテナンスモードを設定
- オートクルーズ機能
- エラーコード表示機能
- エアタービンの接続が可能

タイプ	製品名	製品番号	標準価格
トルク	UMXL-KT	Y141452	¥191,000
コンパクト	UMXL-KC	Y141453	¥191,000

セット内容 ●コントロールユニット ●モーターハンドピース(モーターコード2 m)
●ハンドピーススタンド ●ブラケットセット

仕様 ●寸法：W 90 × D 270 × H 230 mm ●重量：3.2 kg
●電源：AC 100 V 50/60 Hz

ULTIMATE XL-D



Tower Type



アルチメイト XL-D 標準セット

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- メンテナンスモードを設定
- オートクルーズ機能
- エラーコード表示機能
- エアタービンの接続が可能

タイプ	製品名	製品番号	標準価格
トルク	UMXL-DT	Y141450	¥191,000
コンパクト	UMXL-DC	Y141451	¥191,000

セット内容 ●コントロールユニット ●モーターハンドピース(モーターコード2 m)
●フットペダル ●ハンドピーススタンド

仕様 ●寸法：W 81 × D 270 × H 230 mm ●重量：3.3 kg
●電源：AC 100 V 50/60 Hz

ULTIMATE XL-F



Floor Type



アルチメイト XL-F 標準セット

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-40,000 min⁻¹
- オートクルーズ機能
- エアタービンの接続が可能

※回転速度はペダルによるバリエーションコントロールです。ユニットの設定により最高回転速度を30,000 min⁻¹か40,000 min⁻¹に切り替え可能です。安全性を考慮し、最高回転速度を50,000 min⁻¹でなく40,000 min⁻¹に設定しています。

タイプ	製品名	製品番号	標準価格
トルク	UMXL-FT	Y141454	¥191,000
コンパクト	UMXL-FC	Y141455	¥191,000

セット内容 ●コントロールユニット ●モーターハンドピース(モーターコード2 m)
●ハンドピーススタンド

仕様 ●寸法：W 230 × D 292 × H 113 mm ●重量：3.8 kg
●電源：AC 100 V 50/60 Hz



ULTIMATE XL

モーターハンドピース



トルクタイプ モーターハンドピース

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- 最大トルク：8.7 Ncm

製品名	製品番号	標準価格
UMXL-TP	Y141442	¥85,000

- 寸法：L 151 × ø29 mm ●重量：215 g(コード含まず)
- コード長さ：1.2 m



コンパクトタイプ モーターハンドピース

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- 最大トルク：6.0 Ncm

製品名	製品番号	標準価格
UMXL-C	Y141444	¥85,000

- 寸法：L 144 × ø27 mm ●重量：181 g(コード含まず)
- コード長さ：1.2 m



E-タイプ モーター

- ブラシレスモーター
- 回転速度：1,000-50,000 min⁻¹
- 最大トルク：6.0 Ncm

製品名	製品番号	標準価格
UMXL-EM	E342	¥57,000

- 寸法：L 118 × ø27 mm ●重量：129 g(コード含まず)
- コード長さ：1.2 m

Turbine Adaptor TA50

アルチメイト XL-D, XL-K, XL-F用

タービンアダプターTA50は、エアータービンのコントロールペダルをせず、マイクロモーターのコントロールペダルでエアータービンを操作することが可能です。



タービンアダプター

製品名	製品番号	標準価格
TA50	U375	¥15,500

- 寸法：W 75 × D 100 × H 30 mm

エアータービン



タービンアダプター TA50

※マイクロモーターのコントロールペダルでエアータービンを操作することが可能になります。



アルチメイト XL-D



アルチメイト XL-K



アルチメイト XL-F

VOLVERE i7

設置場所を選ばず誰もが使いやすい、技工用モーター

リングタイプ 回転速度：1,000-35,000 min⁻¹E-タイプ 回転速度：1,000-35,000 min⁻¹

安定したモーター性能

ボルバー i7に内蔵されている“コアレスモーター”はコア（鉄心）がないため、回転体の重量が小さくなり、回転の制御性が非常に良く回転ムラが起こりにくく、パワー効率も高く、全回転域で負荷がかかっても一定したスピードを維持できます。



- 持ちやすく疲れにくいグリップ
- 独自の防塵機構を搭載
- 可変式フットコントロール
- 低振動、低ノイズ



ボルバー i7 RM

ボルバー i7 標準セット

タイプ	製品名	製品番号	標準価格
リングタイプ	ボルバー i7 RM (100 V)	Y1003476	¥113,500
E-タイプ	ボルバー i7 E (100 V)	Y1003478	¥90,000

セット内容 ●ボルバーi7 コントロールユニット ●モーターハンドピース ●フットコントロール ●ハンドピーススタンド

仕様 **コントロールユニット** ●寸法：W 69 × D 185 × H 167 mm ●重量：930 g ●電源：AC 100 V 50/60 Hz
モーターハンドピース（リングタイプ） ●寸法：L 145 × ø24.5 mm ●重量：192 g（コードを除く） ●コード長さ：1.2 m
 ●回転速度：1,000-35,000 min⁻¹ ●最大出力：71 W ●最大トルク：4.1 Ncm
モーター（E-タイプ） ●寸法：L 109.3 × ø24.5 mm ●重量：118 g（コードを除く） ●コード長さ：1.2 m
 ●回転速度：1,000-35,000 min⁻¹ ●最大出力：71 W ●最大トルク：4.1 Ncm

PRESTO series

PRESTO AQUA II

注水式 & 無給油 技工用エアータービン

- 着脱が簡単な水ボトル
- 注水、チップエアアの無段階調整機能
- 注水のON / OFF機能
- 専用の水ボトルと、水道水からのダイレクト給水の両方が利用可能



製品名	製品番号	標準価格
プレスタアクア II 標準セット	Y150021	¥153,500

セット内容

- プレスタアクア II ユニット
- プレスタアクア ハンドピース
- QD-J B3 カップリング
- プレスタアクア II 用 ホース
- フットペダル(AFC-40)
- プレスト用 配管ホース

プレスタアクア ハンドピース

- 320,000 min⁻¹
- 水スプレー
- 無給油
- ツイストフリーのハンドピース
- 低騒音、低振動
- 特殊防塵機構搭載



ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	PRA-HP	T816	¥73,500

- プレスタアクアハンドピース

製品名	製品番号	標準価格
QD-J B3	T354051	¥10,000

- プレスタアクアハンドピースとワンタッチ着脱
- プレスタアクア II 専用

PRESTO II

無給油 技工用エアータービン

- 軽量
- コンパクト



製品名	製品番号	標準価格
プレストII 標準セット	Y150020	¥101,000

セット内容

- プレストII エアラインユニット
- プレスト ハンドピース
- ハンドピーススタンド
- フットペダル(AFC-40)
- プレスト用 ホース
- プレスト用配管ホース

プレスト ハンドピース

- 320,000 min⁻¹
- 無給油
- 低騒音、低振動
- 特殊防塵機構搭載



ライト	製品名	製品番号	標準価格
—	PR-HP	T815	¥71,000







- プレストハンドピース



SPARE PARTS







SPARE PARTS

Ti-Max Z890 / Z990 P21-27

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ9-MU03 Z890用 カートリッジ		PA2380 X001	¥35,000
TiZ9-SU03 Z990用 カートリッジ		PA2381 X001	¥35,000
TiZ9-MU04 Z890用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		PA2380 X050	¥5,250
TiZ9-SU04 Z990用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		PA2381 X050	¥5,250
TiZ9-MU04(YOS) Z890用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		PA2380 X051	¥5,250
TiZ9-SU04(YOS) Z990用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		PA2381 X051	¥5,250





S-Max M micro / M800 / M900 P28-33

製品名	製品	製品番号	標準価格
SX3-NU03 M micro用 カートリッジ		PA2307 X001	¥34,000
SX4-MU03 M800用 カートリッジ		PA1280 X003	¥34,000
SX4-SU03 M900用 カートリッジ		PA1281 X003	¥34,000
SX-NU04 M micro用 ヘッドキャップ		PA2307 X050	¥5,250
SX-MU04 M800用ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		P1001500	¥5,250
SX-MU04(YOS) M800用ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		P1026500	¥5,250
SX-SU04(YOS) M900用 ヘッドキャップ		P1027500	¥5,250
SX-NU05 M micro用 ヘッドキャップレンチ		PA2307 X765	¥1,050
SX-SU05 M800, M900用 ヘッドキャップレンチ		20000535	¥1,050

製品名	製品	製品番号	標準価格
TiZ9-SU05 ヘッドキャップレンチ		PA2381 X765	¥1,050
S970 Oリングセット (4個入)		Y1001953	¥1,280
Oリング カートリッジ用 リア側、ミドル側		D0319059 080	¥260
Oリング カートリッジ用 フロント側		D0312049 030	¥320
Oリング ヘッドキャップ用		D0312090 040	¥320
クリーニング ワイヤ		Z144101	¥160

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用 M micro, M800 フロント		D0312049 030	¥320
Oリング カートリッジ用 M micro ミドル・リア		D0319059 080	¥260
Oリング カートリッジ用 M800 リア側, M900 フロント側		D0312069 030	¥320
Oリング カートリッジ用 M900 リア		D0312077 030	¥320
Oリング M micro ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥320
Oリング M800, M900 ヘッドキャップ用		D0312090 040	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600
クリーニング ワイヤ		Z144101	¥160

S-Max pico P34-38



製品名	製品	製品番号	標準価格
SX-PU03 カートリッジ		P1140200	¥31,500
SX-PU04 ヘッドキャップ NSK, KaVo, Dentsply Sirona, モリタ タイプ用		P1140500	¥5,250
SX-PU04(YOS) ヘッドキャップ ヨシダ, オサダ タイプ用		P1148500	¥5,250
SX-PU05 ヘッドキャップレンチ		20002803	¥1,050

Ti-Max X450 P40-43

製品名	製品	製品番号	標準価格
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600

FX シリーズ P62-65




















製品名	製品	製品番号	標準価格
FX25-03 FX25用 カートリッジ		C1052700	¥10,500
FX23-03 FX23用 カートリッジ		C1056700	¥5,250
FX25-04 FX25, FX23用 ヘッドキャップ		C1052500	¥5,250
FX注水ノズル FX25, FX23, FX15用 チューブ付		C1052702	¥2,100

製品名	製品	製品番号	標準価格
Oリング カートリッジ用		D0319059 080	¥260
Oリング ヘッドキャップ用		D0312065 040	¥320
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600














製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル FX65用 チューブ付		H019711	¥2,100
FXレンチ FX25, FX23用		C1052701	¥320
チューブ		Z166101	¥210

SPARE PARTS

EX シリーズ P66-67

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
FPB-03 FPB用カートリッジ		C875060	¥10,500	スクリュー軸組付 AR-Y(S)用		C185A012	¥3,000
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,400	防塵シール AR-Y(S)用		C571360	¥210
注水ノズル FPB, NAC, VM用 チューブ付		C032701	¥2,100	口金メタル AR-Y(S)用		C185B108A	¥210
FPB-02 FPB, FFB用 ミドルギア		C875012	¥2,700	口金 AR-Y(S)用 正ネジタイプ		C185C119	¥1,050
NAC-02 NAC, AR用 ミドルギア		C032012	¥2,700	スクリュー軸 口金セット AR-Y(S)用 正ネジタイプ		C185C060	¥4,400
ラッチ板 NAC用		C032103	¥210	口金 AR-Y(S)用 逆ネジタイプ		C185911	¥1,050
ラッチ板止め ネジ NAC用		C032104	¥210	スクリュー軸 口金セット AR-Y(S)用 逆ネジタイプ		C185D060	¥4,400
口金レンチ AR-Y(S)用		C185C751	¥210	プランジャ組付 EVA用		C235A015	¥5,300
口金レンチ(黒)		C071751	¥320	クビ本体組付 EVA用		C235A012	¥3,300
チューブ		Z166101	¥210				

NLX nano P72-74

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
NLX nano MC ライト付モーター (コード付)		E1044001	¥150,000	リング モーター用		D0312185 050	¥540
NLX nano ライト付モーター (コード無し)		E1044051	¥120,000	アダプター NLX-YOS ヨシダクイックジョイント (ライト付)		T1024001	¥5,250
NLX CD コード (2.2 m)		E1044061	¥30,000	アダプター NLX-YS2 ヨシダクイックジョイント (ライト無し)		T1026001	¥5,250
NLAC(100V) ACアダプター		U497001	¥17,500	アダプター NLX-MRT モリタαメインチューブ		T1023001	¥5,250
ACコード		U435550	¥540	アダプター NLX-OS オサダ 4HL, 3HL		T1025001	¥5,250
リング		D0312074 080	¥320	EL400 ステア 取付金具		Z249	¥4,200
リング		D0313084 070	¥320				

ス
ヘ
ア
パ
ー
ツ

SPARE PARTS

バリオスコンビ Pro P80-89

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti バリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000	水供給用 コネクタ		U387030	¥7,500
パウダー ハンドピース プロファイ用		T1074001	¥64,000	ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
パウダー ハンドピース ペリオ用		T1077001	¥85,500	水フィルター		U387042	¥2,000
ハンドピース コード VA2-LUX-HP用		E351054	¥25,000	CR-10 チップ交換レンチ		Z221076	¥7,600
ノズル プロファイ用		T1074012	¥16,500	Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
ノズル ペリオ用		T1077012	¥16,500	チップホルダー バリオス用		Z221A080	¥3,700
FC-79 フットコントロール		Z1256001	¥45,000	チップカバー-L		Z217850	¥850
チャンバー プロファイ用		U1135018	¥63,000	チップカバー-S		Z217851	¥540
チャンバー ペリオ用		U1135019	¥63,000	滅菌ケース		Z1035001	¥5,400
ハンドピース ホース プロファイ用		T1051001	¥36,000	Oリングセット チャンバー接続部		Y1003435	¥1,600
ハンドピース ホース ペリオ用		T1053001	¥36,000	Oリング ハンドピースコード用		Y1003546	¥210
VCPボトル セット		U1135017	¥6,000	Oリングセット 注水ボトル用		Y1003544	¥640
エアホース		D0914406 036	¥3,800	Oリングセット ハンドピースホース用 プロファイ、ペリオ共通		Y1003500	¥640
水フィルター セット (3.6 m)		U1135078	¥8,500	Oリングセット ノズル用 プロファイ、ペリオ共通		Y1003501	¥640
注水ポンプ		U1135079	¥5,400	リングレンチ		T1074601	¥540

スヘア
パーツ

SPARE PARTS



熱水洗浄可能



135°C オートクレーブ可能

SPARE PARTS

バリオス970 / バリオス370 P90-93

製品名	製品	製品番号	標準価格
VA2-LUX-HP Ti バリオス2ハンドピース (ライト付)		EA1203X 050	¥104,000
VA2-HP バリオス2ハンドピース (ライト無し)		E350050	¥58,000
VA970LUX-SC ハンドピースコード Varios 970 LUX用		E351055	¥25,000
VA970-SC ハンドピースコード Varios 970用		E350055	¥19,500
FC-70 フットコントロール (2.5 m)		Z1008001	¥7,000
FC-71 フットコントロール (5 m)		Z1008002	¥7,000
ACコード Varios 970用		U271013	¥3,250
バリオス370/370LUX ACアダプター プラグ付(5 m)		Y1001788	¥19,000
水フィルターセット(2m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、 水フィルターケース		U387040	¥6,800
水フィルターセット(4m) Varios 370用 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、水フィルターケース		U1007080	¥9,000
水供給用 チューブ(2m)		U387580	¥2,200
水供給用 チューブ(4m) Varios 370用		D0914406 040	¥4,400
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥540
ハンドピース ホルダー Varios 370用		10001505	¥2,100
VA ボトル400 セット Varios 970用 (400 mL)		Z1047002	¥6,000
VA ボトル400用 蓋 Varios 970用		10000652	¥3,500
VA ボトル400 Varios 970用 (400 mL)		20000947	¥2,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
交換用ポンプ Varios 970用		10000643	¥5,400
水供給用 コネクター		U387030	¥7,500
ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
水フィルター		U387042	¥2,000
CR-10 チップ交換レンチ		Z221076	¥7,600
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー バリオス用		Z221A080	¥3,700
チップカバー-L		Z217850	¥850
チップカバー-S		Z217851	¥540
滅菌ケース		Z1035001	¥5,400
バリオス 350/370用 スタンド		Z254	¥9,000
バリオス 350/370用 ステー		Z259	¥6,500
コントロール ユニットホルダー Varios 370用		Y1001812	¥2,700
スパナ (5 × 8)2個入		Y1001301	¥1,100
Oリング ハンドピースコード用		D0310020 080	¥210
Oリング(細) VA ボトル400用		D0312090 100	¥320
Oリング(太) VA ボトル400用		D0310075 165	¥320

iCart

製品名	製品	製品番号	標準価格
iCart-S		Z298	¥52,500
iCart-L		Z299	¥52,500

仕様
●外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
●重量: 10 kg

























仕様
●外形寸法: W 360 × D 420 × H 800 mm
●重量: 10 kg

Z-Cart
























製品名	製品	製品番号	標準価格
Zカート		Z271	¥86,000

仕様
●外形寸法: W 400 × D 420 × H 800 mm
(高さは3段階800, 750, 700 mm)
●重量: 21.4 kg
●コード長さ: 3 m(アース付)
●電源入力コンセント 2口付

プロフィーメイト neo P116-118

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
PMN-HP ハンドピース (60°ノズル付)		T797010	¥53,000	フロアーノズル YS		T1034094	¥1,600
60°ノズル		T797012	¥16,500	フロアーノズル FJ		T1033094	¥1,600
80°ノズル		T797013	¥16,500	フロアーノズル KV		T886094	¥1,600
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000	フロアーノズル SR		T887094	¥1,600
ゴムパッキン		T798135	¥1,000	フロアーノズル WH		T888094	¥1,600
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320	フロアーノズル BA		T889094	¥1,600
Oリング ノズリア側		D0312029 070	¥320	フロアーノズル M4		T884094	¥1,600
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600	タービン用オイル		Z016112	¥800
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960	掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥650
リングレンチ		T797601	¥540	掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥650
フロアーノズル PTL		T798094	¥1,600	掃除用ファイル		T798092	¥800
フロアーノズル MR		10000726	¥1,600	掃除用ブラシ		T798093	¥800



ペリオメイト P120-122

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
PER-HP ペリオメイトノズル付		T1043010	¥75,000	ペリオメイト フロアーノズル YS		T1060094	¥1,600
ペリオメイト ノズル		T1043012	¥16,500	ペリオメイト フロアーノズル FJ		T1062094	¥1,600
パウダーケース カバー		T798133	¥2,000	ペリオメイト フロアーノズル KV		T1044094	¥1,600
ゴムパッキン		T798135	¥1,000	ペリオメイト フロアーノズル SR		T1046094	¥1,600
Oリング ノズルフロント側		D0312039 070	¥320	ペリオメイト フロアーノズル WH		T1048094	¥1,600
Oリング ノズリア側		D0312023 060	¥320	ペリオメイト フロアーノズル M4		T1052094	¥1,600
パテラス Oリングセット (5個入)		Y900580	¥1,600	タービン用オイル		Z016112	¥800
PM Oリングセット (3個入)		Y900054	¥960	掃除用ワイヤー (大)		T798091	¥650
リングレンチ		T797601	¥540	掃除用ワイヤー (小)		T798095	¥650
ペリオメイト ノズルチップ リムーバー		T1043751	¥540	掃除用ファイル		T798092	¥800
ペリオメイト フロアーノズル PTL		T1042094	¥1,600	掃除用ブラシ		T798093	¥800
ペリオメイト フロアーノズル MR		T1056094	¥1,600				



SPARE PARTS

S970 エアースケーラー P128-131

製品名	製品	製品番号	標準価格
CR-20 チップ交換レンチ		Z1090001	¥7,500
Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
チップホルダー エアースケーラー用		Z252A080	¥3,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
チップカバー-L		Z217850	¥850
チップカバー-S		Z217851	¥540
S970 Oリングセット (4個入)		Y1001953	¥1,280






バリオスチップ / エアースケーラーチップ

製品名	製品	製品番号	標準価格
固定ネジ V30, S75 Vチップホルダー用		Z217310	¥840
チャック S35 Vチップホルダー用		Z252242	¥1,400
チャック V30, S75 Vチップホルダー用		Z217311	¥740

製品名	製品	製品番号	標準価格
ナット E11, E12, V10, S35用		Z217241	¥2,100
Oリング E11, E12, V10, S35用		D0312017 100	¥320




iProphy P144-145

製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy モータハンド ベース		E1117	¥46,000
iProphy スタンド		U1091002	¥15,000
ACアダプタ		Y1002870	¥13,000
Fタイプ スプレーノズル		Z256090	¥1,100
NAC-02 NAC用ミドルギア		C032012	¥2,700
NAC-03 NAC用カートリッジ		C030011	¥3,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
iProphy バッテリーパック		E1080052	¥4,900
NAC-Y プロフィー用、ラッチ式 コントローラー用(ø2.35)		C032002	¥14,500
EVA-Y 上下運動ヘッド エバチップ用		C235	¥13,000
FC 等速 1:1		C873	¥11,000
F4R 減速 4:1		C872	¥13,500




エンドメイト TC2 P148-150

製品名	製品	製品番号	標準価格
単4ニッケル水素 電池セット (2本入)		Y900103	¥1,050
TC2用 充電器		Y1001446	¥28,000
コード MPAS用		C876021B	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
コード押さえ		C876509	¥540
ACコード		U435550	¥540
バッテリーカバー		E346103	¥1,100

※電池セット：充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。
※写真電池はサンプルです。

エンドメイト TC2 ヘッド&シャンク P150

製品名	製品	製品番号	標準価格
MP-Y ミニヘッド、360°回転 Ni-Tiファイナル用(ø2.35) プッシュボタン式チャック		C547	¥19,000
MPAS-Y 根管長測定器接続用 (シャンク長12 mm) ミニヘッド、360°回転 Ni-Tiファイナル用(ø2.35) プッシュボタン式チャック		C882	¥30,000
F4R 減速 4:1		C872	¥13,500
















製品名	製品	製品番号	標準価格
F10R 減速 10:1		C398	¥15,000
F16R 減速 16:1		C871	¥16,000
F20R 減速 20:1		C399	¥16,000







iPex II P152-153

製品名	製品	製品番号	標準価格
iPex II ファイナルクリップ (1本)		U1109351	¥2,000
iPex II テスター (1個)		U1109353	¥1,400

製品名	製品	製品番号	標準価格
iPex II プロープ (1本)		U1109352	¥3,500
リップフック (1本)		U501513	¥800

ビバエース P156-161

製品名	製品	製品番号	標準価格
isoE-LUX		Z1265	¥36,500
VA2-LUX-HP パリオス2ハンドピース (ライト付)		E351050	¥103,000
吸引歯ブラシ キット チューブ付(10キット)		U1144089	¥30,000
バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥5,100
V-ace バキュームホース セット		U1144074	¥32,000
V-ace バキュームボトル セット		U1144070	¥27,000
V-ace バキュームボトル 蓋セット		UA11440 190	¥24,500
V-ace バキュームボトル		UA11440 875	¥2,700
フィルター Oリング付		UA11440 189	¥1,600
Oリング フィルター用		D0312128 060	¥320
V-ace 3way シリンジセット		U1144040	¥37,500
V-ace 3way シリンジノズル		U1144046	¥4,900
V-ace バキューム 中継ホース		U1144753	¥3,800
バキューム キャップA		U1144750	¥900
バキューム キャップB		U1144751	¥900

製品名	製品	製品番号	標準価格
ホースキャップ		U1144752	¥900
V-ace 注水ボトルセット		U1144080	¥20,000
V-ace 注水ボトル蓋 セット		UA11440 195	¥16,500
V-ace 注水ボトル		UA11440 885	¥2,700
FC-76S フットコントロール インスツルメント用		Z1082003	¥9,200
FC-70S フットコントロール バキューム用		Z1008004	¥7,000
ACコード		U435550	¥540
V-ace ショルダーベルト		U1144370	¥8,500
蓋パッキン 注水ボトル用		U1144729	¥1,100
蓋パッキン バキュームボトル用		U1144636	¥540
VS排唾ボトル用 パッキン (黒)		Z1137352	¥320
Oリングセット モーター用		Y1003728	¥1,280
洗浄アダプター		U1144097	¥2,100
注水プラグセット		Y1003730	¥4,900
ヒューズ		D1202231 510	¥210

ビバQ P162-165

製品名	製品	製品番号	標準価格
ビバQ キャリングバッグ		U1173100	¥29,000
ホルダセット		U1173050	¥8,700
FC-70S フットコントロール		Z1008004	¥7,000
吸引歯ブラシ キット チューブ付 (10キット)		U1144089	¥30,000
バキュームノズル (10本セット)		U1144088	¥5,100
バキュームホース セット		U1173074	¥35,000
ホースキャップ		U1144752	¥900
バキュームバルブ		U1144079	¥22,000
Oリング バキュームバルブ ホース側用		D0312100 150	¥320
Oリング バキュームバルブ バキュームノズル側用		D0312107 150	¥210
バキュームホース ビバQ用(1.8 m)		U1173076	¥12,000
Oリングセット バキュームホース ジョイント用 (2個入)		Y1004143	¥640
洗浄アダプター		U1144097	¥2,100
バキューム キャップA		U1144750	¥900
バキューム キャップB		U1173080	¥900
バキュームボトル セット ビバQ用		U1173070	¥29,000

製品名	製品	製品番号	標準価格
バキュームボトル ビバQ用 蓋なし		U1173417	¥8,100
パッキン バキュームボトル蓋用		U1173413	¥1,100
Oリング フロートジョイント用		D0311138 240	¥320
Oリング バキュームボトル蓋 ジョイント用		D0311148 180	¥210
フロート玉 ボトル用		U1173407	¥900
フロート本体 ボトル用		U1173410	¥1,600
フィルター バキュームボトル用		U1173415	¥1,600
ドレンねじセット		U1173032	¥1,600
Oリング コントロールユニット ジョイント用		D0312215 150	¥360
フィルター コントロールユニット用		U1173227	¥210
ACコード		U435550	¥540
ヒューズ T2.5 AH 250 V		D1202225 010	¥230
ホルダ		U1173605	¥2,700
ボール (1本)		U1173061	¥1,600
ボール台座		U1173060	¥2,700

SPARE PARTS












ビバメイト G5 P166-167

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VMG30EM ビバメイトG5 モーター&コード		E1069	¥82,000	ACコード		U435550	¥540
FC-76M フットコントロール ※標準セットには 含まれておりません。		Z1082002	¥9,200	キャリングセット ビバメイトG5用		Y1002171	¥5,400
ハンドピース スタンド		Z095205	¥2,100	Oリング		D0313084 070	¥320
バッテリーパック		U1068052	¥15,000	Oリング		D0312074 080	¥320
ACアダプター ビバメイトG5用		U1115	¥14,000				

Surgic Pro2 P170-179



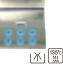




製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
リンクモジュール		Z1402001	¥22,000	電源コード		U389013	¥3,250
リンクスタンド 2		Z1452001	¥16,200	ハンドピース スタンド		Z1402110	¥2,650
キャリングケース Surgic Pro2		Y1500395	¥63,000	チューブホルダー (7個入)		Y900083	¥2,600
FC-81 ワイヤレス フットコントロール		Z1401001	¥91,000	イリゲーション チューブ (10本入)		Y1001210	¥16,000
SGL80M ライト付 モーター&コード		Y1004211	¥207,500	プロテクション プラグ		10001595	¥1,100
SG80M ライト無し モーター&コード		Y1004212	¥181,500	バッテリーカバー フットコントロール用		Z1401068	¥1,050
チューブ抑え		E1198105	¥4,500	リンクボックス		Z1402010	¥16,200
ロッド ボトル支柱		U370152	¥4,500	リンクケーブル		Z1402051	¥5,400

VarioSurg 3 P192-211










製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
VS3-LED-HPSC LEDハンドピース (ハンドピースコード 2m付属)		E1133	¥281,000	イリゲーション チューブ (10本入)		Y1001210	¥16,000
Eチップ用レンチ V10-S用		Z217399	¥1,100	ロッドVS ボトル支柱		U564152	¥4,500
VSチップレンチ CR-40 SG1A, SG8A用 ソケットリフト用		Z305350	¥1,100	チューブホルダー (7個入)		Y900767	¥2,600
チップ交換レンチ CR-30		10000977	¥9,200	VA-SG-CASE 滅菌ケース		20001326	¥41,000
チップホルダー		20001327	¥6,500	滅菌トレー MAXI REACH用		ZA16050 001	¥18,500
ハンドピース スタンド		Z1029201	¥2,650				

SPARE PARTS

インプラント用ハンドピース X-DSG / X-SG / SG P180-181

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
センター注水ノズル ノズル長: 23 mm		10000324	¥2,300	二分岐注水チューブ		C823752	¥2,700
センター注水ノズル M ノズル長: 20 mm		10001364	¥2,300	クリーンワイヤ		20000512	¥630
パイプホルダー X-DSG20L, X-DSG20 X-SG20ML		20000396	¥2,300	キャリブレーションバー		Z1057101	¥540
パイプホルダー SG20M用		20000357	¥2,300				

インプラント用ハンドピース SGM / SGMS シリーズ P184

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
SGM-I ラッチ式、超ミニヘッド		C293	¥36,000	二分岐注水チューブ		C823752	¥2,700
SGMS-I ラッチ式、超ミニヘッド (ストッパー付)		C594	¥46,500	レンチ SGM, SGMS用		Z103101	¥1,100
ER20i 20:1減速 ハンドピース		C629	¥70,000	Eチップ用レンチ		Z217399	¥1,100
センター注水ノズル SGM, SGMS用 ノズル長: 23 mm		C293025	¥4,200	ストッパー(L) SGMS用 12 mm		C594031	¥5,250
チューブクランプ		C202750	¥1,200	ストッパー(S) SGMS用 8 mm		C594021	¥5,250

マイクロサージェリーハンドピース P186

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル SGS, SGA用		H263018	¥3,400


マイクロソナーハンドピース P188

製品名	製品	製品番号	標準価格
注水ノズル SGR, SGT, SGO用		SH162035	¥3,400




iSD900 P190-191

製品名	製品	製品番号	標準価格
iSD-HP コントラアングル ヘッド		C1060001	¥42,000
iSD900用 充電器		U1071001	¥28,000
ACコード		U435550	¥540
トルク キャリブレーター		Z1056001	¥12,000



Osseo 100+ P212-213

製品名	製品	製品番号	標準価格
マルチベグ ドライバー		55003	¥5,200
プローブカバー (20枚入)		55105	¥8,100
ACアダプター		55263	¥6,500

製品名	製品	製品番号	標準価格
8×5スパナ		K040751	¥540

製品名	製品	製品番号	標準価格
キャリブレーション バー		Z1057101	¥540
ON/OFF スイッチレバー		Z1070001	¥540
単4ニッケル水素 電池セット (2本入)		Y900103	¥1,050

※電池セット：充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。
※写真電池はサンプルです。



















製品名	製品	製品番号	標準価格
ACアダプター用 変換プラグ US/JP		55267	¥650
ISQテスター		55217	¥15,000
マルチベグ			下記の対応表を ご参照下さい ¥5,400

マルチベグ対応表 ▶










SPARE PARTS






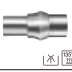




iClave mini2 P216-219

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
バスケット		U1159101	¥16,200	排水タンク キャップセット		UA11850860	¥5,400
仕切りスタンド		U1159102	¥4,300	給水タンクカバー		UA11850265	¥3,000
仕切り板(長)		U1159103	¥1,600	給水タンク蓋		UA11850106	¥1,700
仕切り板(短)		U1159104	¥1,100	給水タンク本体		UA11850105	¥3,000
水フィルタ		U1159107	¥1,600	給水ホースセット		UA11850266	¥3,500
フィルタ受け		105321	¥1,600	パッキン		UA11850173	¥5,400
エアフィルタ		U1159109	¥8,700	Oリング 給水ジョイント		D25100602	¥900
フックハンドル		UA11850232	¥4,300	ヒューズ (15 A)		UA11850239	¥320
排水タンク		UA11850234	¥1,600	排水ホースセット		Y1500197	¥8,100

iCare P224-227

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
iCare用 メンテナンスオイル 1 L		Z016130	¥11,500	エアフィルター		U508352	¥6,000
iCare用 メンテナンスオイル 6本入		Y1002783	¥65,000	チャック清掃用 ノズル		Z257301	¥1,700
ミストフィルター セット (12個入)		Y900159	¥2,000	ハンドピースヘッド フィルター (200個入)		U1120118	¥5,000
オイルシート (10枚入)		U433135	¥1,100				

EZスプレー P232-233

製品名	製品	製品番号	標準価格	製品名	製品	製品番号	標準価格
EZスプレー グリップ		Z229011	¥15,000	EZ-M4 アダプター		Z229040	¥5,250
コイルチューブ		Z229135	¥1,600	PA用ノズル		Z229030	¥1,700
グリップホルダー		Z229201	¥840	PTL用ノズル		Z229035	¥5,000
缶ホルダー		Z229020	¥4,000	Oリング グリップ用		D0312060 100	¥320
切換バルブ		Z229017	¥4,000	エア配管用 継手 PEG6-4		D2A100307	¥600

SPARE PARTS

アルチメイト XL シリーズ P238-243

製品名	製品	製品番号	標準価格
UMXL-TM モーター(1.2mコード) トルクタイプ		E355	¥51,500
UMXL-CM モーター(1.2mコード) コンパクトタイプ		E356	¥51,500
UMXL-TM 2M モーター(2mコード) トルクタイプ		E355002	¥54,500
UMXL-CM 2M モーター(2mコード) コンパクトタイプ		E356002	¥54,500
UHRXL-TP ハンドピース トルクタイプ		H270	¥33,500
UHRXL-C ハンドピース コンパクトタイプ		H271	¥33,500
モーターコードT (1.2m) トルクタイプ用		E355051	¥8,500
モーターコードC (1.2m) コンパクトタイプ用		E356051	¥8,500
モーターコードT (2m) トルクタイプ用		E355055	¥11,500
モーターコードC (2m) コンパクトタイプ用		E356055	¥11,500

アルチメイト XLシリーズのヒューズの見分け方(シリアル番号で判別)

- T3.15 AL: ユニットのシリアル番号(ユニット背面に記載)の頭が“B”以外の場合
- T3.15 AH: ユニットのシリアル番号(ユニット背面に記載)の頭が“B”からはじまる場合

ボルバー i7 P244-245

製品名	製品	製品番号	標準価格
GX35RM-B&SCD モーター&コード (UHR45C用)		E1179	¥51,500
GX35EM-B&SCD E-タイプモーター& コード(VR-EB用)		E1180	¥56,000
UHR45C ハンドピース (リングタイプ)		H203002	¥28,000
VR-EB E-タイプハンドピース (リングタイプ)		H1062	¥31,000
GX用カーボン ブラシ GX35RM-B, GX35EM-B用(2個入)		E023011S	¥2,900

製品名	製品	製品番号	標準価格
FC-64 フットペダル (XL, XL-D用)		Z304	¥10,000
ハンドピース スタンド (スパナは付属しており ません)		Z095201	¥2,100
空間スタンド (XL用)		Z083	¥6,700
チャック CHH2.35		H203A180A	¥4,500
ハンドピース ホルダー XL用		Y900770	¥2,100
スパナ 回転止め用 (7×5.1)		H269751	¥250
スパナ チャック調整用 (7×5.1)		K015751	¥540
ブラケットセット (XL-D, XL-K用)		U364090	¥2,100
ヒューズ T3.15 AL		D1200131 510	¥230
ヒューズ T3.15 AH		D1202231 510	¥210

プレスト アクア II P246

製品名	製品	製品番号	標準価格
PRA-HP プレストアクア ハンドピース		T816	¥73,500
プレストアクア II用 ホース		Z308050	¥12,500
QD-J B3 カップリング		T354051	¥10,000
PR-AQ03 プレストアクア カートリッジ		T816016	¥24,500
Oリング(小) ジョイント部用		D0312019 085	¥320
Oリング(大) ジョイント部用		D0312063 080	¥320
チャック		T815019	¥3,200
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,500
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥2,000

プレスト II P247

製品名	製品	製品番号	標準価格
PR-HP プレストハンドピース (2mホース付)		T815	¥71,000
ハンドピース スタンド		Z010134	¥2,100
AFC-40 フットペダル		Z127	¥14,500
PR-03 プレストカートリッジ		T815016	¥18,500
チャック		T815019	¥3,200

製品名	製品	製品番号	標準価格
水フィルターセット(2m) 水供給用チューブ2本組、 水フィルター、 水フィルターケース		U387040	¥6,800
ケース付 水フィルター		Y900069	¥4,100
水フィルター		U387042	¥2,000
チューブ抑え リング (2個セット)		Y900077	¥540
PRA II ボトルセット		Z308040	¥8,250
PRA IIボトル用 Oリングセット (2個入)		Y900327	¥640
ブラケットセット		Z308060	¥5,150
EDスパナ		C034751	¥400
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,600

製品名	製品	製品番号	標準価格
プレスト用ホース (2m)		T815220	¥2,000
プレスト用 配管ホース (2m)		Z101240	¥2,000
LABスパナ		H005751	¥250
EDスパナ		C034751	¥400
プレスト パーレンチ		T815030	¥1,600

タービンカートリッジ早見表

ハンドピース		カートリッジ		ヘッドキャップ		
製品名	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
Z890L	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250
Z890ML	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250
Z890KL / Z890SL	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04	PA2380X050	¥5,250
Z890YL / Z890FL	TiZ9-MU03	PA2380X001	¥35,000	TiZ9-MU04(YOS)	PA2380X051	¥5,250
Z990L	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250
Z990ML	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250
Z990KL / Z990SL	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04	PA2381X050	¥5,250
Z990YL / Z990FL	TiZ9-SU03	PA2381X001	¥35,000	TiZ9-SU04(YOS)	PA2381X051	¥5,250
M micro	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250
M micro ML	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250
M micro YL / M micro FL	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250
M micro KL / M micro SL	SX3-NU03	PA2307X001	¥34,000	SX-NU04	PA2307X050	¥5,250
M800L / M800	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M800ML	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M800YL / M800FL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04 (YOS)	P1026500	¥5,250
M800KL / M800SL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M900L / M900	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
M900ML	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
M900YL / M900FL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
M900KL / M900SL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
pico	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250
pico ML	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250
pico YL / pico FL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04 (YOS)	P1148500	¥5,250
pico KL / pico SL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250
PRA-HP	PR-AQ03	T816016	¥24,500	—	—	—
PR-HP	PR-03	T815016	¥18,500	—	—	—

タービンカートリッジ早見表 (販売終了製品)

ハンドピース		カートリッジ		ヘッドキャップ		
製品名	製品名	製品番号	標準価格	製品名	製品番号	標準価格
Z800L / Z800	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250
Z800ML	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250
Z800YL / Z800FL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250
Z800KL / Z800SL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250
Z800WL / Z800BL	TiZ-MU03	Y1002075	¥35,000	TiZ-MU04	P1051050	¥5,250
Z900L / Z900	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250
Z900ML	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250
Z900YL / Z900FL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250
Z900KL / Z900SL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250
Z900WL / Z900BL	TiZ-SU03	Y1002076	¥35,000	TiZ-SU04	P1052050	¥5,250
M500L / M500	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M500ML	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M500YL / M500FL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04 (YOS)	P1026500	¥5,250
M500KL / M500SL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M500WLED / M500BLED	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M500H3L / M500MHL	SX3-MU03	P1280002	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M600L / M600	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250
M600ML	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250
M600YL / M600FL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
M600KL / M600SL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250
M600WLED / M600BLED	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250
M600H3L / M600MHL	SX3-SU03	P1281002	¥34,000	SX-SU04	P1002500	¥5,250
M800WL / M800BL	SX4-MU03	PA1280X003	¥34,000	SX-MU04	P1001500	¥5,250
M900WL / M900BL	SX4-SU03	PA1281X003	¥34,000	SX-SU04 (YOS)	P1027500	¥5,250
pico WLED / pico BLED	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250
pico MHL	SX-PU03	P1140200	¥31,500	SX-PU04	P1140500	¥5,250
PAX-SU M4 / B2	PAX-SU03	Y900772	¥26,500	PAX-SU04	P074050	¥5,250
PAX-TU M4 / B2	PAX-TU03	Y900773	¥26,500	PAX-TU04	P075050	¥5,250
MLXT-MU	NMC-MU03	P047	¥31,000	NMC-MU04	P047050	¥5,250
MLXT-SU	NMC-SU03	P045	¥31,000	NCH-MU04	P040050	¥5,250
MLXT-TU	NMC-TU03	P046	¥31,000	NCH-TU04	P042050	¥5,250
MC2-MU	NMC-MU03	P047	¥31,000	NMC-MU04	P047050	¥5,250
MC2-SU	NMC-SU03	P045	¥31,000	NCH-MU04	P040050	¥5,250
MC2-TU	NMC-TU03	P046	¥31,000	NCH-TU04	P042050	¥5,250
PRA-LUX-HP	PR-AQL03	T1002250	¥27,500	—	—	—

薬事情報一覧

■エアータービン

販売名：ティーマックス ZT 認証番号：224ALBZX00044000
販売名：エスマックス MT 認証番号：221ALBZX00001000
販売名：エスマックス pico 認証番号：222ALBZX00024000
販売名：ティーマックス X4 5 0 認証番号：222ALBZX00032000
一般的名称：歯科用ガス圧式ハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：picoバー 届出番号：09B2X00016000122
一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー 一般医療機器

■コントララングル

販売名：ティーマックス ZC 認証番号：222ALBZX00006000
販売名：ティーマックス Z4 5 認証番号：224ALBZX00018000
販売名：ティーマックス XC 認証番号：219ALBZX00013000
販売名：ティーマックス XS 認証番号：219ALBZX00014000
販売名：コントララングルハンドピース FXシリーズ 認証番号：222ALBZX00008000
販売名：ストレートハンドピース FX6 5 認証番号：222ALBZX00004000
販売名：コントララングルハンドピース Eシリーズ 認証番号：219ALBZX00006000
販売名：プロファイア AR 認証番号：222ALBZX00027000
販売名：歯間研磨用ハンドピース EVA 認証番号：222ALBZX00028000
販売名：エンド用コントラ VM 承認番号：20800BZ00762000
一般的名称：ストレート・ギアードラングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：エンド用コントラ MP 承認番号：22200BZX00182000
販売名：エンド用コントラ MPAS 承認番号：22200BZX00184000
一般的名称：歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：isoE-ラックス 届出番号：09B2X00016000150
一般的名称：歯科用口腔内手術灯 一般医療機器

■治療用モーター

販売名：NLX ナノ 認証番号：221ALBZX00015000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ティーマックス X2 0 5 L 認証番号：224ALBZX00027000
販売名：エスマックス M2 0 5 認証番号：222ALBZX00009000
一般的名称：歯科用空気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■オーラルハイジーン

販売名：パリオスコンビ Pro 認証番号：229ALBZX00017000
販売名：パリオス 97 0 認証番号：223ALBZX00032000
販売名：パリオス 37 0 認証番号：223ALBZX00037000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：ティーマックス S9 7 0 認証番号：223ALBZX00028000
販売名：S 5 0 ソニックブラシネット 認証番号：222ALBZX00019000
販売名：N S K エアスケール用チップ 認証番号：224ALBZX00042000
一般的名称：歯科用エアスケール 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：プロファイメイト neo 認証番号：223ALBZX00029000
販売名：ペリオメイト 認証番号：226ABBZX00023000
一般的名称：能動型機器接続歯面清掃用具 管理医療機器

販売名：フラッシュパール 届出番号：09B2X00016000034
販売名：ペリオメイト ハウダー 届出番号：09B2X00016000139
販売名：ソフパール 届出番号：09B2X00016000157
一般的名称：歯面研磨材 一般医療機器

販売名：ペリオメイト ノズルチップ 届出番号：09B2X00016000140
一般的名称：歯科用注入器具 一般医療機器

販売名：アイブローフィア 認証番号：226ABBZX00034000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■エンド治療

販売名：エンドメイト TC2 認証番号：222ALBZX00018000
一般的名称：歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：アイベックスⅡ 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■訪問診療用機器

販売名：ピバエース 認証番号：227ABBZX00112000
一般的名称：可搬式歯科用ユニット 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：NLX プラス 認証番号：221ALBZX00019000
販売名：ピバメイト G5 認証番号：223ALBZX00022000
一般的名称：歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：ピバ Q 認証番号：230ALBZX00025000
一般的名称：歯科用吸引装置 管理医療機器

販売名：パリオス 17 0 認証番号：223ALBZX00036000
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

■オーラルサージェリー

販売名：ティーマックス X-D SG2 0 L 届出番号：09B2X00016000124
販売名：ティーマックス X-D SG2 0 届出番号：09B2X00016000123
販売名：ティーマックス X-S SG 0 L 届出番号：09B2X00016000042
販売名：エスマックス SG2 0 届出番号：09B2X00016000041
販売名：ティーマックス X-S G 届出番号：09B2X00016000137
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：ティーマックス Z-S G4 5 認証番号：226ABBZX00073000
一般的名称：ストレート・ギアードラングルハンドピース
管理医療機器 特定保守管理医療機器

販売名：サージック Pro2 認証番号：303ALBZX00014000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器

販売名：コントララングルハンドピース SGM-E R 届出番号：09B2X00016000015
販売名：サージカルハンドピース SGM S-E R 届出番号：09B2X00016000018
販売名：ストレートハンドピース SG S-E 届出番号：09B2X00016000013
販売名：ストレートハンドピース SG S-E 2 届出番号：09B2X00016000014
販売名：ラングルハンドピース SGA-E 届出番号：09B2X00016000011
販売名：ラングルハンドピース SGA-E 2 届出番号：09B2X00016000012
一般的名称：手術用ドリルアタッチメント 一般医療機器

販売名：レシプロハンドピース SGR2-E 届出番号：09B2X00016000020
販売名：ストレートハンドピース SGO2-E 届出番号：09B2X00016000022
販売名：サジタルハンドピース SGT2-E 届出番号：09B2X00016000021
一般的名称：手術用のごり 一般医療機器

販売名：SGR-E用ソーブレード 届出番号：09B2X000160000102
販売名：SGO-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000098
販売名：SGT-E用ソーブレード 届出番号：09B2X00016000100
一般的名称：のごり 一般医療機器

販売名：iSD9 0 スクリュードライバ 認証番号：222ALBZX000160000
一般的名称：電池電源式骨手術用器械 管理医療機器

販売名：パリオサージ 3 認証番号：225ABBZX000144000
一般的名称：電動式骨手術器械 管理医療機器 特定保守管理医療機器
※チップは特定保守管理医療機器非該当

販売名：サージカル イリゲーションチューブ 認証番号：09B1X00001000023
一般的名称：洗浄器キット 一般医療機器

販売名：ソケットリフト ハンドインストルメント 認証番号：09B2X00016000141
一般的名称：歯科用起子及び剥離子 一般医療機器

販売名：オッセオ 100+ 届出番号：09B2X00016000153
一般的名称：歯接触分析装置 一般医療機器 特定保守管理医療機器

■オートクレーブ

販売名：アイクレーブミニ2 認証番号：302ABBZX00049000
一般的名称：小型包装用品高圧蒸気滅菌器 管理医療機器 特定保守管理医療機器

■技工用製品

販売名：アルチメイト XL 届出番号：09B2X00016000030
販売名：ボルバ-17 届出番号：09B2X00016000149
一般的名称：歯科技工用電動式ハンドピース 一般医療機器

販売名：プレスト アクアⅡ 届出番号：09B2X00016000010
販売名：プレストⅡ 届出番号：09B2X00016000009
一般的名称：歯科技工用ガス圧式ハンドピース 一般医療機器

株式会社ナカニシ nsk-dental.jp

本社・工場 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700 TEL:0289-64-3380 FAX:0289-62-5636
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 9F TEL:03-5828-4180 FAX:03-5828-0064
大阪事務所 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル10F TEL:06-6315-7217 FAX:06-6315-7218

製品に関するお問い合わせ お客様相談窓口 ☎0120-7242-56 受付時間：平日9:00～17:00

KaVoとMultiflexは、Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.の登録商標です。
Dentsply SironaとSironaは、Dentsply Sirona Inc.の登録商標です。
Bion AirとUNIFLEXは、Bion-Air Holding SAの登録商標です。
W&Hは、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbHの登録商標です。
iPAD[®]は、アメリカ合衆国およびその他の国々におけるApple Computer, Inc.の登録商標です。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。
仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。
(標準価格は2023年3月1日現在のものです)

