

ENDODONTICS

— エンド治療用機器 —

ENDO-MATE TC2 / ENDO-MATE DT / iPexII / Contra-angles / Scalers



CREATE IT.

Index

エンドメイト TC2 ----- P 03-04

エンドメイト DT ----- P 05-06

iPexII ----- P 07-08

ヘッド&モーター ----- P 09

ハンドピース ----- P 10

EX シリーズ ヘッド&シャンク ----- P 10

超音波スケーラー ----- P 11-12

エアースケーラー ----- P 13

スペアパーツ ----- P 14



ENDO-MATE TC2

エンドメイト TC2
コードレスエンドモーター

エンドメイトTC2は、ナカニシのマイクロモーター技術を駆使し、エンド治療におけるドクターのニーズに幅広く応えるために開発されました。アラーム&オートリバース機能は、ファイル破折のリスクを軽減し、プログラム機能は、回転速度やトルク等の設定値を5パターンまでメモリーすることが可能です。



広がる視野



ミニヘッドとスリムなネックのコントラアングルを採用することで、広い視野を確保できます。

快適な操作感


- 人間工学に基づいたデザインと軽量コンパクト設計 & コードレスで快適な操作感を実現しました。
- 6ポジション式ヘッドにより治療部位に応じてコントラアングルのヘッドの向きを変えられます。

※ファイル別売

プログラム機能による治療効率の向上

プログラム機能は、選択された回転速度、トルク、ギア比、オートリバースモードの組み合わせを5パターンまでメモリーすることが可能です。

▼プログラム設定パネル

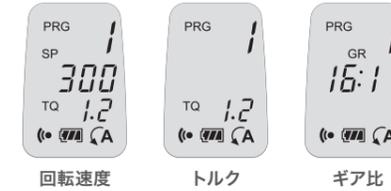

クイックジョイント式コントラアングルの採用でヘッドの交換が簡単にできます。また、1.5時間の急速充電が可能です。

ヘッドとの組み合わせで広範囲な回転域とトルクをカバー


ギア比	トルク (Ncm)	回転速度 (min ⁻¹)
4 : 1	0.1-0.7	500-2,250
10 : 1	0.2-2.2	200-900
16 : 1	0.3-3.0	140-550
20 : 1	0.4-4.0	100-450

安全性に配慮した機能

- 負荷が変化しても回転速度を一定に保つフィードバック回路を採用
- 無負荷の状態が10分間続くと、誤作動防止のためのオートパワーオフ機能が作動

ファイル破折のリスクを軽減するアラーム機能

設定したトルク値に対して、段階的に2種類のアラーム音で負荷の状況を的確に伝えます。ファイルに対する負荷の状況が手に取るようにわかるため、ファイル破折のリスクを低減し、治療の安全性を高めます。

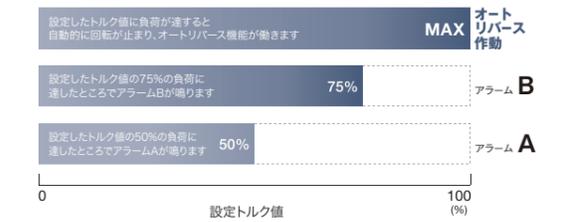

エンドメイト TC2 標準セット

エンドメイト TC2 標準セット

製品名 エンドメイト TC2 標準セット 製品番号 Y1001444 標準価格 ¥128,000

セット内容

- MP-F16R ヘッド ● エンドメイト TC2 モーター ● TC2用充電器

エンドメイト TC2 サブセット (ヘッド無し)

製品名 エンドメイト TC2 サブセット 製品番号 Y1001445 標準価格 ¥94,500

セット内容

- エンドメイト TC2 モーター ● TC2用充電器

仕様

- 回転速度 : 2,000-9,000 min⁻¹
- 充電時間 : 1.5 時間
- 連続使用時間 : 1.2 時間

電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

販売名 : エンドメイト TC2 認証番号 : 222ALBZX00018000
 一般的名称 : 歯科用電動式ハンドピース
 管理医療機器 特定保守管理医療機器



ENDO-MATE DT

エンドメイトDT
エンドモーター

エンドメイトDTは、エンド用マイクロモーターとして開発され、回転数とトルク値をプログラムでき、スムーズな治療を可能にします。コントロールユニットは、軽量・コンパクトなバッテリー式で、どこでもすぐに使用可能です。ハンドピースは、軽量で細く、高い操作性を実現し、エンド治療をサポートします。

ヘッドの組み合わせで広範囲な回転域をカバー

標準のギア (20:1) 以外にも、オプションの異なるギア比のヘッドを選択することにより、広範囲な回転速度で使用可能です。

ギア比	回転速度 (min ⁻¹)
4:1	500-3,200
20:1	100-650

フットペダルでも操作可能




ハンドピースの手元スイッチの他に、オプションのフットペダルでも、回転のON / OFFが可能です。(別売)

軽く、細く、疲れにくいハンドピース



※ファイル別売

6ポジションヘッド

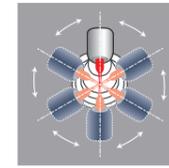

ヘッドの取付け角度は6通り、部位に応じてヘッドの向きを変えたり、押しやすい位置にON / OFF ボタンをセットできるので、操作性が向上します。

ON / OFF 切り換えは手元でOK

使い勝手に合わせて2通りのON / OFF 動作が選択できます。
A: 押し続けている間ON、離すとOFF
B: 一度押しすとON、もう一度押しすとOFF

プッシュボタン式ミニヘッド

ミニヘッドにより口腔内での高い視野を確保し、より治療の正確性を向上します。

クイックジョイント

クイックジョイントのため、様々なヘッドが簡単に交換できます。また、ヘッドの部分はオートクレーブが可能です。



選べるオートリバースモード

設定したトルクリミッター値に達した後、次の動作から選択できます。

モード:

- AUTO REVERSE オートリバース後、負荷がなくなると正回転に戻る
- AUTO REVERSE オートリバース後、負荷がなくなると停止
- オートリバースなし (正回転のみ)

エンドメイト DT 標準セット

エンドメイト DT 標準セット

製品名 エンドメイト DT 標準セット 製品番号 Y141119 標準価格 ¥142,000

セット内容

- コントロールユニット • モーター&コード • MP-F20Rヘッド (減速20:1)
- ハンドピーススタンド • ACアダプター

エンドメイト DT サブセット (ヘッド無し)

製品名 エンドメイト DT サブセット 製品番号 Y141122 標準価格 ¥108,500

セット内容

- コントロールユニット • モーター&コード • ハンドピーススタンド • ACアダプター

仕様

- 電源: AC 100 V / 電池パック • 最大トルク値: 7 Ncm (20:1シャック使用時) • 設定可能プログラム数: 9
- 回転速度: 100-3,200 min⁻¹ (シャックの組合せによる)
- 充電時間 / 連続使用時間: 充電5時間 / 連続使用2時間 (定格負荷)
- ユニット寸法: W 92 x D 148 x H 124 mm • 質量: 456 g (ユニット)、92 g (モーターハンドピースコード)

販売名: エンドメイトDT 承認番号: 21600BZZ00655000
一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置
管理医療機器 特定保守管理医療機器



※ファイル別売

iPexII

アイベックスII
根管長測定器

高精度根管長測定器

iPexIIは豊富な臨床データに裏づけされたナカニシ独自の根管長測定エンジン”SmartLogic”を採用し、多様な歯牙形態や状況においても根尖孔検出を可能にしました。

”SmartLogic”エンジンは根管内のファイル位置を検出し、特に根尖孔付近における細かいファイルの動きを3色LCDパネルに表示します。コンパクトボディで設置場所を選ばない根管長測定器iPexIIは、エンド治療の安全性を大きくサポートします。





次世代エンジン”SmartLogic”搭載

SmartLogicエンジンはナカニシ独自の「交互発振方式」と「面解析」により、根管内の様々な影響を排除したクリアな信号解析を行い、根尖孔検出を実現します。

- 2つの異なる周波数の交互発振方式を測定に採用し、信号解析に影響を与えるノイズの発生を抑え、フィルタ回路を通す必要の無い精度の高い波形の抽出を実現。
- 検出された周波数を面解析する独自の方式を採用。様々な状況が想定される根管内に対して、安定した測定値解析を実現し、ファイル挿入との確かな連動感をもたらします。



見やすい3色カラーLCD

▶ 測定開始

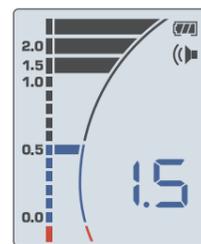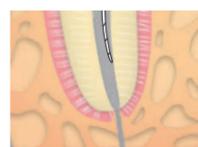



口腔内へのファイル挿入と同時にバーグラフが表示され、ファイルの進行状況とバー表示が連動します。

▶ 根尖部付近

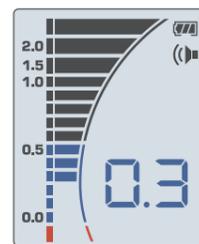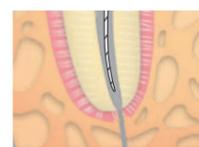


ファイル先端が根尖部付近に達するとバーグラフの色が青色に変わり、同時にアラート音も変化します。バーグラフとアラート音との変化により根尖孔に近づいている事をお知らせします。

▶ 根尖孔付近

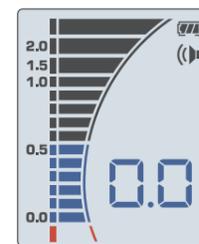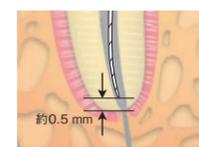

ファイル先端が根尖孔に達するとバーグラフは「0.0」を表示。アラート音が連続した音に変わります。

▶ 根尖オーバー

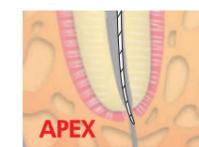

ファイル先端が根尖を超えた場合、赤いライン (APEX) と OA (over apex) の文字が表示されると同時に連続した速いアラート音でお知らせします。

ナカニシのエンドモーターとiPexIIとの組み合わせにより、正確で早い根管治療をサポートします。



iPexII 標準セット

製品名 iPexII 標準セット 製品番号 Y1002210 標準価格 ¥98,000

セット内容

- コントロールユニット ● iPexII フロープ (1.8 m) ● iPexII ファイルクリップ (3本)
- リップフック (3本) ● 単4電池 (3本) ● iPexII テスター

仕様

- 連続使用時間：60時間 (アルカリ電池使用時)
- 寸法：W 60 × D 60 × H 86 mm
- ユニット重量：76 g (単4電池含まず)

※連続使用時間は設定条件により異なります。

販売名：アイベックスII 認証番号：224ALBZX00015000
一般的名称：歯科用根管長測定器
管理医療機器 特定保守管理医療機器



エンドメイト TC2 / エンドメイト DT ヘッド&モーター

・ミニヘッド ・360°回転 ・Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ・プッシュボタン式チャック

コントラアングルヘッド

- 20:1 製品名 MP-F20R 製品番号 Y110044
標準価格 ¥33,500
- 16:1 製品名 MP-F16R 製品番号 Y110096
標準価格 ¥33,500



※ファイル別売

販売名: エンドコントラ MP 承認番号: 22200BZX00182000
一般的名称: 歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

根管長測定器接続用ヘッド (ロングシャンク用)

- 16:1 製品名 MPA-F16R 製品番号 Y110097
標準価格 ¥43,500
- ・根管長測定器接続用 (ロングシャンク用: 15 mm)



※ファイル別売

販売名: エンドコントラ MPA 承認番号: 22200BZX00183000
一般的名称: 歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

根管長測定器接続用ヘッド (ショートシャンク用)

- 20:1 製品名 MPAS-F20R 製品番号 Y110046
標準価格 ¥43,500
 - 16:1 製品名 MPAS-F16R 製品番号 Y110098
標準価格 ¥43,500
- ・根管長測定器接続用 (ショートシャンク用: 12 mm)



※ファイル別売

販売名: エンドコントラ MPAS 承認番号: 22200BZX00184000
一般的名称: 歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

上記のコントラアングルヘッド以外にも、別売りのヘッドとシャンクの組み合わせにより、ご使用のファイルにあわせた回転速度に対応できます。詳しくは、お取引の販売店にお尋ねください。

モーター

- 製品名 エンドメイト TC2 モーター 製品番号 E346
標準価格 ¥68,500
- ・回転速度: 2,000-9,000 min⁻¹ ・トルクコントロール機能
 - ・オートリバース機能



販売名: エンドメイト TC2 認証番号: 222ALBZX00018000
一般的名称: 歯科用電動式ハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

- 製品名 エンドメイト DT モーター&コード 製品番号 E275
標準価格 ¥40,000




販売名: エンドメイトDT 承認番号: 21600BZX00655000
一般的名称: 歯科用電気回転駆動装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

根管長測定器接続用ヘッド

MPA / MPASは根管長測定器に接続してご使用いただくためのエンドメイト TC2・エンドメイト DT用ヘッドです。エンドメイト TC2・エンドメイト DTと根管長測定器との併用により、治療の安全性を高めます。

選べる2つのヘッド

Ni-Tiファイルのシャンク長に応じて、2種類のヘッドから選択できます。

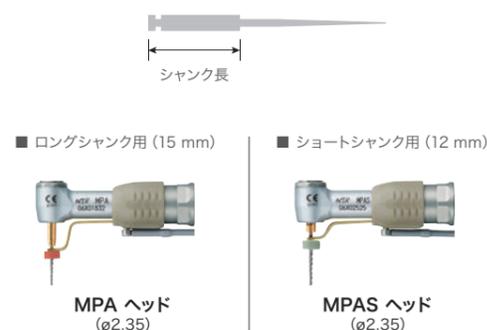

■シャンク長は各ファイルメーカーにご確認ください。 ※ファイル別売

熱水洗浄可能 (エンドメイト TC2 モーター・エンドメイト DT モーター&コードを除く) 135°C 135°Cまでの温度でオートクレープ可能 (エンドメイト TC2 モーター・エンドメイト DT モーター&コードを除く)

エンド用 ハンドピース

Ti-Max X シリーズ 内部注水



減速 10:1

- ライト付 製品名 X35L 製品番号 C620 標準価格 ¥123,000
 - ライト無し 製品名 X35 製品番号 C624 標準価格 ¥93,000
- ・チタン製ボディー&DURACOAT ・グラスロッドライト (ライト付のみ)
 - ・シングルスプレー ・ハンド / エンジンファイル ・60°ツイスト
 - ・プッシュボタン式チャック ・最高回転速度: 4,000 min⁻¹

販売名: ティマックス XC 認証番号: 219ALBZX00013000
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

- 製品名 クイックフィットアダプター 製品番号 C877701 標準価格 ¥5,000

FX シリーズ 外部注水



減速 16:1

- ライト無し 製品名 FX75 製品番号 C1055002 標準価格 ¥63,000
- ・ミニヘッド ・エンジンファイル用 ・360°回転 ・プッシュボタン式チャック
 - ・最高回転速度: 1,250 min⁻¹

販売名: コントラアングルハンドピース FXシリーズ 認証番号: 222ALBZX00008000
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

EX シリーズ 外部注水



ライト無し

- ヘッド 製品名 MPA-Y 製品番号 C548 標準価格 ¥28,000
- ・ミニヘッド ・根管長測定器接続用 (シャンク長 15 mm) ・360°回転
 - ・プッシュボタン式チャック ・最高回転速度: 20,000 min⁻¹

販売名: エンドコントラ MPA 承認番号: 22200BZX00183000
一般的名称: 歯科用根管拡大装置 管理医療機器 特定保守管理医療機器

ライト無し

- シャンク 製品名 ER64 製品番号 C637 標準価格 ¥58,000
- ・減速64:1

販売名: コントラアングルハンドピース EXシリーズ 認証番号: 219ALBZX00006000
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 管理医療機器 特定保守管理医療機器

EXシリーズ ヘッド&シャンク

ヘッド

- 製品名 MP-Y 製品番号 C547
標準価格 ¥18,000

- ・ミニヘッド ・プッシュボタン式チャック ・360°回転
- ・最高許容回転速度: 20,000 min⁻¹



- 製品名 MPA-Y 製品番号 C548
標準価格 ¥28,000

- ・根管長測定器接続用 (ロングシャンク用) ・ミニヘッド
- ・プッシュボタン式チャック ・360°回転 ・最高許容回転速度: 20,000 min⁻¹



- 製品名 MPAS-Y 製品番号 C882
標準価格 ¥28,000

- ・根管長測定器接続用 (ショートシャンク用) ・ミニヘッド
- ・プッシュボタン式チャック ・360°回転 ・最高許容回転速度: 20,000 min⁻¹



- 製品名 NRS2-Y 製品番号 C549
標準価格 ¥19,500

- ・減速10:1 ・エンジンファイル用 (φ2.35) ・クリーンヘッドシステム
- ・プッシュボタン式チャック ・360°回転 ・最高許容回転速度: 3,000 min⁻¹



- 製品名 TEP-Y 製品番号 C837001
標準価格 ¥31,500

- ・60°ツイスト運動 ・ハンドファイル用 ・プッシュボタン式チャック
- ・最高許容回転速度: 4,000 min⁻¹



- 製品名 VM-Y 製品番号 C765001
標準価格 ¥21,500

- ・上下往復 (ストローク幅0.4 mm) ・ハンドファイル用
- ・プッシュボタン式チャック ・最高許容回転速度: 8,000 min⁻¹



シャンク

- 製品名 EC-30 製品番号 C100008
標準価格 ¥10,500

- ・等速1:1



- 製品名 ER4 製品番号 C634
標準価格 ¥36,000

- ・減速4:1



- 製品名 ER10 製品番号 C635
標準価格 ¥40,500

- ・減速10:1



- 製品名 ER16 製品番号 C636
標準価格 ¥45,000

- ・減速16:1



- 製品名 ER64 製品番号 C637
標準価格 ¥58,000

- ・減速64:1



熱水洗浄可能 (FX75, EC-30, ER4, ER10, ER16, ER64を除く) 135°C 135°Cまでの温度でオートクレープ可能

超音波スケーラー

パリオス970 標準セット

- ライト付 製品名 VA970 Lux 製品番号 Y1001451 標準価格 ¥286,000
- ライト無し 製品名 VA970 製品番号 Y1001452 標準価格 ¥239,000

セット内容
 • コントロールユニット • ハンドピース • ハンドピースコード • スケーリング用チップ3本
 • フットコントロール(FC-70) • VAボトル(2本・400 mL) • 水フィルターセット
 • 水供給用コネクター • チップ交換レンチ(3個・CR-10) • 滅菌ケース、他付属品

販売名: パリオス 970 認証番号: 223ALBZX00032000
 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器



超音波スケーラー

パリオス370 標準セット

- ライト付 製品名 VA370 Lux 製品番号 Y1001429 標準価格 ¥188,000
- ライト無し 製品名 VA370 製品番号 Y1001430 標準価格 ¥141,000

セット内容
 • コントロールユニット(ハンドピースコード付) • パリオス370/370Lux ACアダプター • ハンドピース
 • コントロールユニットホルダー • スケーリング用チップ2本 • ハンドピースホルダー
 • フットコントロール(FC-71) • 水フィルターセット • 水供給用コネクター • チップ交換レンチ(CR-10)、他付属品

販売名: パリオス 370 認証番号: 223ALBZX00037000
 一般的名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器



エンド

製品名 E4 製品番号 Z217428
 標準価格 ¥7,200

- 根管洗浄
- 異物除去用



製品名 E15D 製品番号 Z217319
 標準価格 ¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口の探索、明示用



製品名 E4D 製品番号 Z217528
 標準価格 ¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- 根管洗浄
- 異物除去用



製品名 E11 製品番号 Z217031
 標準価格 ¥9,500

- Uファイル用(φ0.8 mm) • 根管洗浄用
- 前歯部用 • Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売



製品名 E5 製品番号 Z217305
 標準価格 ¥7,200

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用(側方加圧充填用)



製品名 E12 製品番号 Z217032
 標準価格 ¥9,500

- Uファイル用(φ0.8 mm) • 根管洗浄用
- 臼歯部用 • Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売



製品名 E6 製品番号 Z217306
 標準価格 ¥7,200

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用(側方加圧充填用)



製品名 Uファイル 33 mm / #15 製品番号 Y900062
 標準価格 ¥1,500

- ISO15 • 6本入



製品名 Uファイル 33 mm / #20 製品番号 Y900063
 標準価格 ¥1,500

- ISO20 • 6本入



製品名 Uファイル 33 mm / #25 製品番号 Y900064
 標準価格 ¥1,500

- ISO25 • 6本入



製品名 Uファイル 33 mm / #30 製品番号 Y900065
 標準価格 ¥1,500

- ISO30 • 6本入



製品名 Uファイル 33 mm / #35 製品番号 Y900066
 標準価格 ¥1,500

- ISO35 • 6本入



製品名 E7 製品番号 Z217307
 標準価格 ¥7,200

- ドライ仕様
- 充填材
- 異物除去用



製品名 E7D 製品番号 Z217317
 標準価格 ¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- フレア形成用



製品名 E8 製品番号 Z217308
 標準価格 ¥7,200

- ドライ仕様
- 充填材
- 異物除去用



製品名 E8D 製品番号 Z217318
 標準価格 ¥8,600

- ダイヤモンドコーティング
- フレア形成用



逆根管充填用高洞形成

製品名 E30RD 製品番号 Z217212
 標準価格 ¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 臼歯部用(右曲がり)



製品名 E30LD 製品番号 Z217213
 標準価格 ¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 臼歯部用(左曲がり)



製品名 E31D 製品番号 Z217210
 標準価格 ¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 前歯部
- 臼歯部用(70°)



製品名 E32D 製品番号 Z217211
 標準価格 ¥9,500

- ダイヤモンドコーティング
- 前歯部用(90°)



Vチップ(エンド用)



製品名 V30 製品番号 Z217030
 標準価格 ¥11,500

- Eチップ用レンチ付属 • 先端チップ別売



製品名 V-S50 製品番号 Y900169
 標準価格 ¥4,100

- 根管洗浄用 17 mm • 3本入



製品名 V-S51 製品番号 Y900170
 標準価格 ¥4,100

- 根管洗浄用 23 mm • 3本入



製品名 V-S52 製品番号 Y900171
 標準価格 ¥4,100

- 根管洗浄用 26 mm • 3本入



製品名 V-S53 製品番号 Y900172
 標準価格 ¥4,100

- 根管洗浄用 32 mm • 3本入



製品名 V-N50 製品番号 Y900182
 標準価格 ¥3,200

- ニッケルチタン • 根管洗浄用 26 mm • 3本入



製品名 V-N51 製品番号 Y900183
 標準価格 ¥3,200

- ニッケルチタン • 根管洗浄用 30 mm • 3本入




製品名 V-S50D 製品番号 Y900173
 標準価格 ¥6,000

- ダイヤモンドコーティング • 根管拡大・形成用 17 mm • 3本入



製品名 V-S51D 製品番号 Y900174
 標準価格 ¥6,000

- ダイヤモンドコーティング • 根管拡大・形成用 23 mm • 3本入



製品名 V-S52D 製品番号 Y900175
 標準価格 ¥6,000

- ダイヤモンドコーティング • 根管拡大・形成用 26 mm • 3本入



製品名 V-S53D 製品番号 Y900176
 標準価格 ¥6,000

- ダイヤモンドコーティング • 根管拡大・形成用 32 mm • 3本入



※ステップを作りにくくするため、先端部 1 mm の部分にはダイヤモンドコーティングを施していません。

熱水洗浄可能 (エンドメイト TC2 モーター、エンドメイト DT モーター&コードを除く)

135°C 135°Cまでの温度でオートクレープ可能 (エンドメイト TC2 モーター、エンドメイト DT モーター&コードを除く)

熱水洗浄可能 135°C 135°Cまでの温度でオートクレープ可能

エースケーラー

- チタン製ボディー&DURACOAT • グラスロッドライト • 3段階パワー調整可能 • 振動数：5,800-6,200 Hz
- 標準付属：スケーリング用チップ3本、チップ交換レンチ (CR-20)、チップカバー (L)

NSK パテラスカップリング

- ライト付 製品名 S970L 製品番号 T1005 標準価格 ¥173,000
- ライト無し 製品名 S970 製品番号 T1020 標準価格 ¥136,000



KaVo® カップリング

- ライト付 製品名 S970KL 製品番号 T1013 標準価格 ¥173,000



Sirona® カップリング

- ライト付 製品名 S970SL 製品番号 T1015 標準価格 ¥173,000



モリタαメインチューブ

- ライト付 製品名 S970ML 製品番号 T1017 標準価格 ¥173,000



ヨシダクイックジョイント

- ライト付 製品名 S970YL 製品番号 T1035 標準価格 ¥173,000



オサダファインジョイント

- ライト付 製品名 S970FL 製品番号 T1036 標準価格 ¥173,000



販売名：ティーマックス S970 認証番号：223ALBZX00028000 一般名：歯科用エースケーラー 管理医療機器 特定保守管理医療機器

Vチップ (エンド用)



- 製品名 S75 製品番号 Z252035 標準価格 ¥11,500
- Eチップ用レンチ付属 • 先端チップ別売



- 製品名 V-U15 製品番号 Y900177 標準価格 ¥1,700
- Vファイル 23 mm #15 ISO15 • 根管洗浄用 • 6本入



- 製品名 V-U20 製品番号 Y900178 標準価格 ¥1,700
- Vファイル 23 mm #20 ISO20 • 根管洗浄用 • 6本入



- 製品名 V-U25 製品番号 Y900179 標準価格 ¥1,700
- Vファイル 21 mm #25 ISO25 • 根管洗浄用 • 6本入



- 製品名 V-U30 製品番号 Y900180 標準価格 ¥1,700
- Vファイル 22 mm #30 ISO30 • 根管洗浄用 • 6本入



- 製品名 V-U35 製品番号 Y900181 標準価格 ¥1,700
- Vファイル 23 mm #35 ISO35 • 根管洗浄用 • 6本入



熱水洗浄可能 (EC-30, ER4, ER10, ER16, ER64を除く) 135°Cまでの温度でオートクレープ可能

スペアパーツ

エンドメイト TC2

製品名	製品	製品番号	標準価格
単4ニッケル水素電池セット* 2本入り		Y900103	¥950
TC2用充電器		Y1001446	¥26,000
コード MPA, MPAS用		C876021B	¥1,500
コード押さえ		C876509	¥500

製品名	製品	製品番号	標準価格
ACコード		U435550	¥500
バッテリーカバー		E346103	¥1,000
F10R 減速10:1		C398	¥14,000
F16R 減速16:1		C871	¥15,500

*電池セット：充電式以外のアルカリ、マンガン電池などは使用できません。
*写真の電池はサンプルです

エンドメイト DT

エンドメイトDT ACアダプター		U478	¥16,000
ハンドピーススタンド		Z095206	¥2,000
FC-15 フットペダル		Z248	¥6,500
コード MPA, MPAS用		C876021B	¥1,500

コード押さえ		C876509	¥500
電池 エンドメイト DT用電池パック		U421070	¥5,900
Fタイプスプレーノズル		Z256090	¥1,000

エンドメイト TC2 / エンドメイト DT 共通

MP-Y		C547	¥18,000
MPA-Y 根管長測定器接続用 (シャンク長 15 mm)		C548	¥28,000
MPAS-Y 根管長測定器接続用 (シャンク長 12 mm)		C882	¥28,000

F4R 減速4:1		C872	¥12,500
F20R 減速20:1		C399	¥15,500
Fタイプスプレーノズル		Z256090	¥1,000

MP-Y, MPA-Y, MPAS-Y共通
・Ni-Tiファイル用 (φ2.35) ・ミニヘッド ・360°回転 ・プッシュボタン式チャック
・最高回転速度：20,000 min⁻¹

iPexII

iPexII ファイルクリップ 1本		U1109351	¥1,900
iPexII テスター 1個		U1109353	¥1,300

iPexII プローブ 1本		U1109352	¥3,100
リップフック 1本		U501513	¥700

熱水洗浄可能 135°C 135°Cまでの温度でオートクレープ可能

株式会社 **ナカニシ** www.nsk-nakanishi.co.jp

本社・工場 〒322-8666
栃木県鹿沼市下日向700
TEL: 0289(64)3380
FAX: 0289(62)5636

東京事務所 〒110-0015
東京都台東区東上野4-8-1
TIXTOWER UENO 9F
TEL: 03(5828)4180
FAX: 03(5828)0064

大阪事務所 〒530-0057
大阪府北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル 10F
TEL: 06(6315)7217
FAX: 06(6315)7218

ナカニシお客様相談窓口 ナカニシ コール
受付時間 (土日祝日を除く) **0120-7242-56**
9:00~17:00
NSK製品に関するご意見・ご質問などございましたら、PHS・携帯からでもお気軽にお寄せください。

本カタログに記載しております標準価格に消費税は含まれておりません。仕様及び形状は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
ご使用前に必ず、製品に添付の「取扱説明書」および「添付文書」をお読みください。



ENDO-MATE TC2
ENDO-MATE DT
iPexII
Contra-angle
Scalers
Spare Parts